



LOHMANN & RAUSCHER



- **Терапия отрицательным давлением**
- **Перевязочный материал**
- **Все для гипсовой**
- **Операционное белье**

СУПРАСОРБ CNP

Метод лечения ран контролируемым отрицательным давлением, по-другому называемый вакуум-терапия, является в настоящий момент признанным стандартом в лечении острых и хронических ран.

Суть метода заключается в создании в ране локальной области разрежения, что обеспечивает эффективный отвод экссудата, а также способствует появлению грануляционной ткани и эпителизации. Его применение позволяет значительно сократить сроки очищения ран, добиться раннего купирования гнойного воспалительного процесса, а также более быстрого заживления раны.

Воздействие на рану отрицательным давлением:

- способствует эффективному отводу экссудата и снижению бактериальной нагрузки на рану;
- очищает рану от раневого детрита;
- стимулирует кровоток в ране;
- уменьшает отечность;
- стимулирует образование новых клеток и развитие грануляций;
- уменьшает раневую отечность и отек в окружающих здоровых тканях;
- сокращает рану в размерах.

Общие показания

СУПРАСОРБ CNP терапия используется для лечения как поверхностных, так и глубоких неинфицированных / контаминированных / колонизированных / критически колонизированных / инфицированных ран со степенью экссудации от слабой до сильной.

Показания

- Раны, заживающие вторичным натяжением, такие как:
- открытые раны брюшной полости;
 - медиастинит;
 - расхождение краев операционной раны;
 - ожоги I и II степеней;

- диабетическая стопа;
- пролежни;
- лучевые язвы;
- трофические язвы голени;
- травматические раны;
- стагнирующие раны;
- исследованные кишечно-кожные фистулы;
- исследованные лимфоидные фистулы;
- кожные трансплантаты и лоскуты;
- глубокие раны, карманы и полости.

Противопоказания

- «сухие» раны;
- ожоги III степени;
- нарушения свертываемости крови;
- открытые органы, сосуды и сосудистые анастомозы;
- не подвергшийся лечению остеомиелит (относительное);
- раны в неопластических тканях;
- некротические участки раны;
- кровотечения.



СУПРАСОРБ CNP P1



СУПРАСОРБ CNP P2



СУПРАСОРБ CNP P1

Система для лечения ран управляемым разрежением в условиях стационара.



Постоянный и переменный режимы работы

- Постоянный режим рекомендуется при сильной степени экссудации и при наличии инфекции. Минимальное значение давления — 10 мм рт. ст. Максимальное значение — 200 мм рт. ст.
- Переменный режим работы рекомендуется для стимуляции грануляции. Значение давления задается в интервале от -10 до -80 мм рт. ст., шаг временного интервала колебания давления — 0,5 мин.:
 - двойная система фильтрации: встроенный внутренний фильтр и бактериальный фильтр в пакете-вкладыше с коэффициентом эффективности фильтрации 99%;
 - пакет-вкладыш для сбора экссудата оснащен клапаном, обеспечивающим защиту от переполнения. Гелеобразующий агент обеспечивает безопасную утилизацию использованных пакетов;
 - полностью русифицированное меню и инструкция на русском языке;
 - цветовая кодировка дисплея: желтый — режим настройки/ожидания, зеленый — режим работы, красный — ошибка системы;
 - звуковые сигналы тревоги;
 - литиево-ионная батарея обеспечивает до 20 часов автономной работы;
 - легкий вес — 1,8 кг;
 - бесшумная работа системы;
 - большой ассортимент расходных материалов.



СУПРАСОРБ CNP P2

Система для лечения ран управляемым разрежением для мобильных пациентов.



Постоянный и переменный режимы работы

- Постоянный режим рекомендуется при сильной степени экссудации и при наличии инфекции. Минимальное значение давления – 10 мм рт. ст. Максимальное значение – 200 мм рт. ст.
- Переменный режим работы рекомендуется для стимуляции грануляции. Значение давления задается в интервале от -10 до -80 мм рт. ст., шаг временного интервала колебания давления – 0,5 мин.:
 - эргономичная форма и малый вес;
 - бактериальный фильтр, встроенный в емкость для сбора экссудата, с эффективностью фильтрации 99%;
 - звуковые сигналы тревоги;
 - меню на русском языке;
 - бесшумная работа системы;
 - удобная сумка для переноски обеспечивает комфорт мобильных пациентов;
 - до 20 часов автономной работы системы.

**Техника наложения повязки
с использованием марли КЕРЛИКС,
пленки СУПРАСОРБ F и плоского дренажа**



1. Очистите рану. При необходимости обработайте рану антисептиком и/или физиологическим раствором.



2. Для оценки эффективности проводимой терапии произведите документирование (лучше фото). Результат использования аппарата СУПРАСОРБ CNP вы можете опубликовать на сайте www.cleanwound.ru.



3. Вскройте упаковку с антимикробной повязкой КЕРЛИКС (повязка пропитана РНМВ – полигексанидом. РНМВ эффективен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов). Уложите в рану один или два слоя повязки КЕРЛИКС (при необходимости подрежьте повязку по размеру раны).



4. Достаньте плоский раневой дренаж (Софт Дрейн) из упаковки и обрежьте его по длине раны. Уложите дренаж на дно раны поверх уложенного ранее слоя КЕРЛИКС. (Определите заранее направленность дренажной трубки для обеспечения комфорта пациента).



5. Поверх дренажа уложите один или несколько слоев КЕРЛИКС до уровня кожи или несколько выше.



6. Отмотайте и отрежьте от рулона СУПРАСОРБ F необходимый кусок и наклейте его на повязку с запасом, захватив неповрежденную кожу. Пленка СУПРАСОРБ F полупроницаема и не вызывает опрелости кожи, при этом защищает рану от вторичной инфекции.



7. Сложите пленку СУПРАСОРБ F вдвойне клейким слоем наружу. Один слой к коже под дренажной трубкой, второй слой наружу.



8. Загерметизируйте повязку, наклеив на свободный наружный клейкий слой и саму повязку внахлест дополнительный кусочек пленки СУПРАСОРБ F для полной герметизации. Дополнительно герметизируйте повязку путем сжатия пальцами пленки СУПРАСОРБ F вокруг трубки дренажа.



9. Удалите излишки пленки СУПРАСОРБ F для соблюдения всех правил десмургии («повязка должна быть красивой»).



10. Присоедините дренажную трубку к коннектору аппарата СУПРАСОРБ CNP. Откройте фиксирующий зажим.



11. Повязка должна уплотниться и «осесть». Убедитесь, что герметичность соблюдена – дисплей на приборе горит зеленым цветом.

Техника наложения повязки при открытой брюшной полости


1. Удалите старую повязку.




2. Для оценки эффективности терапии произведите документирование состояния раны (лучше фото). Результаты лечения ран с использованием терапии отрицательным давлением СУПРАСОРБ CNP вы можете впоследствии опубликовать на сайте www.cleanwound.ru.



3. После выполнения всех необходимых общехирургических манипуляций вскройте упаковку с трехмерной дренажной пленкой и поместите ее на брюшную полость.

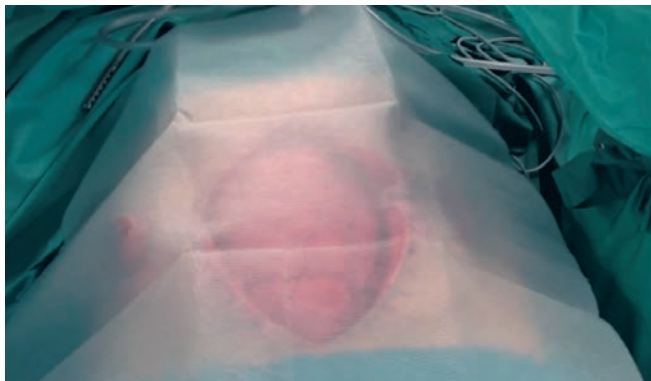

Затем вырежьте пленку по размеру с учетом того, что пленку необходимо будет разместить внутри брюшной полости и максимально проложить ее между петлями кишечника и передней брюшной стенкой.

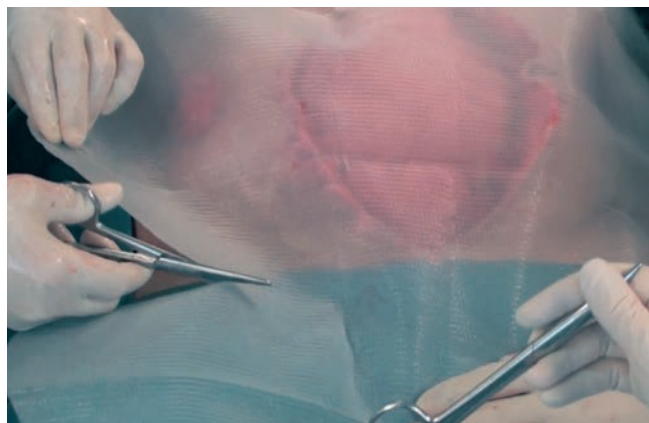

4. Сделайте на пленке разрезы во избежание возникновения грубых складок внутри брюшной полости.




5. Проложите пленку между петлями кишечника, сальника и передней брюшной стенкой, заправив ее руками и разгладив складки.





6. Вскройте упаковку с абдоминальной пенистой повязкой и вырежьте или оборвите руками пену по размеру раны в брюшной полости. **Внимание! Пенистая повязка не должна заходить на кожу!**

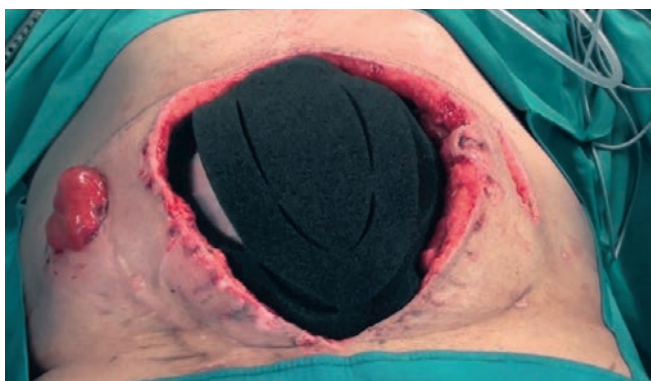

7. Поверх пенистой повязки могут быть наложены апоневротические провизионные швы.



8. Вскройте упаковку с дренажной трубкой. Может быть использован круглый силиконовый дренаж или профилированный четырехканальный дренаж типа «Эндодрейн». Отрежьте дренажную трубку по размеру. При необходимости может быть использовано два или более дренажа.



9. Поверх дренажа поместите антимикробную повязку КЕРЛИКС в несколько слоев. Повязка КЕРЛИКС может находиться на коже пациента.





10. Поверх повязки KERЛИКС при необходимости могут быть наложены провизионные швы, для этого можно использовать силиконовые турникеты.



11. В том случае, если останется незащищенная повязкой KERЛИКС раневая поверхность, следует наложить еще дополнительный слой вышеуказанной повязки KERЛИКС.



12. Завершающим шагом в наложении повязки является ее герметизация с использованием полупроницаемой пленки СУПРАСОРБ F (для процедуры герметизации может быть использована инцизная пленка РАУКОДРЕЙП).



13. После завершения герметизации повязки присоедините дренаж (или дренажи с использованием Y-образного переходника) к системе СУПРАСОРБ SNР. Выберите необходимый режим и уровень разрежения. Включите систему, убедившись в ее герметичности. Зеленый цвет экрана будет свидетельствовать об отсутствии неполадок и работе системы в штатном режиме.



СУПРАСОРБ CNP

СУПРАСОРБ CNP Помпы

Продукция		Код	Упак. ед.
СУПРАСОРБ CNP P1 	Система для терапии контролируемым отрицательным давлением. В функциональном чемодане.	25291	1 шт.
СУПРАСОРБ CNP P2 	Система для терапии контролируемым отрицательным давлением. С переносной сумкой, в функциональном чемодане.	25751	1 шт.

СУПРАСОРБ CNP P1 Набор для перевязки, малый

Продукция	Размер		Комплектация	Код	Упак. ед.
	Малый	5	КЕРЛИКС™ AMD™ перевязочная марля 15 x 17 см	39344	1 шт.
		1	Мягкий раневой дренаж 4 x 10 мм, 80 см		
		3	СУПРАСОРБ® F пленочное покрытие, 10 x 12 см		
		2	СУПРАСОРБ® F пленочное покрытие, 10 x 25 см		
		1	Соединительная трубка 25 Ch, 180 см		

СУПРАСОРБ CNP P1 Набор для перевязки, большой

Продукция	Размер		Комплектация	Код	Упак. ед.
	Большой	1	КЕРЛИКС™ AMD™ перевязочная марля в рулонах 11,4 см x 3,7 м	39345	1 шт.
		5	КЕРЛИКС™ AMD™ перевязочная марля 15 x 17 см		
		1	Мягкий раневой дренаж 4 x 10 мм, 80 см		
		3	СУПРАСОРБ® F пленочное покрытие, 10 x 12 см		
		5	СУПРАСОРБ® F пленочное покрытие, 10 x 25 см		
		1	Соединительная трубка 25 Ch, 180 см		

СУПРАСОРБ CNP P1 Принадлежности и аксессуары

Продукция		Код	Упак. ед.
	Емкость для сбора экссудата, 1000 мл	39405	1 шт.
	Мягкий вкладыш для сбора экссудата, 1000 мл	39406	1 шт.


СУПРАСОРБ CNP P1, P2

Продукция	Комплектация	Код	Упак. ед.
	Дренажный порт в индивидуальной стерильной упаковке	31740	1 шт.
	Мягкий раневой дренаж 4 x 10 мм, 80 см	2014-0102	1 шт.
	Соединительная трубка 25 Ch, 180 см в индивидуальной стерильной упаковке	25285	1 шт.
	Внутренний бактериальный фильтр CNP P1	25296	1 шт.
	КЕРЛИКС™ AMD™ перевязочная марля 15 x 17 см, уп./2 шт. КЕРЛИКС™ AMD™ перевязочная марля 11,4 см x 3,7 м, рулон	6662 3332	1 уп. 1 рул.

СУПРАСОРБ CNP Дренажная пленка с технологией PDC, индивидуально упакованная, стерильная

Продукция	Размер	Код	Упак. ед.
	Двойная дренажная пленка с уникальными капиллярами для отвода экссудата для лечения открытой брюшной полости или грудины, 77 x 60 см	39400	1 шт.
	Двойная дренажная пленка с уникальными капиллярами для отвода экссудата для лечения открытой брюшной полости или грудины, 20 x 25 см	39395	1 шт.

СУПРАСОРБ CNP Полиуретановая пена для наполнения ран, индивидуально упакованная, стерильная

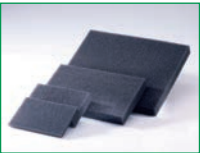Продукция		Размер	Код	Упак. ед.
	Пена размер М тонкая, антрацит	100 x 150 x 10 мм	39401	1 шт.
	Пена размер М антрацит	100 x 150 x 30 мм	39402	1 шт.
	Пена размер L антрацит	250 x 150 x 30 мм	39403	1 шт.
	Пена размер XL антрацит	250 x 300 x 30 мм	39404	1 шт.
	Пена для брюшной полости антрацит	380 x 250 x 15 мм 2 шт./уп.	39410	1 уп.

СУПРАСОРБ F пленочное покрытие, индивидуально упакованное, стерильное

Продукция	Клеящаяся поверхность (см)	Код	Упак. ед.
	5 x 7	20460	10/380
	5 x 7	20461	100/1000
	10 x 12	20462	10/100
	10 x 12	20463	50/200
	10 x 25	20464	10/140
	15 x 20	20465	10/400
	20 x 30	20466	10/180

СУПРАСОРБ F пленочное покрытие, индивидуально упакованное, нестерильное

Продукция	Клеящаяся поверхность	Код	Упак. ед.
	10 см x 1 м	20467	1
	10 см x 10 м	20468	1
	15 см x 10 м	20469	1



РАУКОДРЕЙП Инцизная пленка, индивидуально упакованная, стерильная

Продукция	Размер (см)	Код	Упак. ед.
	12 x 17	25440	10/80
	15 x 20	25441	10/60
	30 x 20	25442	10/80
	45 x 20	25443	10/80
	40 x 35	25444	10/80
	45 x 50	25445	10/80
	45 x 65	25446	10/40
	55 x 80	25447	10/40
	72 x 88	25448	10/40

Комплект с раневым дренажем и Y-образным коннектором

Продукция	Комплектация	Код	Упак. ед.
	Силиконовый раневой дренаж, плоский, 4 мм x 10 мм x 80 см, перфорированный 20 см; Y-образный коннектор с трубкой 10 см, стерильный	39338	1 компл.

Набор расходных материалов к СУПРАСОРБ CNP P1

Продукция	Комплектация	Код	Упак. ед.
	Вкладыш для экссудата, 1000 мл (5); соединительная трубка 25 Ch, 180 см	39339	1 компл.

СУПРАСОРБ CNP P2 Принадлежности и аксессуары

Продукция	Комплектация	Код	Упак. ед.
	Сборник для экссудата 250 мл с соединительной трубкой к дренажу	39785	1 компл.

Запасные части к СУПРАСОРБ CNP P1

Продукция	Комплектация	Код	Упак. ед.
	Сборник для экссудата, 1000 мл; вкладыш для сборника для экссудата, 1000 мл	39337	8/8

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как добиться герметичности повязки?

Если вы заподозрили утечку (послышится небольшой свистящий шум, а индикация на приборе СУПРАСОРБ CNP будет указывать на отсутствие герметичности, экран станет красным), устраните неполадку, слегка нажимая вокруг дренажа и складок пленки. Отрежьте небольшое количество пленки СУПРАСОРБ F от рулона и дополнительной полоской герметизируйте повязку.

Восстановление герметичности должно производиться, когда устройство находится в режиме ожидания, для того чтобы отрицательное давление не помешало наложению пленки СУПРАСОРБ F.

Что делать, если аппарат все время сигнализирует об ошибке?

Произведите изменение чувствительности аппарата. При нулевой чувствительности аппарата можно избежать постоянных оповещений об ошибке. Для этого войдите в настройки, введя код 1000.

Подключение режима пациента

В этом режиме аппарат продолжает нагнетать установленное отрицательное давление несмотря на правильность герметичности повязки. Для этого войдите в настройки, введя код 1999.

Как отсоединить пациента от аппарата на время?

Пациента можно отключать от устройства только на короткие промежутки времени и не более чем на 2 часа в сутки. Для этого используйте пластиковый зажим на соединительной трубке.



Насколько должна заходить герметичная пленка СУПРАСОРБ F за края раны?

Пленка СУПРАСОРБ F должна перекрывать рану на 5–7 см, покрывая только неповрежденную кожу.

Что делать, чтобы повязка не прилипла к ране?

Увлажните наполнитель раны КЕРЛИКС физиологическим раствором или проложите непрлипающую повязку с силиконом ЛОМАТЮЛЬ ПРО между раной и повязкой.

Как наложить повязку на расщепленный кожный лоскут?

Для улучшения приживления расщепленного лоскута и удержания его на месте при применении терапии отрицательным давлением:

- проложите непрлипающую повязку с силиконом Ломатюль Про между раной и повязкой, заходя за линию шва/скобок на 3–5 см;
- увлажните наполнитель раны КЕРЛИКС физиологическим раствором;
- установите дренаж по центру раны;
- установите давление в пределах -40 до -80 мм Hg.

Для ускорения образования грануляций можно распределить натуральный коллаген СУПРАСОРБ С на кожном лоскуте. Терапию рекомендуется проводить однократно, не более 3–4 дней.

Как наложить повязку при наличии карманов в ране?

Диаметр дренажа не должен быть больше, чем пространство, образованное подрывными краями раны, в противном случае возможна некротизация тканей вокруг него.

- Оберните дренаж в марлю КЕРЛИКС и увлажните физиологическим раствором.
- Заведите обернутый дренаж под края раны.
- Заполните дефект до уровня кожи увлажненной марлей КЕРЛИКС и загерметизируйте повязку.

Применяя аппарат СУПРАСОРБ CNP для лечения перитонита при открытой брюшной полости, для предотвращения соприкосновения перевязочного материала с внутренними органами необходимо оборачивать его в дренажную пленку с капиллярным эффектом СУПРАСОРБ CNP.

Что делать, если пациент испытывает боль при терапии отрицательным давлением?

Избыточное отрицательное давление может вызвать некроз тканей и вызвать болевые ощущения.

Нецелесообразно устанавливать давление, превышающее -120 мм Hg. Если пациент жалуется на дискомфорт в месте повязки, попробуйте уменьшать давление с шагом 10 мм Hg до минимального давления -40 мм Hg. Ниже этого давления лечение проводить не следует, так как оно неэффективно.

Что делать, если в сборнике для экссудата много чистой крови?

Если в собирающей емкости много крови, то терапию отрицательным давлением нужно остановить. При необходимости произведите гемостаз. Кровотечение – одно из противопоказаний к проведению терапии отрицательным давлением.

Когда следует прекратить CNP-терапию?

При достижении минимального давления -40 мм Hg. Ниже этого давления лечение проводить не следует.

Если достигнуты первоначальные цели лечения:

- грануляционная ткань покрывает 100% раневой поверхности;
- уровень грануляционной ткани находится на уровне окружающей кожи;
- общее состояние пациента / состояние раны улучшилось;
- раневая поверхность готова к пересадке кожного трансплантата;
- количество экссудата менее 20–50 мл в сутки;
- при последовательной смене двух повязок не наблюдается улучшения.

Как защитить кожу вокруг раны?

Необходимо защищать нежную кожу вокруг раны с помощью прозрачной пленки СУПРАСОРБ F или гидроколлоида СУПРАСОРБ H, в том числе тонкого.

С осторожностью удаляйте полупроницаемую пленку СУПРАСОРБ F при перевязке (необходимо слегка растягивать ее в стороны, для разрушения структуры пленки).

Какая может быть минимальная длина дренажа?

Длина дренажа не должна быть меньше 3 см с одним рядом перфораций.

Когда пациенты – дети. Особенности выбора режима и давления.

В этом случае показан постоянный режим отрицательного давления.

Перевязки для детей младше пяти лет проводятся в операционной.

Обязательно использование неприлипающей сетчатой повязки с силиконом Ломатюль Про между раной и повязкой.

Наполнителем раны может быть как губка, так и марля КЕРЛИКС.

Начинать лечение рекомендуется с низкого давления с постепенным его увеличением.

Как часто делать перевязку?

В зависимости от количества экссудации. При умеренной экссудации – каждые 48 часов. Впоследствии увеличьте время между перевязками до 2–3 раз в неделю.

Техника наложения моста


Эта техника может применяться в случаях, когда необходимо избежать давления от дренажа на рану. Например, в области пятки. Заполните раневое ложе перевязочным материалом (пена, марля КЕРЛИКС). Проклейте кожу от раны до места раневого дренажа пленкой СУПРАСОРБ F, сверху уложите сложенную в несколько слоев (зависит от количества экссудата) марлю КЕРЛИКС, в нее нужно завернуть силиконовый дренаж, но (!) сдвинутый с области давления (например, с пятки). После этого весь «мост» загерметизируйте пленкой СУПРАСОРБ F, особое внимание уделяя выходу раневого дренажа.

В каких случаях следует использовать постоянный режим?

Сделайте выбор в пользу постоянного режима отрицательного давления для предотвращения движения в ране и стабилизации раневого ложа (например, при торакальном применении, кожных трансплантатах). Его рекомендуют при обильной экссудации и при увеличенном риске кровотечения.

СЕРИЯ ПОВЯЗОК ДЛЯ ВЛАЖНОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН СУПРАСОРБ

Традиционное лечение ран многие годы заключалось в использовании бинтов и марлевых повязок. Использование хлопковых и других повязок частично защищает рану от попадания в нее микроорганизмов и препятствует развитию инфекционных осложнений. Однако традиционные повязки высушивают рану и обезживают ее.

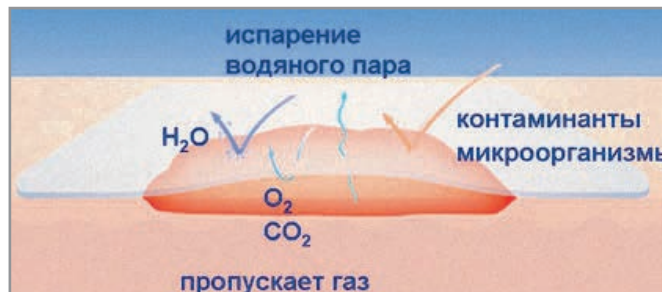

Обезживание поверхности раны происходит за 2–3 часа. Клетки тканей (кожа, мышцы и др.) не могут существовать в сухой среде. Они гибнут, и в ране развивается некроз на глубину от 0,2 до 0,3 мм. Высохший экссудат образует корку – струп. Образование новых клеток и заживление раны под струпом крайне затруднено. Заживление происходит медленно.

Компания Lohmann & Rauscher (Германия-Австрия), мировой лидер в разработке лечебных повязок, внедрила в практику европейского здравоохранения серию повязок СУПРА-

СОРБ. Повязки серии СУПРАСОРБ поддерживают рану во влажном состоянии и способствуют ее быстрейшему заживлению. Повязки выполняют функцию кожи – защищают рану и создают условия для развития тканей.

Повязки серии СУПРАСОРБ выполнены в виде полупроницаемых мембран, которые позволяют ране «дышать» (не вызывая опрелостей), но препятствуют проникновению микроорганизмов и влаги.

■ СУПРАСОРБ А – КАЛЬЦИЕВО-АЛЬГИНАТНАЯ ПОВЯЗКА

Состоит из натуральных альгинатных волокон. Обладает сильной впитывающей способностью. При контакте с раной образует гель, который заполняет рану. Не приклеивается к ране, смена повязки происходит безболезненно. Может оставаться в ране до 7 дней.

Может использоваться для ран с обильной экссудацией, таких как язвы, пролежни, свежие раны при пересадке кожи, а также для инфицированных ран. При контакте с раной СУПРАСОРБ А образует гель, рана всегда остается влажной, эпителий хорошо разрастается, и за счет оптимального микроклимата заживление раны ускоряется.

СУПРАСОРБ А не приклеивается к ране, поэтому при смене повязки свежие грануляции не повреждаются, и процесс заживления не нарушается. Сильная впитывающая способность повязки позволяет проводить перевязки через большие временные интервалы. В зависимости от типа раны и количества выделений СУПРАСОРБ А может оставаться в ране до 7 дней. Показанием к смене повязки является вытекание геля из раны.

Глубокие раны и полости удобнее обрабатывать тампонами СУПРАСОРБ А.


При контакте с раневым экссудатом или кровью гидрофильные альгинатные волокна набухают, СУПРАСОРБ А образует гель, который заполняет всю полость раны. В результате ионного обмена содержащиеся в экссудате ионы Na^+ поглощаются альгинатом и обмениваются на ионы Ca^{++} . Уменьшается отек раны. Для фиксации могут использоваться такие повязки, как СУПРАСОРБ Н или F, а также послеоперационная повязка КУРАПОР или пластырь КУРАФИКС.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка.

РАЗМЕРЫ: 5 x 5 см, 10 x 10 см, 10 x 20 см, тампоны 30 см / 2 г.



Схема воздействия СУПРАСОРБ А на рану

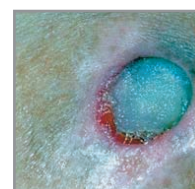

Образование геля после ионного обмена и набухания

КОД	РАЗМЕР	КОЛ-ВО В УП.
20440	5 x 5 см	10 шт.
20441	10 x 10 см	10 шт.
20442	10 x 20 см	10 шт.
20445	30 см / 2 г	5 шт.

■ СУПРАСОРБ А + Ag – КАЛЬЦИЕВО-АЛЬГИНАТНАЯ ПОВЯЗКА С ИОНАМИ СЕРЕБРА

Состоит из натуральных альгинатных волокон, содержащих в своем составе ионы серебра, имеющих антимикробный эффект. Обладает сильной впитывающей способностью. При контакте с раной образует гель, который заполняет рану. Не приклеивается к ране, смена повязки происходит безболезненно. Может оставаться в ране до 7 дней. Используется для лечения инфицированных ран.

Антимикробная кальцево-альгинатная повязка и тампон СУПРАСОРБ А + Ag представляют собой мягкий, хорошо прилегающий к ране перевязочный материал. Пропитанные серебром кальцево-альгинатные волокна при контакте с экссудатом из раны или кровью образуют гель, создающий влажную среду для раны. Серебро имеет антимикробный эффект.

СУПРАСОРБ А + Ag может быть использован для обработки инфицированных ран:

- с сильными выделениями;
- пролежней;
- артериальных язв;
- венозных язв на голени;
- диабетических язв;
- послеоперационных ран;
- грибковых поражений.

Для ран с небольшим количеством экссудата смочите повязку физиологическим раствором хлористого натрия (0,9%). Интервал времени между сменой повязки должен быть определен врачом в зависимости от стадии заживления раны.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка.

РАЗМЕРЫ: 5 x 5 см, 10 x 10 см, 10 x 20 см. Тампоны 30 см / 2 г.



Схема воздействия СУПРАСОРБ А + Ag на рану

КОД	РАЗМЕР	КОЛ-ВО В УП.
20570	5 x 5 см	10 шт.
20571	10 x 10 см	10 шт.
20572	10 x 20 см	5 шт.
20573	30 см / 2 г	5 шт.



Тампонирующая глубокой инфицированной раны СУПРАСОРБ А + Ag

■ СУПРАСОРБ Х ГИДРОБАЛАНС

Состоит из целлюлозы, воды, консерванта и 0,085% хлоргексидина глюконата. Обладает хорошей впитывающей способностью. При контакте с раной избыточное отделяемое впитывает, а при недостаточной увлажненности – увлажняет рану, поддерживая ее гидробаланс и обеспечивая максимально благоприятные условия для заживления и развития эпителия. Охлаждающий эффект оказывает дополнительное обезболивающее действие. Хорошо зарекомендовал себя для лечения ожогов.

Может использоваться для ран со слабой и средней экссудацией, таких как язвы, пролежни, свежие раны при пересадке кожи.

Для фиксации могут использоваться такие повязки, как СУПРАСОРБ F и рулонный пластырь КУРАФИКС.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка.

РАЗМЕРЫ: 5 x 5 см, 9 x 9 см, 14 x 20 см, тампоны 2 x 21 см.


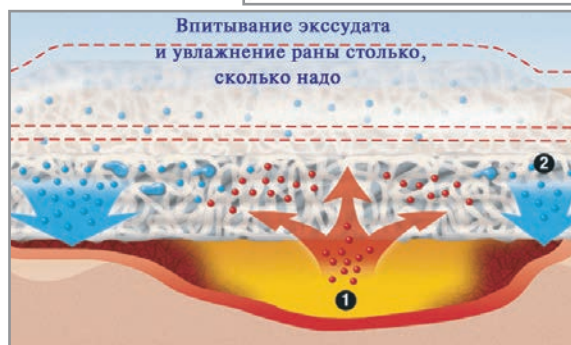


Схема воздействия СУПРАСОРБ Х на рану

КОД	РАЗМЕР	КОЛ-ВО В УП.
20534	5 x 5 см	5 шт.
20531	9 x 9 см	5 шт.
20532	14 x 20 см	5 шт.
тампон		
20533	2 x 21 см	5 шт.

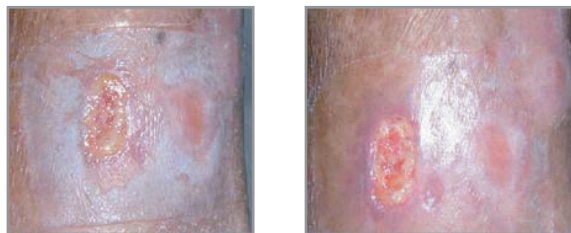

Наложение повязки на рану с умеренным отделяемым

СУПРАСОРБ X + РНМВ ГИДРОБАЛАНС С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Антимикробные повязки и тампоны СУПРАСОРБ X + РНМВ Гидробаланс состоят из целлюлозы, воды и 0,3% полигексаметилена бигуанида (РНМВ). Повязки СУПРАСОРБ X + РНМВ Гидробаланс оказывают влияние на широкий спектр бактерий, в том числе *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, *Escherichia coli*. Дополнительно изделия могут, в зависимости от состояния раны, увлажнять рану или впитывать излишний экссудат. В ране создается оптимальная влажная среда. При смене повязки не происходит повреждения тканей. Материал повязки и тампона позволяет проводить обработку ран любой формы и глубины. Склеивание с раной или вторичной повязкой не происходит. Изделия оказывают приятно охлаждающее и болеутоляющее действие. Можно оставлять на ране до 5–7 дней. Требуется дополнительной фиксации.

ПОКАЗАНИЯ: повязки и тампоны СУПРАСОРБ X + РНМВ Гидробаланс могут использоваться для обработки труднозаживающих и инфицированных поверхностных и глубоких ран со слабыми и средними выделениями, или сухих, например:

- артериальные и венозные язвы;
- язвы на фоне сахарного диабета;
- пролежни;
- поверхностные ожоги II степени;
- послеоперационные хирургические раны;
- раны при пересадке кожи;
- участки кожи после взятия трансплантата;
- ссадины, разрывы.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка.

РАЗМЕРЫ: 5 x 5 см, 9 x 9 см, 14 x 20 см, тампоны 2 x 21 см.



Наложение повязки на рану с умеренным отделяемым

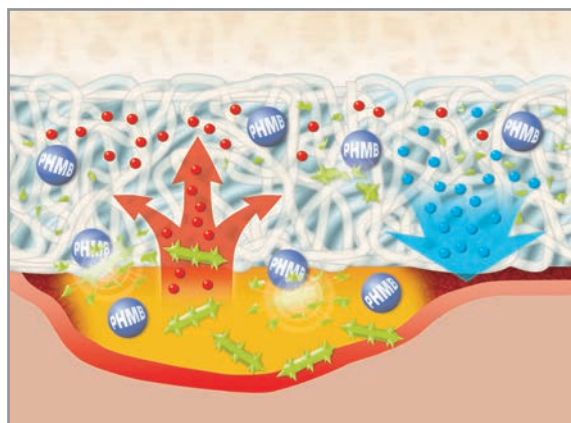


Схема воздействия СУПРАСОРБ X + РНМВ на рану

КОД	РАЗМЕР	КОЛ-ВО В УП.
повязка		
20540	5 x 5 см	5 шт.
20541	9 x 9 см	5 шт.
20542	14 x 20 см	5 шт.
тампон		
20543	2 x 21 см	5 шт.

■ СУПРАСОРБ Н – ГИДРОКОЛЛОИДНАЯ ПОВЯЗКА

Гидроколлоидная повязка покрыта полупроницаемой полиуретановой мембраной. Повязка обладает хорошей впитывающей способностью. Используется для ран со слабой и умеренной экссудацией. Не применяется для инфицированных ран. Не приклеивается к ране, смена повязки безболезненная. Может оставаться на ране 5–7 дней.

Это самофиксирующаяся повязка с хорошей впитывающей способностью для лечения неинфицированных поверхностных ран со слабой и средней экссудацией, например, используется для лечения язв, пролежней, сочащихся ожогов I и II степени, ссадин, а также как вторичная повязка на раны и свищи.

Образование геля препятствует приклеиванию к раневой поверхности, поэтому смена повязки осуществляется безболезненно. В зависимости от количества выделений СУПРАСОРБ Н может оставаться на ране до 5–7 дней. Как следствие – отсутствие необходимости частых перевязок, что сокращает стоимость лечения. Гидроколлоидный слой, состоящий из впитывающих и набухающих частиц, создает идеальную влажную раневую среду и способствует процессам грануляции и эпителизации. При контакте с раной образуется гель, который идеально заполняет полость раны. Раневой секрет впитывается. Полупроницаемая полиуретановая пленка надежно защищает рану от проникновения микроорганизмов и влаги, однако не препятствует газообмену, и избыточные влажные испарения легко улетучиваются.

Таким образом, СУПРАСОРБ Н используется для лечения ран смешанного типа, на стадии грануляции, в ранах со средним количеством отделяемого, а также как вторичная повязка в комбинации с СУПРАСОРБ А, G, C.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка.

РАЗМЕРЫ: 10 x 10 см, 15 x 15 см, 20 x 20 см, повязка на крестец: 14 x 16 см. Также выпускается в форме тонкой повязки СУПРАСОРБ Н для поверхностных ран, таких как ссадины, и ран со слабой экссудацией.

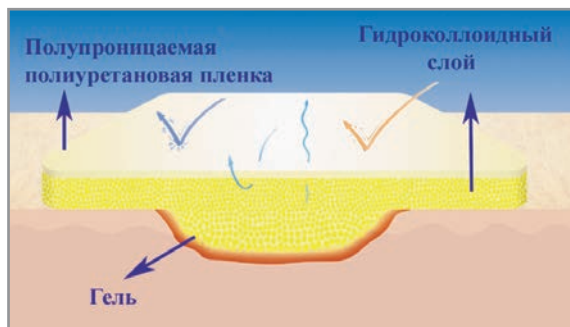


Схема воздействия СУПРАСОРБ Н на рану

КОД	РАЗМЕР	КОЛ-ВО В УП.
стандарт		
20403	10 x 10 см	10 шт.
20401	15 x 15 см	5 шт.
20402	20 x 20 см	5 шт.
тонкий		
20424	5 x 5 см	10 шт.
20410	5 x 10 см	10 шт.
20411	5 x 20 см	10 шт.
20412	10 x 10 см	10 шт.
20413	15 x 15 см	5 шт.
20414	20 x 20 см	5 шт.
на крестец		
20430	14 x 16 см	5 шт.



Образование геля
и смена повязки

■ СУПРАСОРБ С – НАТУРАЛЬНАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ ПОВЯЗКА


Состоит из природного коллагена высокой степени очистки. Обладает хорошей впитывающей способностью. Используется для лечения застойных и длительно незаживающих ран. Способствует образованию собственных коллагеновых волокон.

Природный коллаген пористой структуры, высокой степени очистки, полученный из стерильного коллагена крупного рогатого скота. СУПРАСОРБ С активно впитывает секрет, способствует грануляции и ускоряет процесс заживления. При поверхностных ранах, послеоперационных дефектах ткани, ожогах, язвах различного генеза повязки СУПРАСОРБ С высокоэффективны на любых стадиях заживления раны, особенно при наличии застойных явлений.

При инфекции не применять. Степень экссудации – слабая, средняя. Глубина раны – поверхностные и глубокие раны. Комбинируется с СУПРАСОРБ F, H, P.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка.

РАЗМЕРЫ: 4 x 6 см, 6 x 8 см, 8 x 12 см.

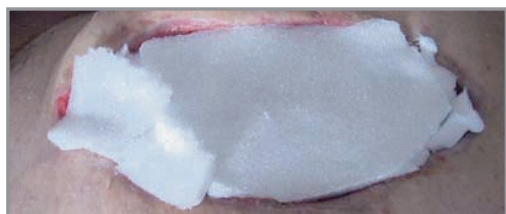

Тампонирующая глубокой послеоперационной раны СУПРАСОРБ С

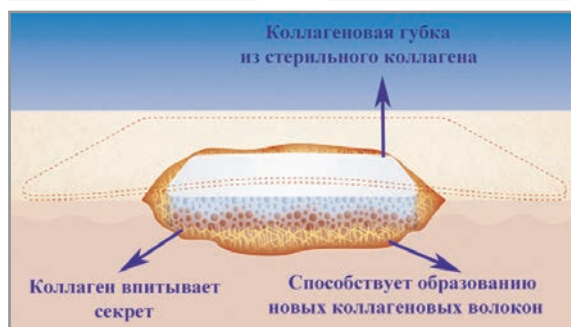


Схема воздействия СУПРАСОРБ С на рану

КОД	РАЗМЕР	КОЛ-ВО В УП.
20481	4 x 6 x 0,8 см	5 шт.
20482	6 x 8 x 0,8 см	5 шт.
20483	8 x 12 x 0,8 см	5 шт.

■ СУПРАСОРБ F – ПЛЕНОЧНАЯ ПОВЯЗКА

Полупроницаемая (дышащая) повязка СУПРАСОРБ F надежно защищает рану от вторичной инфекции. Газопроницаема и паропроницаема. Гипоаллергенный (полиакрилатный) клей не вызывает раздражения. Снятие повязки происходит безболезненно и не повреждает вновь образованный эпителий. Повязка прозрачная – можно наблюдать за состоянием раны. Часто используется для фиксации других повязок СУПРАСОРБ.

СУПРАСОРБ F – самофиксирующаяся прозрачная повязка на рану, без которой невозможно современное лечение ран. Данная повязка обладает многими преимуществами, однако, прежде всего, она надежно защищает рану от вторичной инфекции. СУПРАСОРБ F – дышащая, но при этом микро- и водонепроницаемая повязка, которая служит надежной защитой против проникновения микроорганизмов, не оказывая отрицательного влияния на кожное дыхание, предупреждая раздражение вокруг раны. За счет использования гипоаллергенного клея СУПРАСОРБ F не вызывает дополнительного раздражения и может использоваться у пациентов с чувствительной кожей и склонностью к аллергическим реакциям. Несмотря на надежную клеящую способность, снятие повязки происходит безболезненно и не приводит к повреждению вновь образованного эпителия. Благодаря прозрачности повязки СУПРАСОРБ F лечащий врач может легко наблюдать за состоянием раны, а также за местом фиксации катетеров и канюль. Благодаря водонепроницаемости повязки пациент может принимать душ с повязкой, тем самым облегчается ежедневная гигиена тела.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка.

РАЗМЕРЫ: 5 x 7 см, 10 x 12 см, 10 x 25 см, 15 x 20 см, 20 x 30 см.

Также выпускается в нестерильном варианте в виде рулона СУПРАСОРБ F.

РАЗМЕРЫ: 10 см x 1 м.

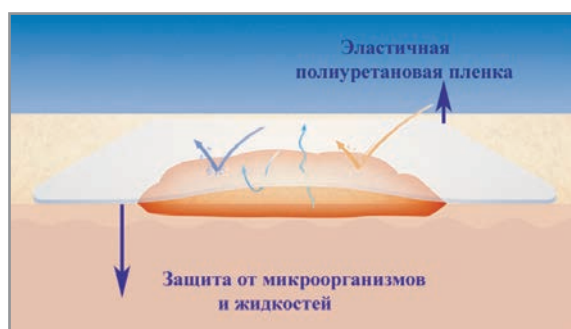


Схема воздействия СУПРАСОРБ F на рану



Использование СУПРАСОРБ F для фиксации СУПРАСОРБ A + Ag

КОД	РАЗМЕР	КОЛ-ВО В УП.
20460	5 x 7 см	10 шт.
20461	5 x 7 см	100 шт.
20462	10 x 12 см	10 шт.
20463	10 x 12 см	50 шт.
20464	10 x 25 см	10 шт.
20465	15 x 20 см	10 шт.
20466	20 x 30 см	10 шт.
20467	10 см x 1 м	1 шт.

■ СУПРАСОРБ G – ГИДРОГЕЛЬ


Повязка для сухих ран в виде аморфного геля. Высокий процент содержания влаги создает идеальную влажную раневую среду и растворяет поверхностные сухие некрозы. Используется для очищения и заживления поверхностных некротических ран, ожогов I и II степени, а также при поверхностных ранах со слабой экссудацией. Обладает болеутоляющими свойствами за счет охлаждающего эффекта геля.

Гидрофильный гель хорошо увлажняет рану, растворяет некротические части раны, тканевой детрит впитывается гелем и при смене повязки удаляется из раны.

СУПРАСОРБ G может использоваться в комбинации с другими повязками для глубоких ран, полостей и карманов. Выпускается в виде аморфного геля в шприце.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка.

РАЗМЕРЫ: шприц 6 г и 20 г.

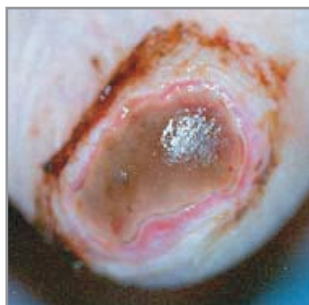

Растворение сухого некроза СУПРАСОРБ G

КОД	РАЗМЕР	КОЛ-ВО В УП.
Аморфный гель		
20478	6 г	10 шт.
20479	20 г	10 шт.

■ СУПРАСОРБ Р – ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГУБЧАТАЯ ПОВЯЗКА

СУПРАСОРБ Р – полиуретановая губчатая повязка – используется для заживления и покрытия гранулирующих тканей. Не используется при инфицировании раны. Применяется для ран с умеренной экссудацией. Используется для поверхностных ран. Комбинируется с СУПРАСОРБ А, С, G. Если окружающая рану кожа повреждена, рекомендуется использовать СУПРАСОРБ Р неклеящийся.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные неинфицированные пролежни, поверхностные венозные язвы с умеренной экссудацией.

Полиуретановая пенная повязка предназначена для лечения экссудующих или гранулирующих ран (неинфицированных). При контакте пенистой полиуретановой основы повязки с раневой поверхностью происходит впитывание экссудата, разбухание пенистой основы, которая заполняет всю полость раны, создавая тем самым благоприятные условия для влажного заживления и развития грануляций. Хорошо сохраняет свою форму после впитывания большого количества экссудата. Крайне мягкая и легко модифицируется. Полупроницаемая полиуретановая несущая пленка не препятствует газообмену, и избыточные влажные испарения легко улетучиваются. Повязка может меняться один раз в 5–7 дней.


ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка.

РАЗМЕРЫ:

клеящая форма: 7,5 x 7,5 см, 10 x 10 см, 15 x 15 см, 15 x 20 см;
неклеящая форма: 5 x 5 см, 7,5 x 7,5 см, 10 x 10 см, 15 x 15 см, 15 x 20 см.



Схема воздействия СУПРАСОРБ Р на рану

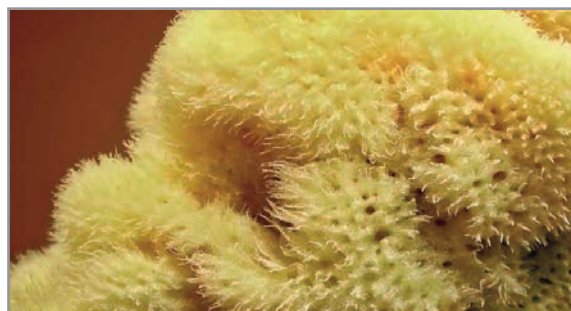

КОД	РАЗМЕР	КОЛ-ВО В УП.
20405	5 x 5 см	10 шт.
20406	7,5 x 7,5 см	10 шт.
20407	10 x 10 см	10 шт.
20408	15 x 15 см	5 шт.
20409	15 x 20 см	5 шт.
на клеящейся основе		
20416	7,5 x 7,5 см	10 шт.
20417	10 x 10 см	10 шт.
20418	15 x 15 см	5 шт.
20419	15 x 20 см	5 шт.
на крестец		
20415	18 x 20,5	5 шт.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИММОБИЛИЗИРУЮЩИЕ БИНТЫ ЦЕЛЛАКАСТ (CELLACAST)

ХАРАКТЕРИСТИКА: это легкий иммобилизирующий бинт, который изготавливается из специального стекловолокна, пропитанного полиуретановой смолой. Возможно его комбинированное применение с гипсовыми бинтами ЦЕЛЛОНА.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- уникальная в своем роде структура бинта обеспечивает его растяжимость в 6 направлениях и даже в направлении 2 противоположных диагоналей, в результате чего бинт особенно хорошо формируется и растягивается, обеспечивая особые возможности для моделирования повязок;
- повязка очень легкая, что делает ее более комфортной для больного;
- влагостойкость повязки позволяет принимать душ или ванну;
- повязка пропускает рентгеновские лучи, что позволяет выполнять контрольные снимки;
- воздухопроницаемость ЦЕЛЛАКАСТА позволяет решить проблему мацерации кожи;
- бинт ЦЕЛЛАКАСТ можно произвольно разрезать, делать в нем различные отверстия, кроме того, его можно разрезать на две шины;
- позволяет осуществить кодирование по цветам;
- бинт ЦЕЛЛАКАСТ прост в применении (его можно накладывать непосредственно, затвердевание 20 мин., или намочить в воде, затвердевание 10 мин.).




ЦЕЛЛАКАСТ ЭКСТРА



Для стабилизации (жесткий)



ЦЕЛЛАКАСТ АКТИВ

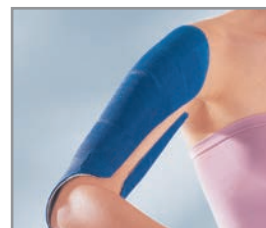

Для иммобилизации (полужесткий)

Бинт позволяет делать иммобилизирующую повязку быстро, чрезвычайно надежно и в то же время делает ее легкой, удобной. Данный бинт в среднем на 60% легче, чем традиционная гипсовая повязка. Бинт выпускают в индивидуальной упаковке, в герметично закрытом пакете из фольги. Перед наложением бинта ЦЕЛЛАКАСТ в качестве иммобилизирующей повязки рекомендуется применять защитные материалы чулочного типа ТИ-ДЖИ (TG) – на кожу и синтетическую вату типа ЦЕЛЛОНА.

■ **ЦЕЛЛАКАСТ ЭКСТРА (CELLACAST XTRA) синтетический бинт, жесткий.** УПАКОВКА: индивидуальная герметичная из фольги.

ЦВЕТ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Бежевый	2,5 см x 1,8 м	25205	10 шт.
	5,0 см x 3,6 м	25201	10 шт.
	7,5 см x 3,6 м	25202	10 шт.
	10 см x 3,6 м	25203	10 шт.
	12,5 см x 3,6 м	25204	10 шт.
Синий	5,0 см x 3,6 м	25211	10 шт.
	7,5 см x 3,6 м	25212	10 шт.
	10 см x 3,6 м	25213	10 шт.
	12,5 см x 3,6 м	25214	10 шт.
Оранжевый	5,0 см x 3,6 м	25235	10 шт.
	7,5 см x 3,6 м	25236	10 шт.
	10 см x 3,6 м	25237	10 шт.
	12,5 см x 3,6 м	25238	10 шт.
Желтый	5,0 см x 3,6 м	25239	10 шт.
	7,5 см x 3,6 м	25240	10 шт.

ЦВЕТ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
	10 см x 3,6 м	25241	10 шт.
	12,5 см x 3,6 м	25242	10 шт.
	Зеленый	25221	10 шт.
Зеленый	5,0 см x 3,6 м	25221	10 шт.
	7,5 см x 3,6 м	25222	10 шт.
	10 см x 3,6 м	25223	10 шт.
	12,5 см x 3,6 м	25224	10 шт.

ЦЕЛЛАКАСТ ЭКСТРА лонгета 4-слойная.

УПАКОВКА: индивидуальная герметичная из фольги.

ЦВЕТ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Бежевый	5 см x 20 см	25660	1 шт.
	7,5 см x 38 см	25261	1 шт.
	10 см x 38 см	25262	1 шт.
	10 см x 96 см	25263	1 шт.
	12,5 см x 76 см	25264	1 шт.

■ ЦЕЛЛАКАСТ АКТИВ (CELLACAST ACTIVE)

Синтетический бинт, полужесткий.

УПАКОВКА: индивидуальная герметичная из фольги.

ЦВЕТ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Бежевый	2,5 см x 1,8 м	23034	10 шт.
	5,0 см x 3,6 м	23035	10 шт.
	7,5 см x 3,6 м	23036	10 шт.
	10 см x 3,6 м	23037	10 шт.
	12,5 см x 3,6 м	23038	10 шт.
Синий	5,0 см x 3,6 м	23040	10 шт.
	7,5 см x 3,6 м	23041	10 шт.
	10 см x 3,6 м	23042	10 шт.
	12,5 см x 3,6 м	23043	10 шт.
Оранжевый	5,0 см x 3,6 м	23045	10 шт.
	7,5 см x 3,6 м	23046	10 шт.
	10 см x 3,6 м	23047	10 шт.
	12,5 см x 3,6 м	23048	10 шт.

■ Инструкция по наложению ЦЕЛЛАКАСТА



Наложение чулка TG



Наложение ваты ЦЕЛЛОНА



Готовая повязка

- ПОДГОТОВКА.** Кожный покров, одежду и рабочие поверхности необходимо защитить от контакта с ЦЕЛЛАКАСТОМ. Предварительно наложите пациенту прокладочный и подкладочный материалы. Врачу и его ассистенту необходимо надеть перчатки. Упаковки ЦЕЛЛАКАСТА открывайте по мере необходимости (при контакте с влагой воздуха он начинает твердеть).
- УВЛАЖНЕНИЕ.** Только при увлажнении материал приобретает превосходные клеящие свойства. Температура воды не должна превышать 20–24 °C (в противном случае пациент может получить ожог из-за выделяющегося тепла при отвердении бинта). При погружении бинта в воду необходимо 3–4 раза легко надавить на него — для более полного смачивания. После этого лишнюю воду стряхнуть. Если упаковку бинта ЦЕЛЛАКАСТ вскрыть, но не погружать в воду, то процесс полимеризации начнется от взаимодействия с воздухом, содержащим влагу. Время полного затвердевания повязки увеличится до 10–15 минут, что даст больше времени для репозиции отломков костей и моделирования повязки.
- ОБРАБОТКА.** Бинты ЦЕЛЛАКАСТ накладывают циркулярными турами, без натяжения. Каждый последующий тур должен перекрывать предыдущий наполовину. ЦЕЛЛАКАСТ легко накладывается в сложных местах, при этом не возникает складок и изгибов. Моделирование продолжается 2,5–3 мин. Различные поддерживающие приспособления, такие как шарниры и др., могут фиксироваться ЦЕЛЛАКАСТОМ.
- ГОТОВАЯ ПОВЯЗКА.** Затвердевание повязки происходит в течение 5–8 минут. Процесс полимеризации ускоряется при смачивании поверхности повязки водой при помощи губки. Через 20–30 мин. на повязку ЦЕЛЛАКАСТА можно давать полную нагрузку. Обработка, формирование отверстий, снятие повязки возможны при помощи обычных инструментов или осциллирующей пилы.
- ЗАМЕЧАНИЯ.** При контакте ЦЕЛЛАКАСТА с кожей врача или пациента протрите это место спиртом или ацетоном. Повязки ЦЕЛЛАКАСТ не размокают. Не рекомендуется регулярный прием ванны или душа, так как намокший прокладочный материал может вызывать мацерацию кожи. При этом качество и прочность самой повязки ЦЕЛЛАКАСТ не страдает. Однако если пациент прибегнул к водным процедурам, необходимо высушить ЦЕЛЛАКАСТ с использованием полотенца и фена.
- Хранить ЦЕЛЛАКАСТ при температуре не более 24 °C.

ГИПСОВЫЕ БИНТЫ ЦЕЛЛОНЫ И ПОДКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

■ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ГИПСОВЫЙ БИНТ ЦЕЛЛОНЫ

Гипсовый бинт ЦЕЛЛОНЫ – эталонное качество.

ЦЕЛЛОНЫ – так назывался первоначальный, пропитанный гипсом бинт, который фирма «ЛОМАН И РАУШЕР» в течение нескольких десятилетий улучшала и разрабатывала. Его мелкодисперсная кремообразная структура обеспечивает исключительные возможности для моделирования. Он удобно располагается в руке и позволяет накладывать тонкие, равномерные по толщине прочные гипсовые повязки.

Бинты ЦЕЛЛОНЫ равномерно пропитываются водой в течение непродолжительного замачивания с минимальной потерей гипса. Они обеспечивают идеальные возможности для моделирования, быстро затвердевают, что отвечает требованиям современной клинической практики. Через 24 часа повязка может подвергаться нагрузкам. После затвердения она достаточно легкая, прочная и пропускает рентгеновские лучи.

ЦЕЛЛОНЫ широкий гипсовый бинт. Этот материал обеспечивает повышенную стабильность в тех случаях, когда требуется полная фиксация. При этом достигается быстрое покрытие больших поверхностей тела, что позволяет сэкономить время и деньги и одновременно дает лучшие результаты. Данный материал был разработан с учетом быстрого и равномерного пропитывания, с ним легко работать, он обеспечивает быстрое схватывание и затвердевание.

ФОРМА ВЫПУСКА: длина гипсового бинта 2, 3 или 4 м, ширина 6, 8, 10, 12, 15 и 20 см.

ЦЕЛЛОНЫ гипсовая лонгета: рулон 20 м, ширина 10, 12, 15, 20 см.

Широкий гипсовый бинт ЦЕЛЛОНЫ: длина 5 м, ширина 40, 60, 80 см.

ПОКАЗАНИЯ:

- для иммобилизирующих повязок;
- для ортопедической коррекции;
- для таких сложных повязок, как гипсовый корсет, или постель для больных, страдающих заболеваниями позвоночника.

ДЛИНА	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
ЦЕЛЛОНЫ гипсовый бинт, упаковка индивидуальная			
Рулон 2 м, 5 бинтов в упаковке	6 см	25400	60 шт.
	8 см	25401	60 шт.
	10 см	25402	40 шт.
	12 см	25403	40 шт.
	15 см	25404	40 шт.
	20 см	25405	40 шт.
Рулон 3 м	8 см	25411	40 шт.
	10 см	25412	40 шт.
	12 см	25413	40 шт.
	15 см	25414	40 шт.
	20 см	25415	30 шт.
Рулон 4 м	8 см	25421	40 шт.
	10 см	25422	40 шт.
	12 см	25423	30 шт.
	15 см	25424	20 шт.
	20 см	25425	20 шт.
ЦЕЛЛОНЫ гипсовая лонгета, 4-слойная, упаковка индивидуальная, раздаточная коробка из картона			
Рулон 20 м	10 см	25500	1 шт.
	12 см	25501	1 шт.
	15 см	25502	1 шт.
	20 см	25503	1 шт.
ЦЕЛЛОНЫ широкий гипсовый бинт			
Рулон 5 м	40 см	20301	1 шт.
	60 см	20302	1 шт.
	80 см	20303	1 шт.



Замачивание ЦЕЛЛОНЫ



Наложение ЦЕЛЛОНЫ



Наложение ЦЕЛЛОНЫ

■ ПОДКЛАДОЧНЫЙ ЧУЛОК TG

Чулочная повязка ТИ-ДЖИ (TG) выполнена из хлопка (67%) и вискозы (33%) и предназначена для наложения на конечность под иммобилизирующую повязку. Повязка может накладываться в один, два или три слоя в зависимости от необходимости. Не имеет шва. Наложение повязки ТИ-ДЖИ увеличивает комфортность пациента и предотвращает появление потертостей и пролежней от повязки. Чулочная повязка ТИ-ДЖИ растягивается в поперечном и продольном направлениях без складок, может автоклавироваться. Широкий набор диаметров повязки позволяет хирургу выбрать необходимый и отрезать нужную длину.



Наложение чулка TG



Наложение чулка TG



Наложение чулка TG

ДЛИНА	РАЗМЕР	ТИ-ДЖИ	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Рулон 5 м	1 (1,4 см)	Палец	24020	1 рул.
	2 (2,3 см)	Пальцы	24021	1 рул.
	3 (3,0 см)	Пальцы, детская кисть	24022	1 рул.
	5 (5,5 см)	Кисть, голень взрослого, детская нога	24023	1 рул.
	6 (6,5 см)	Рука, нога взрослого (средних размеров)	24024	1 рул.
	7 (7,0 см)	Рука, нога взрослого (больших размеров), детская голова	24025	1 рул.
Рулон 20 м	1 (1,4 см)	Палец	24000	1 рул.
	2 (2,3 см)	Пальцы	24001	1 рул.
	3 (3,0 см)	Пальцы, детская кисть	24002	1 рул.
	5 (5,5 см)	Кисть, голень взрослого, детская нога	24003	1 рул.
	6 (6,5 см)	Рука, нога взрослого (средних размеров)	24004	1 рул.
	7 (7,0 см)	Рука, нога взрослого (больших размеров), детская голова	24005	1 рул.
	9 (8,5 см)	Бедро, голова взрослого	24006	1 рул.
Рулон 10 м	12 (12 см)	Бедро, голова взрослого (больших размеров), детское туловище	24007	1 рул.
	K1 (16 см)	Туловище (небольших размеров) < 48 размера	24030	1 рул.
	K2 (21 см)	Туловище (больших размеров) > 48 размера	24031	1 рул.

■ ПОДКЛАДОЧНЫЙ ЧУЛОК TG SOFT

Чулочная повязка ТИ-ДЖИ СОФТ выполнена из хлопка (85%) и эластана (15%). Используется для подкладки под классический гипс, ЦЕЛЛАКАСТ и ЦЕЛЛАКАСТ АКТИВ. Не требует использования специальной иммобилизующей техники. Эластична, не сползает и практически не дает морщин, легка в применении. Подогнутые края остаются мягкими в течение всего периода носки повязки.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальный картонный диспенсер.



ДЛИНА	РАЗМЕР	ТИ-ДЖИ SOFT	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Рулон 10 м	S	Предплечье взрослого, детская рука, нога	13200	1 рул.
	M	Рука, голень взрослого	13201	1 рул.
	L	Нога взрослого	13202	1 рул.

■ ПОДКЛАДОЧНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ВАТА ЦЕЛЛОНА

Синтетическая вата используется в качестве подкладки под гипс или ЦЕЛЛАКАСТ. Вата выпускается в виде бинтов, которые легко накладываются как повязка. Слои ваты ЦЕЛЛОНА фиксируются между собой, тем самым облегчая наложение повязки. Подкладочный слой из ваты ЦЕЛЛОНА целесообразно накладывать на чулочную повязку ТИ-ДЖИ, что позволяет пациенту комфортно чувствовать себя в иммобилизирующей повязке, избегая потертостей и пролежней.

УПАКОВКА: индивидуальная бумажная.

РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
4 см x 3 м	10690	108 рул.
6 см x 3 м	10692	72 рул.
10 см x 3 м	10694	48 рул.
15 см x 3 м	10695	36 рул.
20 см x 3 м	10696	24 рул.



Наложение подкладочной ваты ЦЕЛЛОНА

■ ПОДКЛАДОЧНЫЙ МЯГКИЙ ФЕТР ЦЕЛЛОНА

Мягкий и эластичный нетканый подкладочный материал (полиэстер, полипропилен, вискоза) белого цвета на клейкой основе для защиты костных выступов и сосудисто-нервных сплетений при наложении иммобилизирующих повязок. Легко режется обычными ножницами, очень удобен при формировании защитных прокладок индивидуальной формы и размера. Клейкий слой нанесен полосками, что обеспечивает хороший воздухообмен, защищен восковой бумагой. Хорошо переносится пациентами.

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	КОД
Толщина 5 мм, пластина	19 x 38 см	50810
Толщина 2 мм, рулон	58 см x 1 м	50811
	28 см x 10 м	50813
Толщина 2 мм, рулон	8 см x 5 м	50812



■ КАБЛУК ЦЕЛЛОНА ШУ ДЛЯ ХОДЬБЫ В ГИПСЕ

Специальный облегченный каблук для использования при наложении иммобилизирующей повязки на нижнюю конечность. Изготовлен из синтетической резины светло-серого цвета с антискользящим протектором. Обладает ударопоглощающим эффектом.

РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
малый	50820	1 шт.
средний	50821	1 шт.
большой	50822	1 шт.



■ ПОДОШВА ДЛЯ ХОДЬБЫ В ИММОБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ПОВЯЗКЕ ЦЕЛЛОНА ШУ

Служит для облегчения передвижения при использовании гипсовых и синтетических повязок на нижних конечностях. Благодаря особой конструкции «язычка» может использоваться в двух вариантах – закрытом и открытом. При любом варианте ношения подошва обеспечивает надежную защиту и поддержку стопы. Подгоняется под размер стопы с помощью системы липучек. Застежка на лодыжке позволяет удобно зафиксировать подошву на ноге. Специальная форма протектора препятствует скольжению и позволяет использовать подошву даже при влажных погодных условиях. Универсальна – подходит как для левой, так и для правой ноги.

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД
Для детей	P (размер 25–30)	16471
	XS (размер 31–34)	16472
Для взрослых	S (размер 35–38)	16473
	M (размер 39–41)	16474
	L (размер 42–43)	16475
	XL (размер 44–47)	16476
	XXL (размер 47–51)	90347



А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

- В подшиновы чупок TG можно вкладывать лонгету из гипса ЦЕЛЛОНА в сухом виде! И, смочив, моделировать, как готовую шину. Этим достигается прочность в 12! дополнительных слоев гипсового бинта, а вес остается прежним.
- В трубчатый подкладочный чупок TG можно укладывать слоями синтетическую вату ЦЕЛЛОНА и из такого «жгута» формировать поддерживающую повязку при переломе ключицы. При этом берется длина чупка TG от пальцев одной руки до пальцев другой руки пациента (через шею), а длина сложенной в несколько слоев ваты – от локтя до локтя.
- Традиционный гипс ЦЕЛЛОНА при застывании приобретает температуру в два раза большую, чем температура воды, то есть, используя воду для смачивания гипса $t\ 30\ ^\circ\text{C}$, на теле пациента повязка приобретает $t\ 60\ ^\circ\text{C}$, что может стать причиной ожога.
- Для того чтобы иметь больше времени на моделирование синтетической повязки из ЦЕЛЛАКАСТА, не погружайте бинт в воду, а просто сбрызгивайте его из пульверизатора по ходу нанесения.
- В состав синтетического бинта ЦЕЛЛАКАСТ входит мыльный раствор для облегчения процесса моделирования. Поэтому моделировать иммобилизирующую повязку можно только полностью наложив все предполагаемые слои ЦЕЛЛАКАСТА, иначе пузырьки будут препятствовать склеиванию слоев между собой.
- Чтобы инструменты и незащищенные участки кожи не пострадали от ЦЕЛЛАКАСТА, обработайте их предварительно кремом ЦЕЛЛОНА.
- Из циркулярной синтетической повязки из ЦЕЛЛАКАСТА можно сразу же после его застывания сформировать съемный ортез. Для этого через 20 минут после моделирования осциллирующей пилой вырезается съемный «язычок», как у ботинка. Он потом создает люфт для возможного изменения объема конечности. Для его фиксирования подойдет любой когезивный бинт, например, МОЛЛЕЛАСТ ХАФТ или ХАФТЭЛАСТ.
- Для ведения ран под иммобилизирующей повязкой можно вырезать осциллирующей пилой «окно». Для предотвращения его проваливания внутрь держите пилу под углом, формирующим нижний створ «окна» уже внешнего.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА

■ КУРАФИКС – ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ

Фиксирующий пластырь КУРАФИКС изготовлен из нетканого перфорированного материала белого цвета.

СОСТАВ: 100% полиэстер. Нетканая основа КУРАФИКСА обеспечивает его воздухопроницаемость, что позволяет оставлять повязку на коже длительное время, не вызывая ее мацерации. Пластырь легко и плотно фиксируется за счет уникального акрилового клея. В отличие от традиционных пластырей, клей которых имеет каучуковую основу, вызывающую аллергию, акриловый клей гипоаллергенный, хорошо фиксирует повязку, не оставляя грязных следов на коже. Для удобства пользователей клеящая поверхность защищена вощеной бумагой, которая имеет специальный надрез, позволяющий легко ее удалить, а при необходимости – резать пластырь. Пластырь КУРАФИКС может быть подвержен автоклавированию без потери своих свойств. Используется для фиксации раневых и послеоперационных повязок, в особенности на суставах, подвижных и конических частях тела, а также для фиксации трубок, канюль, катетеров, зондов, измерительных датчиков и приборов. КУРАФИКС выпускают в рулонах по 10 м разной ширины на катушке из картона.

ДЛИНА	ШИРИНА	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Рулон 10 м	5 см	30341	1 шт.
	10 см	30342	1 шт.
	15 см	30343	1 шт.
	20 см	30344	1 шт.
	30 см	30345	1 шт.



■ ТИ-ДЖИ ФИКС – СЕТЧАТАЯ ПОВЯЗКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Сетчатая повязка ТИ-ДЖИ ФИКС выполнена в виде трубчатого бинта белого цвета из натурального хлопка с резиновыми вставками. Такая структура повязки делает ее гипоаллергенной и позволяет использовать у всех пациентов, в том числе с чувствительной кожей. Повязка выпускается в рулонах различного диаметра, что позволяет выбрать необходимый размер и сформировать повязку требуемого размера. Использование высокоэластичной сетчатой повязки ТИ-ДЖИ ФИКС позволяет избежать перетягивания конечности при перевязке и, как следствие, нарушения кровотока; позволяет легко осуществлять перевязку силами как медицинского персонала, так и самого пациента.

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Рулон 4 м (в растянутом состоянии)			
На палец	A	24240	1 шт.
На конечность небольшого диаметра (несколько пальцев вместе, детская кисть, стопа)	B	24241	1 шт.
На конечность большого диаметра (детская голова, рука взрослого, голень взрослого)	C	24242	1 шт.
На голову взрослого, детское туловище	D	24243	1 шт.
На туловище взрослого, бедро, плечо	E	24244	1 шт.
Рулон 25 м (в растянутом состоянии)			
На палец	A	24250	1 шт.
На конечность небольшого диаметра (несколько пальцев вместе, детская кисть, стопа)	B	24251	1 шт.
На конечность большого диаметра (детская голова, рука взрослого, голень взрослого)	C	24252	1 шт.
На голову взрослого, детское туловище	D	24253	1 шт.
На туловище взрослого, бедро, плечо	E	24254	1 шт.



■ КУРАПОР – СТЕРИЛЬНАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА

Готовая к применению стерильная послеоперационная повязка прямоугольной формы с закругленными краями. Благодаря новой комбинации материалов КУРАПОР радикально отличается от традиционных повязок и позволяет проводить безупречную обработку раны. Основу КУРАПОРА составляет мягкий нетканый перфорированный пластырь белого цвета (100% полиэстер) с хорошей воздухо- и паропроницаемостью, так что КУРАПОР не оказывает отрицательного воздействия на естественные функции кожи. В качестве центральной прокладки в КУРАПОРЕ использована специальная подушечка. Контактный слой подушечки состоит из микросетчатого покрытия (полиэстер/полиэтилен), которое быстро пропускает биологические жидкости и равномерно распределяет их во впитывающем слое (вискоза/полиэстер). При этом само покрытие остается сухим и не приклеивается к ране, что, безусловно, благоприятно сказывается на процессе заживления. Смена повязки происходит безболезненно, при этом не нарушается покой раны. Защитная бумага легко удаляется перед аппликацией и исключает контакт с руками персонала и инструментами. Мягкость прокладки гарантирует пациенту комфорт и не ограничивает свободу движения. За счет своей эластичности легко наносится на участки тела со сложным рельефом – например, плечо, колено, подмышечная впадина и т.д. КУРАПОР выпускается в индивидуальной стерильной упаковке.

РАЗМЕР ПОВЯЗКИ	РАЗМЕР РАНЕВОЙ ПОДУШЕЧКИ	КОД	КОЛ-ВО В УП.
7 x 5 см	4 x 2,5 см	32902 (30504)	5 шт.
10 x 8 см	6 x 4 см	32903 (30505)	5 шт.
7 x 5 см	4 x 2,5 см	32912 (22120)	100 шт.
10 x 8 см	6 x 4 см	32913 (22121)	50 шт.
10 x 15 см	5 x 11 см	32914 (22122)	50 шт.
10 x 20 см	5 x 16 см	32915 (22123)	50 шт.
10 x 25 см	5 x 20 см	32916 (22124)	50 шт.
10 x 30 см	5 x 25 см	32917 (22125)	50 шт.
10 x 34 см	5 x 29 см	32918 (22126)	50 шт.



■ КУРАПОР ТРАНСПАРЕНТ – ПРОЗРАЧНАЯ ВЛАГОЗАЩИТНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА

Готовая к применению стерильная повязка для операционных ран, травм, порезов и ссадин. Основу повязки составляет прозрачная пленка (100% полиуретан) с нанесенным слоем полиакрилатного адгезива, не содержащего латекса, канифоли и ее производных. Полиуретановая пленка пропускает кожные испарения и не вызывает мацерации кожи. С внешней стороны пленка надежно защищает от проникновения микроорганизмов и влаги, и, как следствие, пациент с такой повязкой может принимать водные процедуры. В центре повязки находится подушечка, не прилипающая к ране и хорошо абсорбирующая раневое отделяемое. Подушечка состоит из вискозы/полиэстера и покрыта микроперфорированной сеткой (полиэстер/полиэтилен). Подходит для чувствительной кожи. КУРАПОР ТРАНСПАРЕНТ выпускается в индивидуальной стерильной упаковке.



РАЗМЕР ПОВЯЗКИ	РАЗМЕР РАНЕВОЙ ПОДУШЕЧКИ	КОД	КОЛ-ВО В УП.
7 x 5 см	4 x 2,5 см	13099	5 шт.
10 x 8 см	6 x 4 см	13100	5 шт.
7 x 5 см	4 x 2,5 см	13101	50 шт.
10 x 8 см	6 x 4 см	13102	25 шт.
10 x 15 см	5 x 11 см	13103	25 шт.
10 x 20 см	5 x 16 см	13104	25 шт.
10 x 25 см	5 x 20 см	13105	25 шт.

■ **КУРАПЛАСТ – ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДУШЕЧКОЙ**
Специальный нетканый лейкопластырь телесного цвета для чувствительной кожи, в центре которого находится специальная подушечка для впитывания раневого отделяемого.

СОСТАВ: 100% полиэстер. Материал, которым покрыта подушечка, не позволяет ей прилипнуть к ране, делая смену повязки легкой и безболезненной. Пластырь пропускает воздух, что предотвращает мацерацию кожи. Акриловый клей, которым покрыт пластырь, не вызывает аллергических реакций. Телесный цвет пластыря придает ему косметические свойства и делает повязку практически незаметной. КУРАПЛАСТ выпускается в рулонах разной ширины, позволяющих отрезать необходимый размер, и в виде пластыря для заклеивания мест инъекций; в раздаточной коробке из картона.

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Рулон 5 м	4 см x 5 м	30616	1 шт.
	6 см x 5 м	30617	1 шт.
	8 см x 5 м	30618	1 шт.
Инъекционный, 250 шт. / в рулоне	2 x 4 см	30625	1 шт.



■ **ФЛИВАЦЕЛЬ – СИЛЬНОВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЯЗКА**

Повязка выполнена в виде подушечки. Та сторона повязки, которая непосредственно соприкасается с раной, состоит из нетканого материала, который оберегает кожу и не прилипает к ране. Впитывающий слой, состоящий из пучков целлюлозы, образует центральную часть повязки и отличается сильным впитывающим действием. Обратная сторона повязки – голубого цвета и пропитана полиэфиром, что препятствует проникновению крови и выделений, загрязнению фиксирующей повязки и нижнего белья. Повязка может использоваться самостоятельно в прямом контакте с раной или в сочетании с другими повязками, такими как ЛОМАТЮЛЬ.



ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Нестерильная	10 x 10 см	30430	25 шт.
	10 x 20 см	30431	25 шт.
	15 x 20 см	30432	25 шт.
	15 x 25 см	30433	25 шт.
	20 x 20 см	30434	25 шт.
	20 x 25 см	30435	25 шт.
	20 x 40 см	30436	25 шт.
Стерильная, в индивидуальной упаковке	10 x 10 см	30450	60 шт.
	10 x 20 см	30451	30 шт.
	15 x 20 см	30452	30 шт.
	15 x 25 см	30453	30 шт.
	20 x 20 см	30454	30 шт.
	20 x 25 см	30455	30 шт.
	20 x 40 см	30456	30 шт.




ФЛИВАКТИВ – ПОВЯЗКА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ И ФЛИВАКТИВ AG – ПОВЯЗКА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ И СЕРЕБРОМ

ФЛИВАКТИВ. Лечебная повязка с сильной впитывающей способностью, содержащая в качестве внутреннего слоя активированный уголь. Хорошо очищает рану, удаляет неприятный запах, предотвращает распространение бактерий. Особенно показана при лечении хронических ран с неприятным запахом, таких как язвы голени, язвы на фоне сахарного диабета, свищи и пр. «Дышащее» нетканое покрытие повязки быстро пропускает раневое отделяемое во внутренний впитывающий слой, связывая его и нейтрализуя неприятный запах. Также может использоваться в качестве вторичной повязки в комбинации с повязками влажного заживления ран, например, СУПРАСОРБ А, СУПРАСОРБ С, а также такими как: ЛОМАТЮЛЬ, ФЛИВАКТИВ Ag тампон. Повязка имеет специальный слой, препятствующий вытеканию раневого экссудата, тем самым защищая фиксирующую повязку и белье пациента от загрязнения. Примечание: во избежание попадания в рану активированного угля не следует разрезать повязку.



ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Впитывающая повязка	10 x 10 см	20254	20 шт.
с активированным углем	10 x 20 см	20255	20 шт.

ФЛИВАКТИВ Ag. Тампон и впитывающий компресс с активированным углем и серебром является антимикробной повязкой с высокой впитывающей способностью, не приклеивается к ране, изготовлена из ткани с активированным углем и серебряным импрегнированием. ФЛИВАКТИВ Ag впитывает экссудат с микроорганизмами и препятствует образованию неприятного запаха от раны. Благодаря эффективной физиологической очистке заживление раны ускоряется. При контакте с активированным углем количество микроорганизмов, содержащихся в экссудате раны, уменьшается. Примечание: во избежание попадания в рану активированного угля не следует разрезать повязку.

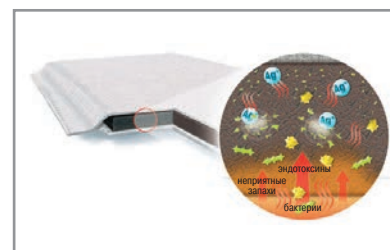

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Тампон с активированным углем и серебром	6,5 x 10 см	20700	10 шт.
Впитывающий компресс с активированным углем и серебром	10 x 10 см	20701	10 шт.
Впитывающий компресс с активированным углем и серебром	10 x 15 см	20702	10 шт.
с активированным углем и серебром	10 x 10 см	20705	10 шт.
	10 x 20 см	20706	10 шт.
	20 x 20 см	20707	10 шт.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для критически колонизированных и инфицированных ран, а также ран, имеющих неприятный запах.
- Для ран с высоким риском развития инфекции:
 - впитывающая повязка: для поверхностных ран с обильным экссудатом;
 - тампон: тампонирующее глубоким ран;


СВОЙСТВА:

- абсорбирует неприятные запахи и раневое отделяемое благодаря содержанию серебра оказывает антибактериальное действие, в том числе в отношении полирезистентных патогенных микроорганизмов (МРЗС, ВРЭ);
- связывает эндотоксины;
- дополнительный тканевый защитный слой предотвращает утечку раневого экссудата.

■ ЛОМАТЮЛЬ – СТЕРИЛЬНАЯ МАЗЕВАЯ ПОВЯЗКА

Стерильная мазевая сетка из 100% хлопка, пропитанная гидрофобной мазью, не прилипающая к ране. После наложения ЛОМАТЮЛЯ на рану рекомендуется наложение вторичной повязки с повышенной абсорбционной способностью. Через широкие ячейки ЛОМАТЮЛЯ рана свободно дренируется. ЛОМАТЮЛЬ может использоваться в сочетании с любыми антибиотиками и (или) антисептическими препаратами. Повязка с использованием ЛОМАТЮЛЯ наиболее показана для лечения ожогов. Перевязка больного с ожогом происходит практически безболезненно. В числе показаний ЛОМАТЮЛЯ: поверхностные раны, ссадины, трещины, раны, возникшие вследствие радиационных поражений, трофические язвы голени, донорские и реципиентские области при пересадке кожи.

РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
5 x 5 см	23314	10 шт.
10 x 10 см	23315	10 шт.
10 x 20 см	23316	10 шт.
10 x 30 см	23317	10 шт.
10 x 10 см	23318	50 шт.

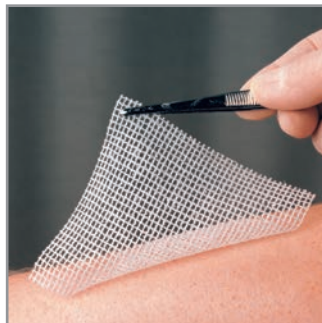

■ ФЛИВАСОФТ – НЕТКАНАЯ САЛФЕТКА

Универсальная многослойная салфетка из мягкого нетканого материала для обработки ран. Нежная структура ткани. Не оставляет ворсинок. Обладает сильными впитывающими свойствами, сохраняет свою форму после впитывания большого количества экссудата. Выпускается также в виде повязки с Y-образным разрезом для фиксации дренажей и канюль (например, при диализе).

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Стерильная, 4-слойная, уп. / 75 x 2 шт.	5 x 5 см	12076	150 шт.
	7,5 x 7,5 см	12082	150 шт.
	10 x 10 см	12065	150 шт.
	10 x 20 см	12071	150 шт.
Стерильная, 6-слойная, уп. / 50 x 2 шт.	5 x 5 см	12079	100 шт.
	7,5 x 7,5 см	12085	100 шт.
	10 x 10 см	12068	100 шт.
	10 x 20 см	12073	100 шт.
Нестерильная, 4-слойная, уп. / 100 шт.	5 x 5 см	12075	100 шт.
	7,5 x 7,5 см	12081	100 шт.
	10 x 10 см	12064	100 шт.
	10 x 20 см	12070	100 шт.

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Нестерильная, 6-слойная, уп. / 100 шт.	5 x 5 см	12078	100 шт.
	7,5 x 7,5 см	12084	100 шт.
	10 x 10 см	12067	100 шт.
	10 x 20 см	12072	100 шт.
С Y-образным вырезом, стерильная, уп. / 50 x 2 шт.	7,5 x 7,5 см	12099	100 шт.
	10 x 10 см	12098	100 шт.



■ СИЛЬКАФИКС – ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Фиксирующий пластырь СИЛЬКАФИКС изготовлен из искусственного шелка (ацетат). Нерастяжим. Покрит полиакрилатным адгезивным покрытием, которое хорошо фиксирует пластырь и не раздражает кожу. Легко снимается, не оставляя грязных следов на коже. За счет специальных насечек по краю пластыря и особого плетения легко может быть разорван руками в нужном месте. Рекомендован для фиксации катетеров, канюль, дренажей и повязок.


ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Рулон 5 м на пластиковой катушке	1,25 см	34324	18 шт.
	2,5 см	34325	12 шт.
	5,0 см	34326	6 шт.
Рулон 5 м на картонной катушке	2,5 см	34377	12 шт.
Рулон 9,2 м на картонной катушке	1,25 см	34327	24 шт.
	2,5 см	34328	12 шт.
	5,0 см	34329	6 шт.



■ ПОРОФИКС

Нерастяжимый лейкопластырь телесного цвета, изготовленный из водоотталкивающего материала на тканевой основе (вискоза), покрыт гипоаллергенным клеем из синтетического каучука. Легко и надежно приклеивается, предназначен для фиксации повязок, бинтов, канюль, венозных катетеров, дренажей.


ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Рулон 5 м на пластиковой катушке	1,25 см	34310	18 шт.
	2,5 см	34311	12 шт.
	5,0 см	34312	6 шт.

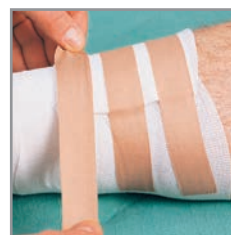

■ ПОРОФИКС – ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Готовый к использованию пластырь для лечения и профилактики пупочных грыж у новорожденных. Пластырь состоит из двух частей, которые могут затягиваться по типу ремня. Покрит антиаллергенным клейким слоем, имеет хорошую адгезию и не раздражает кожу младенца.





КОД	КОЛ-ВО В УП.
30160	1 шт.

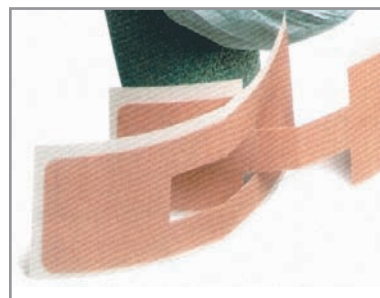

■ МЕТАЛЛИНЭ – МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ПОВЯЗКА, НЕ ПРИЛИПАЮЩАЯ К РАНЕ

Повязка МЕТАЛЛИНЭ состоит из трех слоев – не прилипающий к ране тонкий слой из напыленного алюминия, впитывающий слой из высококачественной вискозы и наружный защитный слой. Повязка обладает высокой впитывающей способностью, смена повязки происходит безболезненно. МЕТАЛЛИНЭ защищает рану от перегрева. Предназначена для ухода за ранами в различных областях – травматологии, хирургии, дерматологии и флебологии, особенно при обширных ранах, ссадинах, ожогах. Для оказания первой помощи. Также выпускается в виде стерильной повязки для дренажей и трахеостомических трубок.

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Стерильная, в индивидуальной упаковке	8 x 10 см	23083	10 шт.
	10 x 12 см	23084	10 шт.
Стерильная, в индивидуальной упаковке, диспенсер	8 x 10 см	23081	50 шт.
	10 x 12 см	23082	50 шт.
	10 x 20 см	23087	50 шт.
Нестерильная, рулон	5 м x 10 см	23080	1 шт.
Для дренажей (4,5–11 мм), стерильная, в инд. упаковке, диспенсер	6 x 7 см	23093	50 шт.
Для трахеостомических трубок (12–19 мм), стерильная, в инд. упаковке, диспенсер	8 x 9 см	23094	50 шт.
Простыня для ожоговых больных, стерильная	73 см x 2,5 м	23050	1 шт.
Рулон, нестерильный	73 см x 10 м	23070	1 шт.

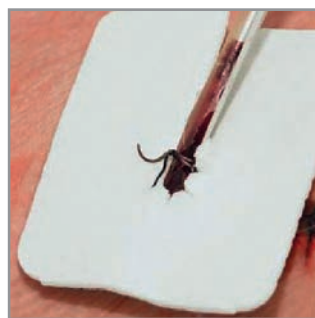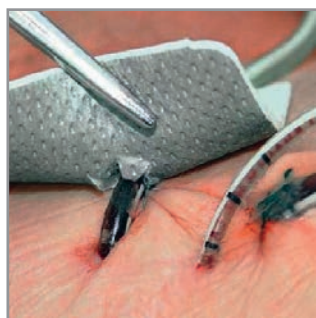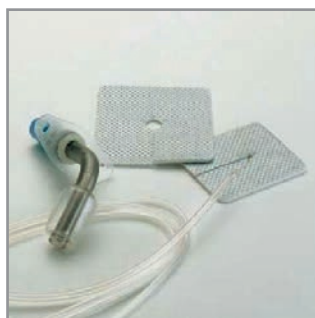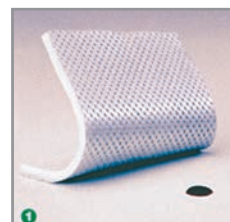

■ МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ И ШАРИКИ

Для потребностей операционной. ГАЗИН и СЕТПАК.

САЛФЕТКИ из перевязочной марли с подвернутыми внутрь кромками, стерильные и нестерильные с возможностью стерилизации, с вшитой рентгеноконтрастной нитью или без нее, различного размера (от 5 x 5 см до 10 x 20 см) и слойности (8, 12, 16, 32 слоя). Плотность марли – 17, 20 нитей/см². Салфетки для брюшной полости из высококачественной абсорбирующей перевязочной марли, предварительно выстиранные, с вшитой рентгеноконтрастной пластиной длиной 10 см, с петлей длиной 30 см, с подвернутыми внутрь кромками, используются для механической остановки кровотечения, для поддержания и постановки органов и тканей и впитывания биологических жидкостей.

ШАРИКИ из перевязочной марли для остановки кровотечений и обработки ран, с вшитой рентгеноконтрастной нитью или без нее, также стерильные и нестерильные различного размера («с грецкий орех», «со сливу», «с яйцо», «экстра-большие», «с кулак»).

ТАМПОНЫ (ТУПФЕРЫ) ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ, плотноскрученные, марля плотностью 24 нити/см² в стерильном и нестерильном вариантах.

САЛФЕТКИ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ из высококачественной абсорбирующей перевязочной марли, предварительно выстиранные, с вшитой рентгеноконтрастной пластиной длиной 10 см, с петлей длиной 30 см, с подвернутыми внутрь кромками, используются для механической остановки кровотечения, для поддержания и постановки органов и тканей и впитывания биологических жидкостей.



ГАЗИН САЛФЕТКИ нестерильные

СЛОЙНОСТЬ, РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
8-слойн. 5 x 5 см	18500	100 шт. / 1000 шт.
8-слойн. 7,5 x 7,5 см	18503	100 шт. / 1000 шт.
8-слойн. 10 x 10 см	18506	100 шт. / 1000 шт.
12-слойн. 5 x 5 см	18501	100 шт. / 1000 шт.
12-слойн. 7,5 x 7,5 см	18504	100 шт. / 1000 шт.
12-слойн. 10 x 10 см	18507	100 шт. / 1000 шт.
12-слойн. 10 x 12,5 см	18509	100 шт. / 1000 шт.
12-слойн. 10 x 20 см	18510	100 шт. / 1000 шт.
16-слойн. 5 x 5 см	18502	100 шт. / 1000 шт.
16-слойн. 7,5 x 7,5 см	18505	100 шт. / 1000 шт.
16-слойн. 10 x 10 см	18508	100 шт. / 1000 шт.
16-слойн. 10 x 12,5 см	10956	100 шт. / 800 шт.
12-слойн. 7,5 x 7,5 см, с рентгеноконтрастной нитью	18511	100 шт. / 1000 шт.
12-слойн. 10 x 10 см, с рентгеноконтрастной нитью	18514	100 шт. / 1000 шт.
12-слойн. 10 x 12,5 см, с рентгеноконтрастной нитью	18516	100 шт. / 1000 шт.
12-слойн. 10 x 20 см, с рентгеноконтрастной нитью	18517	100 шт. / 1000 шт.
16-слойн. 5 x 5 см, с рентгеноконтрастной нитью	10972	100 шт. / 2000 шт.
16-слойн. 10 x 10 см, с рентгеноконтрастной нитью	18515	100 шт. / 1000 шт.

ГАЗИН САЛФЕТКИ стерильные

СЛОЙНОСТЬ, РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
8-слойн. 5 x 5 см, 2 шт./уп.	13600	10 шт. / 600 шт.
8-слойн. 7,5 x 7,5 см, 2 шт./уп.	13601	10 шт. / 540 шт.
8-слойн. 10 x 10 см, 2 шт./уп.	13602	10 шт. / 560 шт.
8-слойн. 5 x 5 см, 2 шт./уп.	13620	100 шт. / 1800 шт.
8-слойн. 7,5 x 7,5 см, 2 шт./уп.	13621	100 шт. / 1800 шт.
8-слойн. 10 x 10 см, 2 шт./уп.	13622	100 шт. / 2000 шт.
8-слойн. 20 x 10 см, 2 шт./уп.	13623	100 шт. / 800 шт.
12-слойн. 5 x 5 см, 2 шт./уп.	13690	80 шт. / 1440 шт.
12-слойн. 7,5 x 7,5 см, 2 шт./уп.	13691	80 шт. / 1440 шт.
12-слойн. 10 x 10 см, 2 шт./уп.	13692	80 шт. / 1600 шт.
12-слойн. 20 x 10 см, 2 шт./уп.	13694	80 шт. / 640 шт.
8-слойн. 7,5 x 7,5 см, 5 шт./уп.	11624	100 шт. / 1200 шт.
8-слойн. 10 x 10 см, 5 шт./уп.	11586	100 шт. / 1000 шт.
12-слойн. 5 x 5 см, 5 шт./уп.	13695	100 шт. / 2100 шт.
12-слойн. 7,5 x 7,5 см, 5 шт./уп.	13696	100 шт. / 800 шт.
12-слойн. 10 x 10 см, 5 шт./уп.	13697	100 шт. / 600 шт.
12-слойн. 20 x 10 см, 5 шт./уп.	13699	100 шт. / 400 шт.
12-слойн. 10 x 10 см, 10 шт./уп.	11574	100 шт. / 1000 шт.
16-слойн. 10 x 10 см, 10 шт./уп.	13683	100 шт. / 1000 шт.
8-слойн. 7,5 x 7,5 см, 2 шт./уп., с Y-разрезом	13521	100 шт. / 1800 шт.
8-слойн. 10 x 10 см, 2 шт./уп., с Y-разрезом	13522	100 шт. / 2000 шт.

ГАЗИН ШАРИКИ нестерильные

РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТОВ./ТРАНСП. УП.
«с грецкий орех»	15175	1000 шт. / 5000 шт.
«со сливу»	15176	1000 шт. / 5000 шт.
«с яйцо»	15177	500 шт. / 2500 шт.
«экстрабольшой»	15179	500 шт. / 2000 шт.
«с кулак»	15180	250 шт. / 1000 шт.
«с грецкий орех», с рентгеноконтрастной нитью	15183	1000 шт. / 5000 шт.
«со сливу», с рентгеноконтрастной нитью	15184	1000 шт. / 5000 шт.
«с яйцо», с рентгеноконтрастной нитью	15185	500 шт. / 2500 шт.
«экстрабольшой», с рентгеноконтрастной нитью	15186	500 шт. / 2000 шт.
«с кулак», с рентгеноконтрастной нитью	15223	250 шт. / 1000 шт.





ГАЗИН ШАРИКИ стерильные

СЛОЙНОСТЬ, РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
«со сливу», (2+2) шт./уп.	14961	100 (25 x 4) / 1000 (250 x 4)
«со сливу», (2+3) шт./уп.	14962	125 (25 x 5) / 1250 (250 x 5)
«с яйцо», (2+3) шт./уп.	14968	100 (20 x 5) / 1000 (200 x 5)
«со сливу», с рентгеноконтрастной нитью, (2+3) шт./уп.	14967	125 (25 x 5) / 1250 (250 x 5)
«со сливу», 3 шт./уп.	15501	90 (30 x 3) / 720 (240 x 3)
«со сливу», 10 шт./уп.	15500	300 (30 x 10) / 1500 (150 x 10)
«со сливу», 20 шт./уп.	15499	400 (20 x 20) / 2000 (100 x 20)

ГАЗИН ТАМПОНЫ для препарирования нестерильные

РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТОВ./ТРАНСП. УП.
Малый	15155	1000 / 3000 / 45000 шт.
Средний	15156	1000 / 2000 / 30000 шт.
Большой	15157	500 / 1000 / 15000 шт.

ГАЗИН ТУРУНДЫ в пласт. диспенсере, 1-сл., стерильные

РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТОВ./ТРАНСП. УП.
1 см x 5 м	13470	216 шт.
2 см x 5 м	13471	120 шт.
5 см x 5 м	13473	60 шт.

СЕТПАК САЛФЕТКИ стерильные

	СЛОЙНОСТЬ, РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТОВ./ТРАНСП. УП.
10 шт. / компл.	12-слойн. 7,5 x 7,5 см, с рентгеноконтрастной нитью	15114	28 / 84 компл.
	12-слойн. 10 x 10 см, с рентгеноконтрастной нитью	15100	20 / 60 компл.
	12-слойн. 10 x 12,5 см, с рентгеноконтрастной нитью	15116	20 / 60 компл.
	12-слойн. 10 x 20 см, с рентгеноконтрастной нитью	15102	16 / 48 компл.
	16-слойн. 5 x 5 см, с рентгеноконтрастной нитью	15110	34 / 102 компл.
	16-слойн. 7,5 x 7,5 см, с рентгеноконтрастной нитью	15106	24 / 72 компл.
	16-слойн. 10 x 10 см, с рентгеноконтрастной нитью	15101	20 / 60 компл.
	16-слойн. 10 x 12,5 см, с рентгеноконтрастной нитью	15111	18 / 54 компл.
	32-слойн. 10 x 10 см, с рентгеноконтрастной нитью	15104	12 / 36 компл.
20 шт. / компл.	12-слойн. 7,5 x 7,5 см, с рентгеноконтрастной нитью	15119	20 / 60 компл.
	12-слойн. 10 x 10 см, с рентгеноконтрастной нитью	15103	18 / 54 компл.
	12-слойн. 10 x 20 см, с рентгеноконтрастной нитью	15108	8 / 24 компл.
	16-слойн. 7,5 x 7,5 см, с рентгеноконтрастной нитью	15118	16 / 48 компл.
	16-слойн. 10 x 10 см, с рентгеноконтрастной нитью	15105	14 / 42 компл.

СЕТПАК ШАРИКИ стерильные

	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
5 шт. / компл.	«с кулак», с рентгеноконтрастной нитью	22800	16 / 48 компл.
10 шт. / компл.	«с грецкий орех», с рентгеноконтрастной нитью	22801	72 / 144 компл.
	«со сливу», с рентгеноконтрастной нитью	22802	38 / 114 компл.
	«с яйцо», с рентгеноконтрастной нитью	22803	26 / 78 компл.
	«экстрабольшой», с рентгеноконтрастной нитью	22804	18 / 54 компл.
20 шт. / компл.	«со сливу», с рентгеноконтрастной нитью	22808	26 / 78 компл.
	«с яйцо», с рентгеноконтрастной нитью	22809	16 / 48 компл.
	«экстрабольшой», с рентгеноконтрастной нитью	22810	6 / 18 компл.

СЕТПАК ТАМПОНЫ для препарирования стерильные

	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
10 шт. / компл.	Малый 2, с рентгеноконтрастной нитью	12780	40 / 120 компл.
	Средний 3, с рентгеноконтрастной нитью	12781	40 / 120 компл.
	Большой 4, с рентгеноконтрастной нитью	12782	40 / 120 компл.
20 шт. / компл.	Малый 2, с рентгеноконтрастной нитью	12783	40 / 120 компл.
	Средний 3, с рентгеноконтрастной нитью	12784	40 / 120 компл.
	Большой 4, с рентгеноконтрастной нитью	12785	40 / 120 компл.

СЕТПАК Топтекс Лайт тампоны для брюшной полости, стерильные

	СЛОЙНОСТЬ, РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
2 шт. / компл.	4-слойн. 40 x 40 см, белые, с р/к пластиной	15004	14 / 42 компл.
	6-слойн. 40 x 40 см, белые, с р/к пластиной	15012	12 / 36 компл.
	4-слойн. 20 x 30 см, белые, с р/к пластиной	15011	28 / 84 компл.
	4-слойн. 50 x 60 см, белые, с р/к пластиной	15014	8 / 24 компл.
	4-слойн. 8 x 90 см, белые, с р/к пластиной	15010	26 / 78 компл.
	4-слойн. 40 x 40 см, зеленые, с р/к пластиной	15006	14 / 42 компл.
	6-слойн. 40 x 40 см, зеленые, с р/к пластиной	15008	12 / 36 компл.
	4-слойн. 20 x 30 см, зеленые, с р/к пластиной	15017	28 / 84 компл.
	4-слойн. 50 x 60 см, зеленые, с р/к пластиной	15013	8 / 24 компл.
	6-слойн. 50 x 60 см, зеленые, с р/к пластиной	15018	6 / 18 компл.
	4-слойн. 8 x 90 см, зеленые, с р/к пластиной	15009	26 / 78 компл.
	4-слойн. 40 x 40 см, синие, с р/к пластиной	15016	14 / 42 компл.


	СЛОЙНОСТЬ, РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
5 шт. / компл.	4-слойн. 40 x 40 см, белые, с р/к пластиной	15001	6 / 18 компл.
	6-слойн. 40 x 40 см, белые, с р/к пластиной	15003	6 / 18 компл.
	4-слойн. 20 x 30 см, белые, с р/к пластиной	15007	14 / 42 компл.
	4-слойн. 40 x 40 см, зеленые, с р/к пластиной	15002	6 / 18 компл.
	6-слойн. 40 x 40 см, зеленые, с р/к пластиной	15000	6 / 18 компл.
	4-слойн. 20 x 30 см, зеленые, с р/к пластиной	15005	14 / 42 компл.
	4-слойн. 40 x 40 см, синие, с р/к пластиной	15015	6 / 18 компл.

ПОВЯЗКИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

■ ПРО-ОФТА – ОПЕРАЦИОННЫЕ ТУПФЕРЫ

Операционные палочки ПРО-ОФТА. Выполнены из очищенной вискозы, спрессованы в виде срезанных палочек и предназначены для промокания слезы в операционном поле. Они способны впитывать влагу, превышающую их вес в несколько раз. Палочки ПРО-ОФТА не оставляют волокон в операционном поле, что выгодно отличает их от ватных палочек. Автоклавируются. Треугольные тупферы на пластиковом держателе изготовлены из поливинилацетата, обладают сильным впитывающим действием (до 15 раз больше собственного веса), не оставляют ворсинок. Также выпускаются в виде впитывающих треугольничков без пластикового держателя.

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Палочки			
Стерильные, 20 шт. / уп.	Диаметр 5 мм, длина 66 мм	16516	400 шт.
Нестерильные, 500 шт. / уп.	Диаметр 5 мм, длина 66 мм	16515	500 шт.
Тупферы на держателе, стерильные, 2 x 5 шт. / уп.	Держатель длиной 54 мм	14917	180 шт.
Треугольнички, стерильные		14915	10 шт.

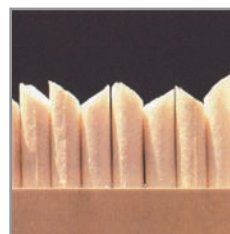

■ ПРО-ОФТА – СИСТЕМА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ СЛЕЗЫ

Дренажная система состоит из «проводника», выполненного в виде полоски нетканого материала, и приемного мешка размером 5 x 21 см, снабженного клейким краем для фиксации. Один конец дренажной полоски помещается в область операционного поля, другой – в приемный мешок, обеспечивая таким образом постоянный дренаж жидкости (слезы). Емкость приемного мешка – 80 мл. Упаковка: индивидуальная, стерильная.



ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Дренажная система	Емкость 80 мл	14916	20 шт.

■ ПРО-ОФТА – ПОВЯЗКА НА ГЛАЗ

Повязка ПРО-ОФТА выполнена в виде подушечки; та сторона повязки, которая непосредственно соприкасается с раной, состоит из нетканого материала, который оберегает кожу и хорошо впитывает слезу. Повязка ПРО-ОФТА ДЖУНИОР для лечения косоглазия. Выполнена в виде наклейки телесного цвета с темной вставкой. Покрывается гипоаллергенным клеем.



ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
ДЖУНИОР МИНИ	6,5 x 5,4 см		
В пластиковом контейнере		16841	5 шт.
В упаковке из картона		16846	50 шт.
В упаковке из картона		16843	100 шт.
ДЖУНИОР МАКСИ	7,0 x 5,9 см		
В пластиковой упаковке		16840	5 шт.
В упаковке из картона		16845	50 шт.
В упаковке из картона		16842	100 шт.
ПРО-ОФТА S, нестерильная, в индивидуальной упаковке	малая 7,2 x 10,0 см	34227	1 шт.
		34228	50 шт.
	большая 7,8 x 11,4 см	34229	1 шт.
		34230	50 шт.
ПРО-ОФТА D, нестерильная, в индивидуальной упаковке	малая 7,2 x 10,0 см	34225	1 шт.
	большая 7,8 x 11,4 см	34226	50 шт.
ПРО-ОФТА K, нестерильная, в индивидуальной упаковке	7,8 x 11,4 см	34104	50 шт.
ПРО-ОФТА подушечка, стерильная, в индивидуальной упаковке	6,2 x 7,2 см	13043	25 шт.
ПРО-ОФТА подушечка, нестерильная, в упаковке из картона	6,2 x 7,2 см	13041	50 шт.
ПРО-ОФТА подушечка с незапечатанными краями, нестерильная, в упаковке из картона	5,5 x 7,5 см	13021	50 шт.

ЭЛАСТИЧНЫЕ БИНТЫ

ЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ БОЛЬШОЙ РАСТЯЖИМОСТИ ДАУЭРБИНДЕ К

Эластичный бинт телесного цвета с большой растяжимостью (до 180%) и сильной компрессией с характерными сжатыми волокнами (тип К). Благодаря хорошей растяжимости бинты легко накладываются. Применяются для поддерживающих и разгружающих повязок при наложении на поврежденные суставы или связки. Из-за сильной компрессии бинт должен быть снят ночью или в период отдыха. Легок в использовании даже неспециалистами в десмургии. Легко стирается.

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
ДАУЭРБИНДЕ К (86% хлопок, 7% полиамид, 7% эластан) 7 м (в растянутом состоянии) со скрепками, в индивидуальной упаковке	6 см	22000	1 шт.
	8 см	22001	1 шт.
	10 см	22002	1 шт.
	12 см	22003	1 шт.
	20 см	22004	1 шт.
14 м (в растянутом состоянии) со скрепками, в индивидуальной упаковке	10 см	22007	1 шт.
	12 см	22008	1 шт.
7 м (в растянутом состоянии), со скрепками	6 см	22020	10 шт.
	8 см	22021	10 шт.
	10 см	22022	10 шт.
	12 см	22023	10 шт.
	20 см	22024	10 шт.



■ ЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ КОРОТКОГО РАСТЯЖЕНИЯ РОЗИДАЛ К

Эластичный бинт короткого растяжения 90% и сильной компрессии. Выполнен из 100% хлопка. Используется в флебологии при лечении хронической венозной недостаточности, а также при лечении острого и хронического лимфостаза. Рекомендован для применения в спортивной медицине для разгружающих и поддерживающих повязок. За счет сжатой структуры бинт не соскальзывает, и повязка прочно держится. Телесного цвета. Можно стирать при 95 °С.



ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
5 м (в растянутом состоянии) со скрепками, в индивидуальной упаковке из картона	4 см (без скрепок)	22199	1 шт.
	6 см	22200	1 шт.
	8 см	22201	1 шт.
	10 см	22202	1 шт.
	12 см	22203	1 шт.
10 м (в растянутом состоянии) без скрепок, в индивидуальной упаковке из картона	10 см	22206	1 шт.
	12 см	22250	1 шт.
5 м (в растянутом состоянии), со скрепками	8 см	22250	10 шт.
	10 см	22251	10 шт.
	12 см	22252	10 шт.

■ ЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ ПОРЭЛАСТ

Акрил-клеякий эластичный бинт, растяжимый в продольном направлении на 80%. Изготовлен из 100% хлопка, покрыт гипоаллергенным адгезивным слоем, который надежно фиксирует туры бинта между собой. Телесного цвета. Легкий, рентгенопрозрачный, пропускает воздух («дышит»). Бинт рекомендован для компрессионной терапии при венозной недостаточности, используется в спортивной медицине для поддерживающих и разгружающих повязок.




ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
2,5 м (в нерастянутом состоянии), в индивидуальной упаковке из картона	6 см	30210	1 шт.
	8 см	30211	1 шт.
	10 см	30212	1 шт.
2,5 м (в нерастянутом состоянии)	6 см	30213	10 шт.
	8 см	30214	10 шт.
	10 см	30215	10 шт.

■ ЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ МОЛЕЛАСТ И МОЛЕЛАСТ ХАФТ

МОЛЕЛАСТ – высокоэластичный (100%) бинт специального плетения, воздухопроницаемый. СОСТАВ: 56% вискоза, 44% полиамид. Приятен для кожи пациента, легко накладывается, повторяет контуры тела, в том числе участки со сложным рельефом. Можно автоклавируют.

МОЛЕЛАСТ ХАФТ – эластичный самосцепляющийся бинт СОСТАВ: 66% вискоза, 34% полиамид. Туры бинта сцепляются между собой, не приклеиваясь к телу. Воздухопроницаемый, можно резать. Растяжимость в продольном направлении – 65%, в поперечном – 50%. УПАКОВКА: индивидуальная, в коробке из картона.

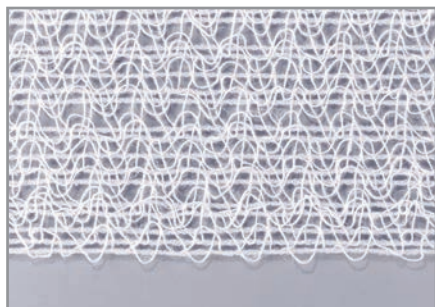


ОПИСАНИЕ		РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
МОЛЕЛАСТ	4 м (в растянутом состоянии), в индивидуальной упаковке	4 см	14410	20 шт.
		6 см	14411	20 шт.
		8 см	14412	20 шт.
		10 см	14413	20 шт.
		12 см	14414	20 шт.
	20 шт. / уп.	4 см	19410	20 шт.
		6 см	19411	20 шт.
		8 см	19412	20 шт.
		10 см	19413	20 шт.
		12 см	19414	20 шт.
	100 шт. / уп.	6 см	19427	100 шт.
		8 см	19428	100 шт.
		10 см	19429	100 шт.
	МОЛЕЛАСТ ХАФТ 4 м (в растянутом состоянии), белый	4 см	30063	1 шт.
		6 см	30064	1 шт.
		8 см	30065	1 шт.
		10 см	30066	1 шт.
		12 см	30067	1 шт.
	20 м (в растянутом состоянии), белый	4 см	30068	1 шт.
		6 см	30069	1 шт.
		8 см	30070	1 шт.
		10 см	30071	1 шт.
		12 см	30072	1 шт.

■ ЭЛАСТИЧНЫЙ САМОСЦЕПЛЯЮЩИЙСЯ БИНТ ХАФТЭЛАСТ

Эластичный самосцепляющийся бинт. Используется для тонких несскользящих повязок в клинической и амбулаторной практике. Может применяться для повязок на палец. За счет специального плетения волокон туры бинта прочно сцепляются между собой, не приклеиваются к телу. Воздухопроницаемый. Можно резать. Легко носится. СОСТАВ: 60% полиамид, 40% хлопок, растяжимость около 130% в продольном направлении.

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
4 м (в растянутом состоянии)	4 см	30820	1 шт.
	6 см	30821	1 шт.
	8 см	30822	1 шт.
	10 см	30823	1 шт.
	12 см	30824	1 шт.
20 м (в растянутом состоянии)	6 см	30825	1 шт.
	8 см	30826	1 шт.
	10 см	30827	1 шт.
	12 см	30828	1 шт.

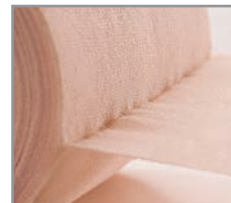

ПОВЯЗКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАТЕТЕРОВ

■ КУРАФИКС АЙ ВИ (CURAFIX IV) ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ

Повязка выполнена из фиксирующего материала (КУРАФИКС) и снабжена специальными подушечками для более надежной и комфортной фиксации катетера. Сама повязка выполнена в виде штанишек, что позволяет легко фиксировать внутривенные периферические катетеры, имеющие дополнительный порт. Повязка КУРАФИКС АЙ-ВИ стерильна, индивидуально упакована. Воздухопроницаема, паропроницаема, что делает невозможным появление опрелостей на коже во время фиксации.



РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
9 x 6 см	30050	50 шт.

■ КУРАФИКС АЙ ВИ КОНТРОЛЬ (CURAFIX IV CONTROL) ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ

Повязка выполнена из фиксирующего материала (КУРАФИКС), в центре нее находится круглое прозрачное окошко из материала СУПРАСОРБ F (полупроницаемая пленка), что дает возможность наблюдать за местом инъекции. Сама повязка выполнена в виде штанишек, что позволяет легко фиксировать внутривенные периферические катетеры, имеющие дополнительный порт. Повязка КУРАФИКС АЙ-ВИ контроль стерильна, индивидуально упакована. Воздухопроницаема, паропроницаема.



РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
9 x 6 см	30200	50 шт.

■ СУПРАСОРБ F (СУПРАСОРБ F) ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ

Размер 5 x 7 см позволяет легко фиксировать катетеры, «бабочки», периферические катетеры, подключичные катетеры. Прозрачная повязка СУПРАСОРБ F позволяет медицинскому персоналу наблюдать за состоянием катетера. Повязка СУПРАСОРБ F стерильна, индивидуально упакована. Проницаема для паров и кислорода. Кожа под повязкой не преет. Препятствует проникновению микроорганизмов.


РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
5 x 7 см	20460	10 шт.
5 x 7 см	20461	100 шт.



■ КУРАГАРД JR И SP (CURAGARD JR И SP) ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ

Защитная и фиксирующая повязка для центральных и периферических венозных катетеров для взрослых. Повязка имеет омегаобразную рамку, выполненную из пенистой основы, на которую нанесен специальный гипоаллергенный клей. В центре повязки — полупроницаемая мембрана по типу СУПРАСОРБ F, которая пропускает испарения кожи, однако препятствует проникновению микроорганизмов, а также позволяет вести визуальное наблюдение за местом пункции. Повязка не вызывает раздражения кожи и эффекта мокнущия, что позволяет использовать ее пациентам с чувствительной кожей и склонностью к аллергическим реакциям. Имеет две дополнительные липкие полоски на пенистой основе для фиксации катетера. Индивидуально упаковано. Стерильно.

РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
КУРАГАРД JR		
4 x 6,5 см		
(педиатрический)	30116	100 шт.
КУРАГАРД SP		
7,5 x 6,5 см	30117	100 шт.

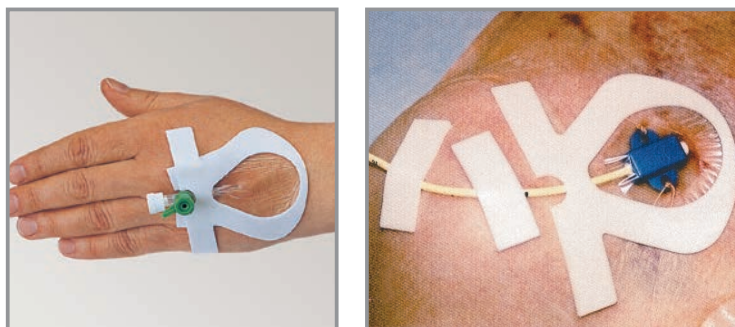

■ КУРАГАРД TPN (CURAGARD TPN) ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАТЕТЕРОВ

Защитная и фиксирующая повязка для центральных (подключичных или яремных) венозных катетеров. Повязка имеет прямоугольную рамку, выполненную из пенистой основы, на которую нанесен специальный гипоаллергенный клей. В центре повязки — полупроницаемая дышащая мембрана по типу СУПРАСОРБ F, которая служит надежной защитой против проникновения микроорганизмов, не оказывая отрицательного влияния на кожное дыхание, предупреждая раздражение вокруг места инъекции. За счет использования гипоаллергенного клея как на рамке, так и на пленочном покрытии, повязка не вызывает раздражения кожи, что позволяет использовать ее у пациентов с чувствительной кожей и склонностью к аллергии. Позволяет вести визуальное наблюдение места пункции.

РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
КУРАГАРД TPN		
13 x 10 см	30118	25 шт.



ОПЕРАЦИОННОЕ БЕЛЬЕ И ОДЕЖДА

■ ОПЕРАЦИОННОЕ БЕЛЬЕ РАУКОДРЕЙП

Стерильное одноразовое операционное белье RAUCODRAPE (РАУКОДРЕЙП) компании «ЛОМАН И РАУШЕР» выпускается из нового материала, изготавливаемого в соответствии с результатами последних научных исследований, и полностью отвечает стандартам EN 13795, а зачастую и превосходит их по своим характеристикам. Тщательно проведенные лабораторные тесты в мокром и сухом состояниях доказали высокую механическую прочность материала.

Новый РАУКОДРЕЙП обеспечивает надежный барьер для микроорганизмов и бактерий и является основой эффективной профилактики инфицирования при операционных вмешательствах, позволяет надежно ограничить операционное поле и обеспечить стерильность инвентаря.



Новые материалы РАУКОДРЕЙП:

- отличаются повышенной впитывающей способностью и создают непроницаемый барьер для жидкостей;
- соответствуют стандартам EN 13795;
- более безопасные и надежные в использовании;
- значительно удобнее и комфортнее;
- являются основой эффективной профилактики инфицирования при оперативных вмешательствах;
- прекрасно драпируются.



Материал РАУКОДРЕЙП бывает 2-слойным и 2-слойным Плюс (с дополнительным слоем, обладающим повышенной впитывающей способностью).



РАУКОДРЕЙП® – 2-слойный материал с обыкновенной впитывающей способностью. Материал выдерживает столб жидкости 125 см, впитывающая способность – 250 мл жидкости на 1 м².

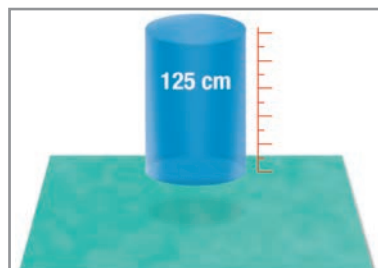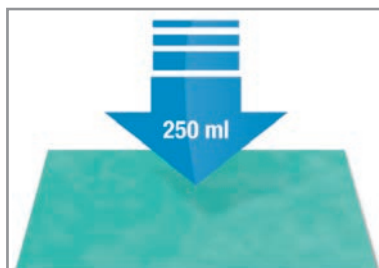

РАУКОДРЕЙП® Плюс – 2-слойный материал с дополнительным слоем, обладающим повышенной впитывающей способностью. РАУКОДРЕЙП Плюс абсолютно водонепроницаем. Материал выдерживает столб жидкости 150 см, впитывает 655 мл жидкости на 1 м² по всей поверхности материала.

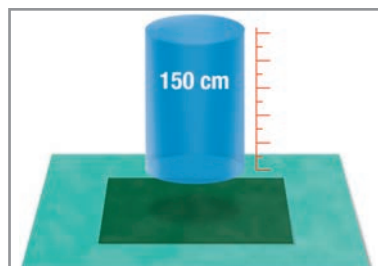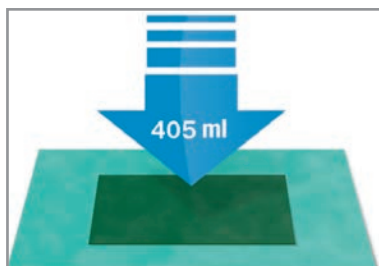


В брошюре представлены основные комплекты операционного белья и принадлежности. Для получения более полной информации об ассортименте операционного белья и аксессуаров РАУКОДРЕЙП спрашивайте полный каталог у представителя в вашем регионе.



БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
РАУКОДРЕЙП Базовый комплект 2-слойный, стерильный


СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см	33301	13 компл.
2 полотенца	30 x 40 см		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145 см		
2 простыни с липким краем, 2-слойные	75 x 90 см		
1 простыня с липким краем, 2-слойная	175 x 180 см		
липкий край	80 см		
1 простыня с липким краем, 2-слойная, липкий край	150 x 240 см		
	15 + 70 + 15 см		

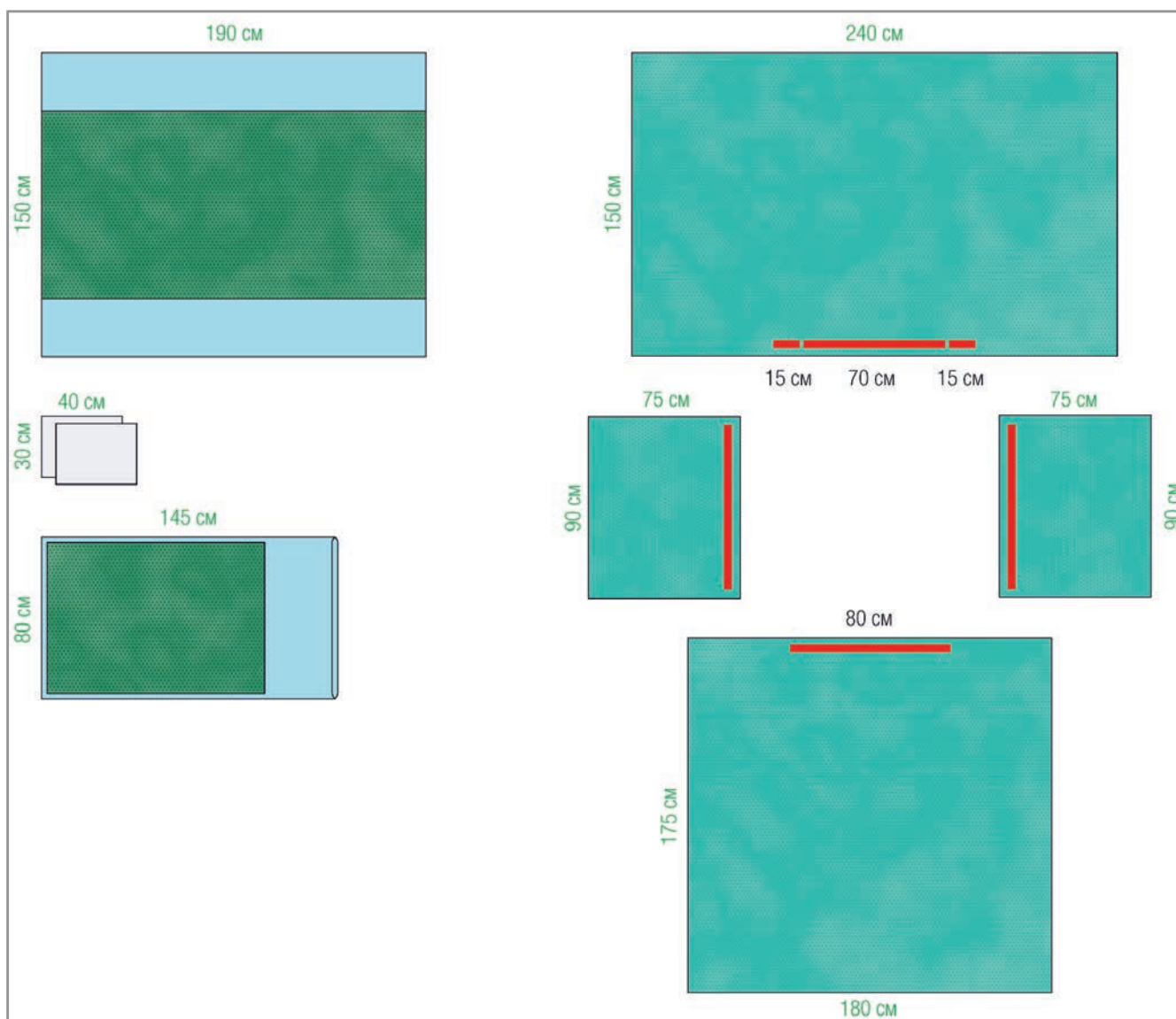



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ I
РАУКОДРЕЙП Универсальный комплект I, 2-слойный Плюс, стерильный

СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см	33307	13 компл.
4 полотенца	30 x 40 см		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145 см		
1 липкая полоска	9 x 50 см		
2 простыни с липким краем, 2-слойные Плюс	75 x 90 см		
1 простыня с липким краем, 2-слойная Плюс	175 x 180 см		
липкий край	80 см		
1 простыня с липким краем, 2-слойная Плюс	150 x 250 см		
липкий край	15 + 70 + 15 см		

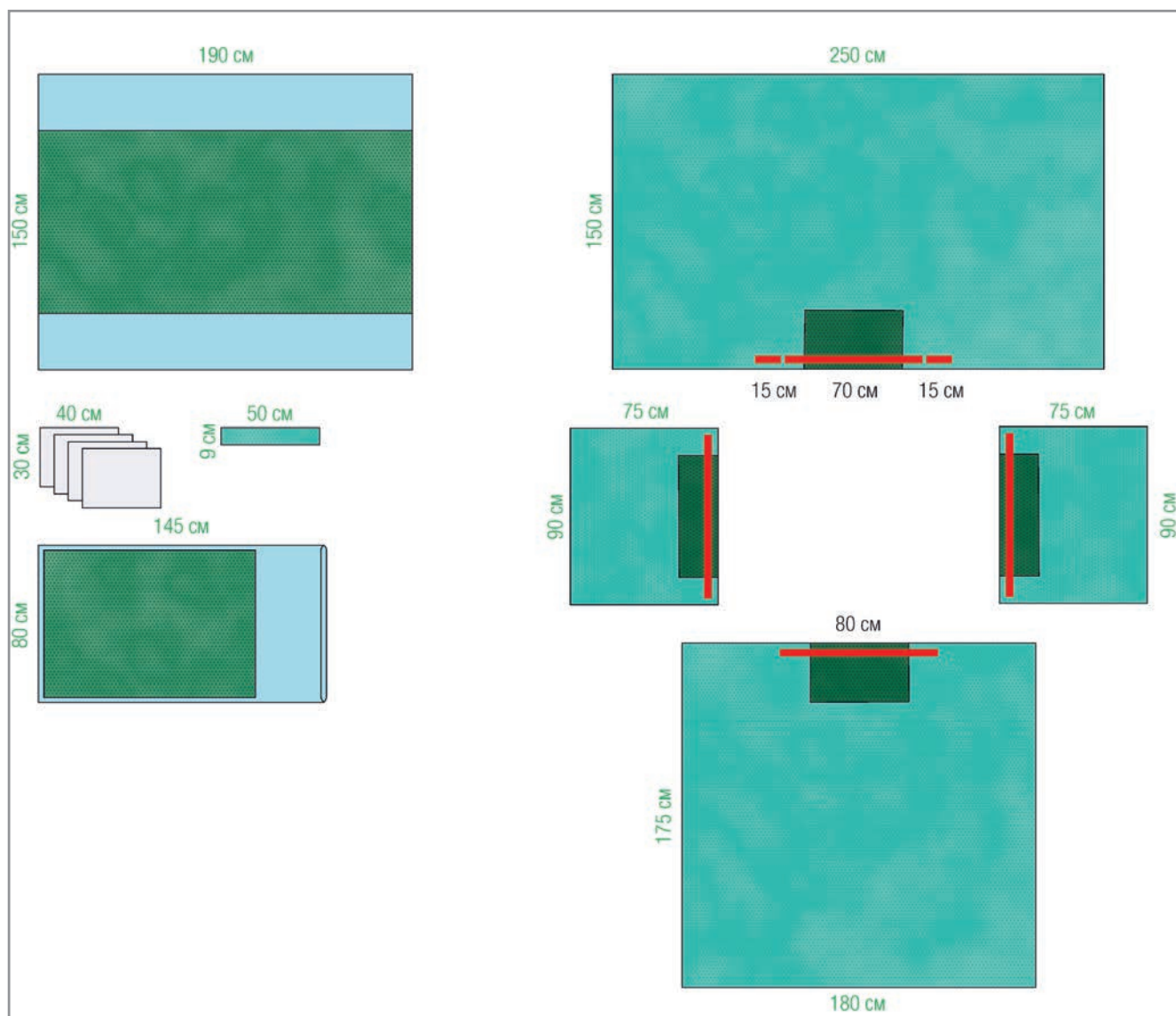




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ I

РАУКОДРЕЙП Универсальный комплект с простыней с вырезом I, стерильный


СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см	33310	12 компл.
2 полотенца	30 x 40 см		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145 см		
1 липкая полоска	9 x 50 см		
1 простыня с липким краем, 2-слойная	75 x 90 см		
1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс	225 x 260 см		
вырез	10 x 100 см		
1 простыня с липким краем, 2-слойная Плюс	150 x 240 см		
липкий край	15 + 70 + 15 см		

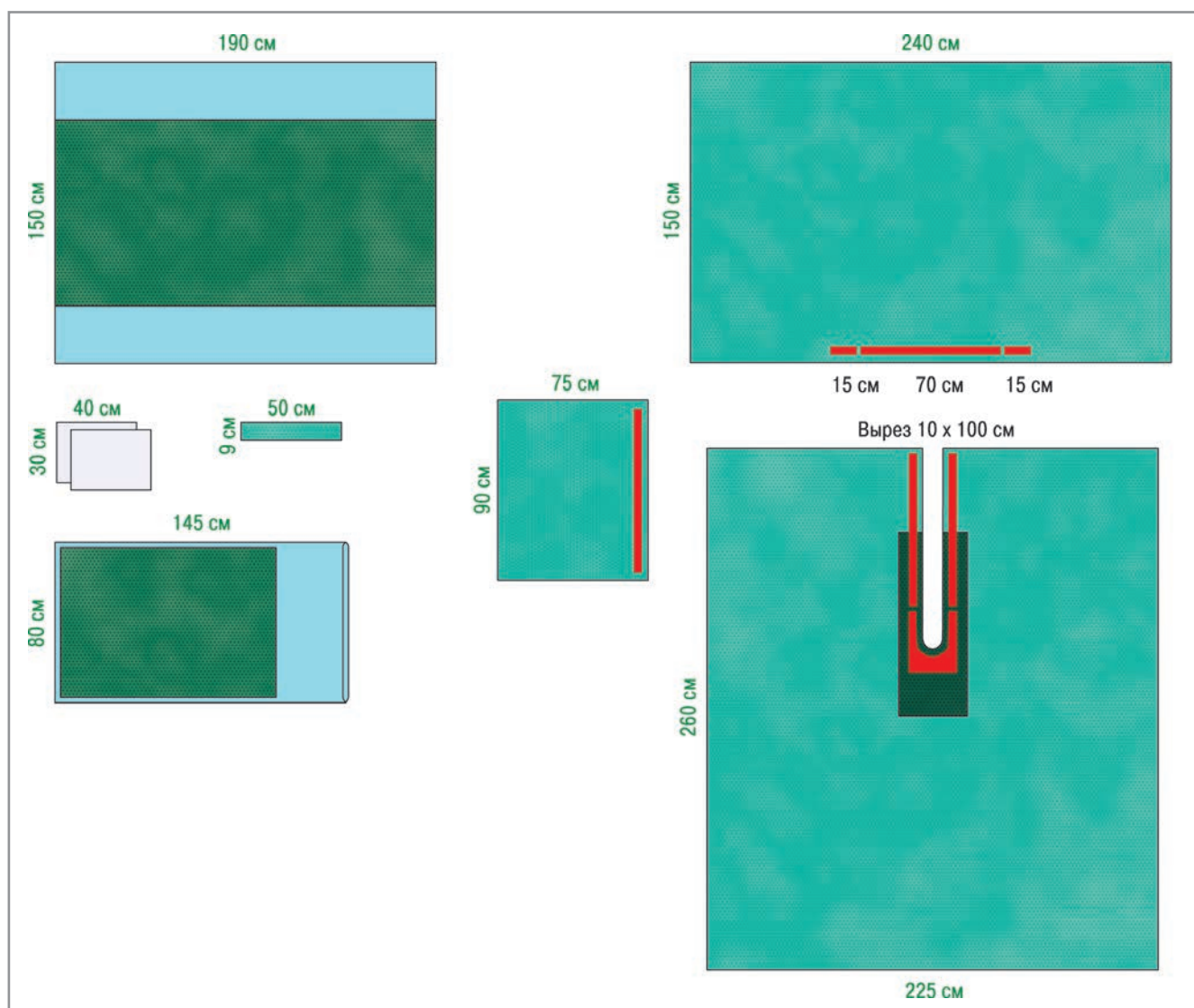



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ I
РАУКОДРЕЙП Комплект для лапароскопических операций I, стерильный


СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см		
2 полотенца	30 x 40 см		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145 см		
1 простыня для лапароскопии I	260/200 x 335 см	33320	14 компл.
для использования при горизонтальном положении пациента, абдоминальное отверстие с покрытием на подлокотники и встроенными фиксаторами трубок	28 x 32 см		

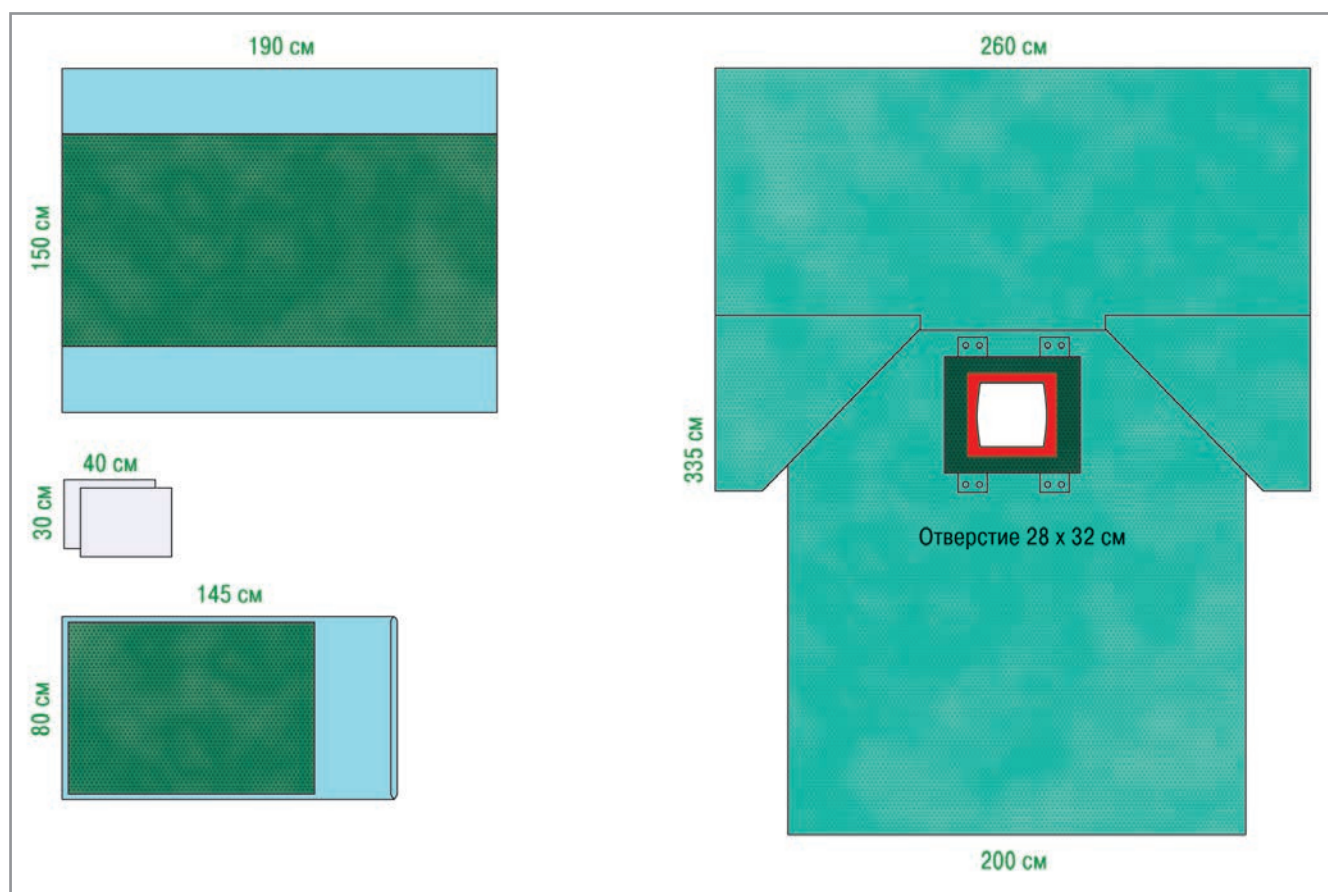



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА ПРЯМОЙ КИШКЕ II
РАУКОДРЕЙП Комплект для операций на прямой кишке II, стерильный

СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см		
4 полотенца	30 x 40 см		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145 см		
1 простыня под ягодицы	75 x 120 см		
1 простыня для операций на прямой кишке II	260 x 310 см		
со встроенными леггинсами	125 см	33326	11 компл.
с абдоминальным отверстием	35 x 37 см		
со встроенной инцизной пленкой	28 x 32 см		
с отверстием в области промежности,	10 x 15 см		
с 2-камерными карманами для инструментов			
с обеих сторон, с покрытием на подлокотники			
со встроенными фиксаторами трубок			

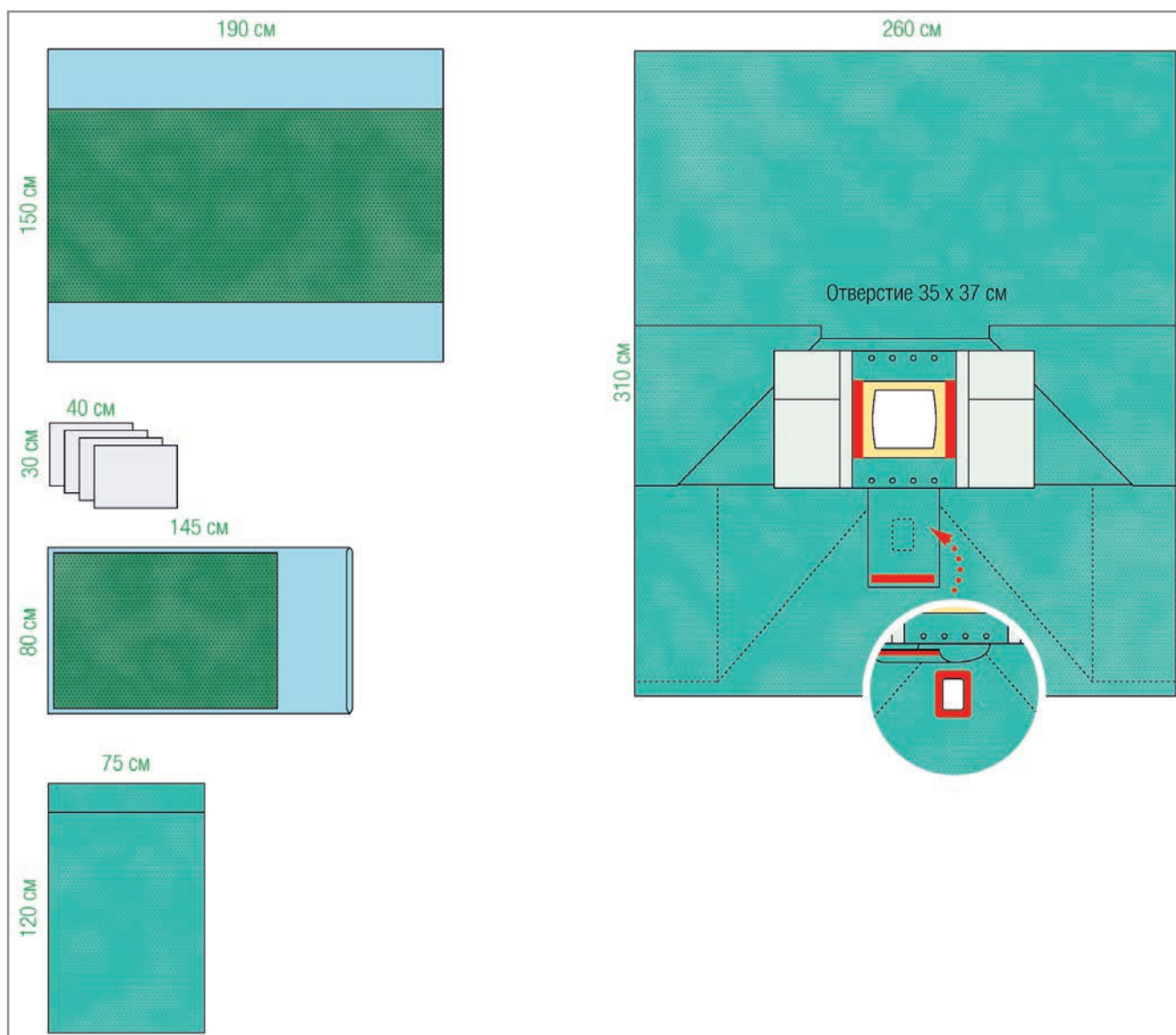




КОМПЛЕКТ ДЛЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ I

РАУКОДРЕЙП Комплект для кесарева сечения I, стерильный


СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см	33361	11 компл.
4 полотенца	30 x 40 см		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145 см		
1 операционная простыня, мягкая, для ухода за младенцами	90 x 110 см		
1 простыня для кесарева сечения I для использования при горизонтальном положении пациентки	260/200 x 335 см		
с абдоминальным отверстием, инцизной пленкой с отверстием, встроенным приемным мешком для сбора жидкости с выходным отверстием с покрытием на подлокотники	27 x 33 см 14 x 20 см		

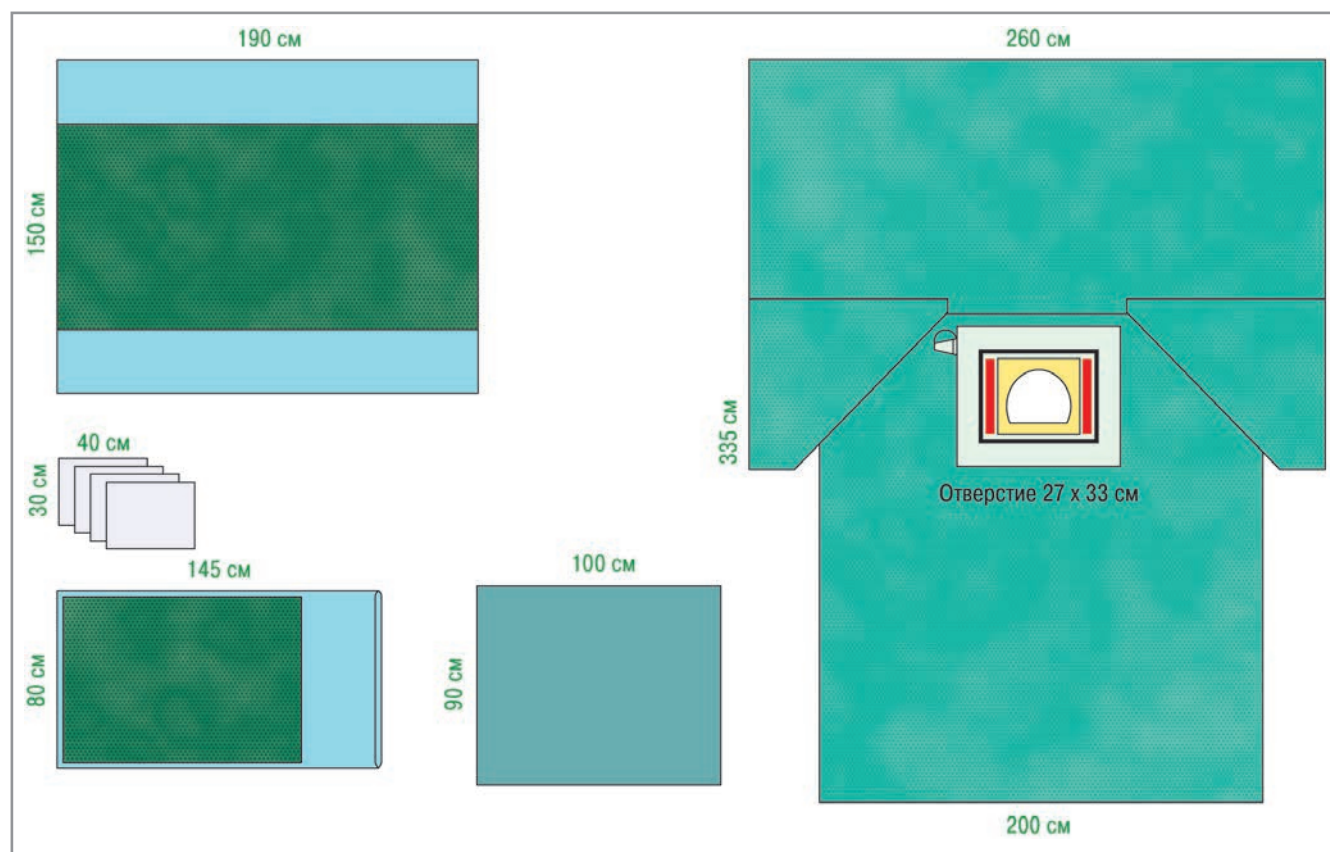



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ II
РАУКОДРЕЙП Комплект для гинекологии II, стерильный


СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см		
2 полотенца	30 x 40 см		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145 см		
1 липкая лента	9 x 50 см		
1 простыня с липким краем (п/э пленка)	50 x 50 см		
1 простыня для гинекологии II	240 / 260 x 230 см	33365	14 компл.
со встроенными леггинсами	125 см		
с отверстием в области промежности, с дополнительным впитывающим слоем РАУКОДРЕЙП Плюс по периметру, со встроенным приемным мешком с сетчатым фильтром и выходным отверстием	10 x 15 см		

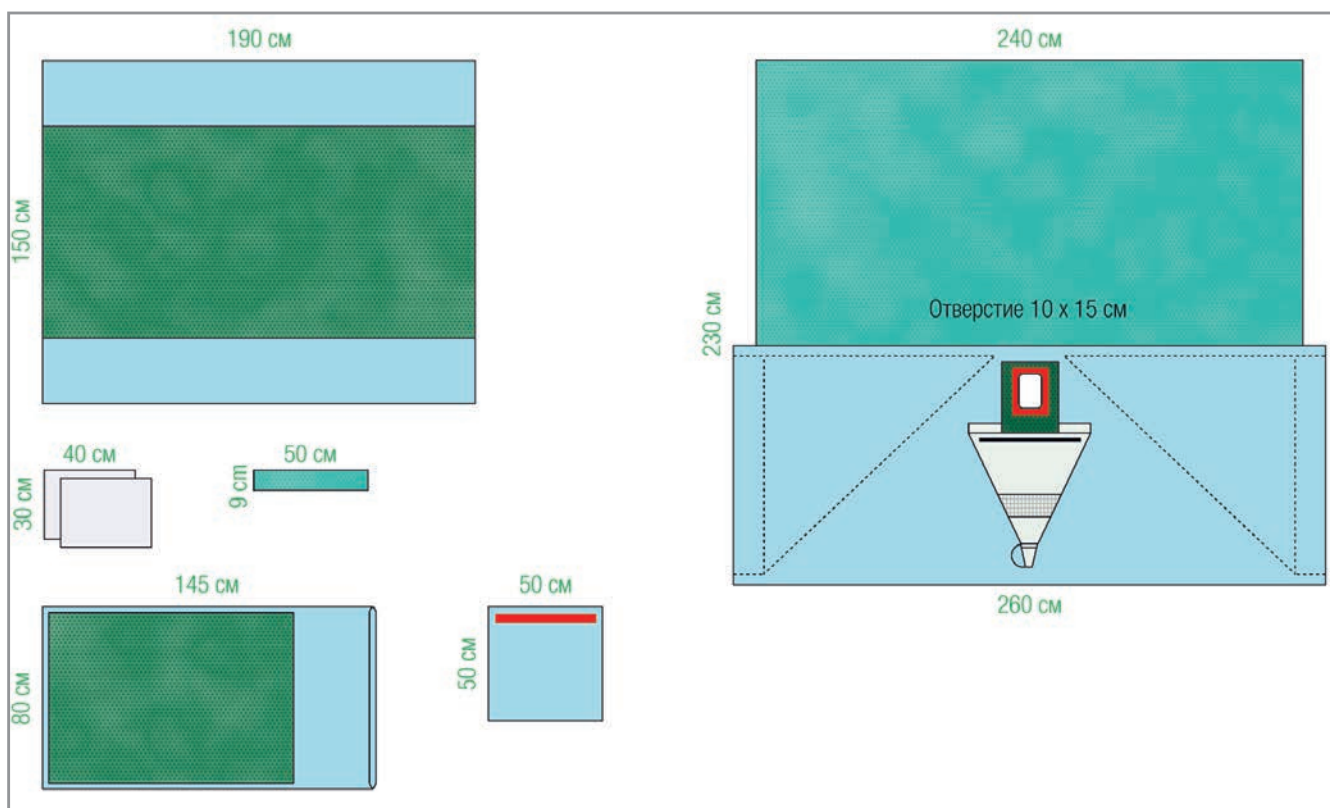



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ТУР I 33 376
РАУКОДРЕЙП Комплект для операции ТУР I, стерильный


СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см	33376	21 компл.
2 полотенца	30 x 40 см		
1 липучка	2,5 x 25 см		
1 простыня для операции ТУР I	175/260 x 210 см		
со встроенными леггинсами	125 см		
с отверстием в области промежности	5 см		
с надлобковым отверстием,	8 см		
встроенным приемным мешком для сбора жидкости			
с сетчатым фильтром и выходным			
отверстием и чехлом для пальца,			
изготовленным без латекса			

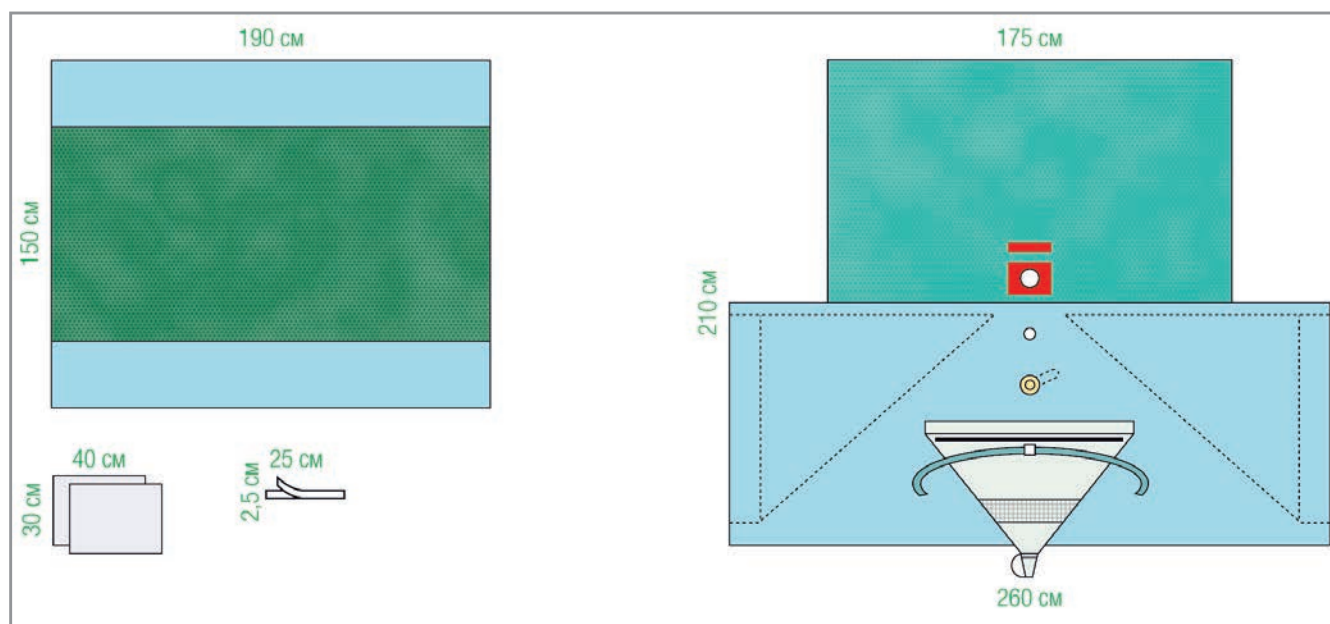



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НА БЕДРЕ II
РАУКОДРЕЙП Комплект для операции на бедре II, стерильный


СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см		
4 полотенца	30 x 40 см		
1 чехол для столика Мейо специальный	80 x 145 см		
1 липкая лента	9 x 50 см		
1 простыня с липким краем, 2-слойная	75 x 90 см		
1 операционная простыня, 2-слойная	150 x 180 см		
1 ортопедическая бахила	33 x 110 см	33388	8 компл.
2 липкие полоски	10 x 50 см		
1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс вырез	225 x 280 см		
со встроенными фиксаторами трубок	10 x 100 см		
1 простыня для анестезии, 2-слойная Плюс вырез с покрытием на подлокотники	225 x 270 см		
	45 x 65 см		

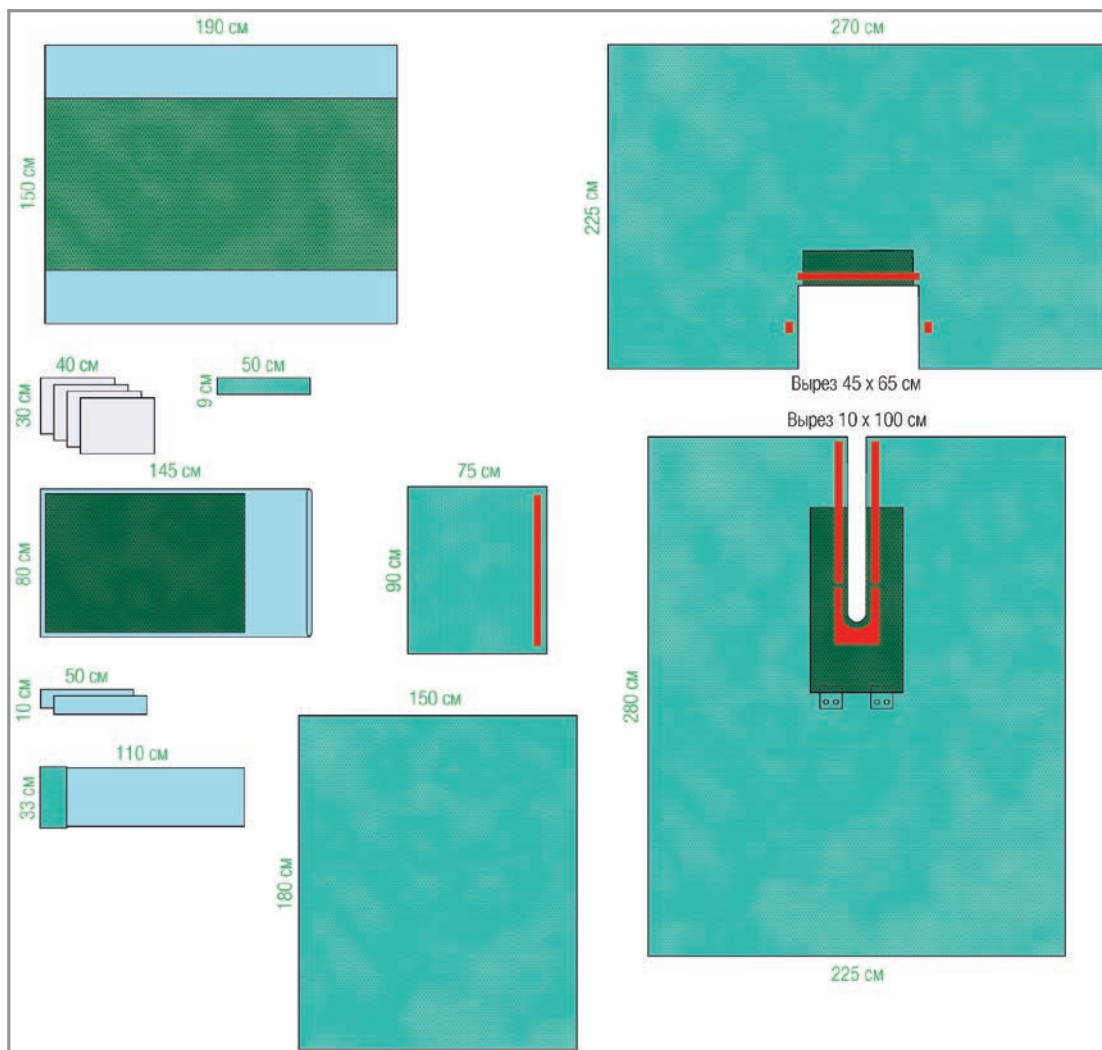



КОМПЛЕКТ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ III
РАУКОДРЕЙП Комплект для артроскопии III, стерильный

СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 оберточная бумага	80 x 100 см		
2 хирургических халата стандартных (материал – SMMS)	150 см		
1 чехол для столика Мейо Лайт	80 x 145 см		
1 покрытие на камеру (вывернутое наизнанку)	13 x 250 см		
1 ортопедическая бахила	33 x 55 см	33352	11 компл.
1 липкая полоска	10 x 50 см		
1 липкая лента	9 x 50 см		
1 простыня для операции на конечности, 2-слойная, с отверстием с эластичной манжетой	200 x 300 см		
	7 см		

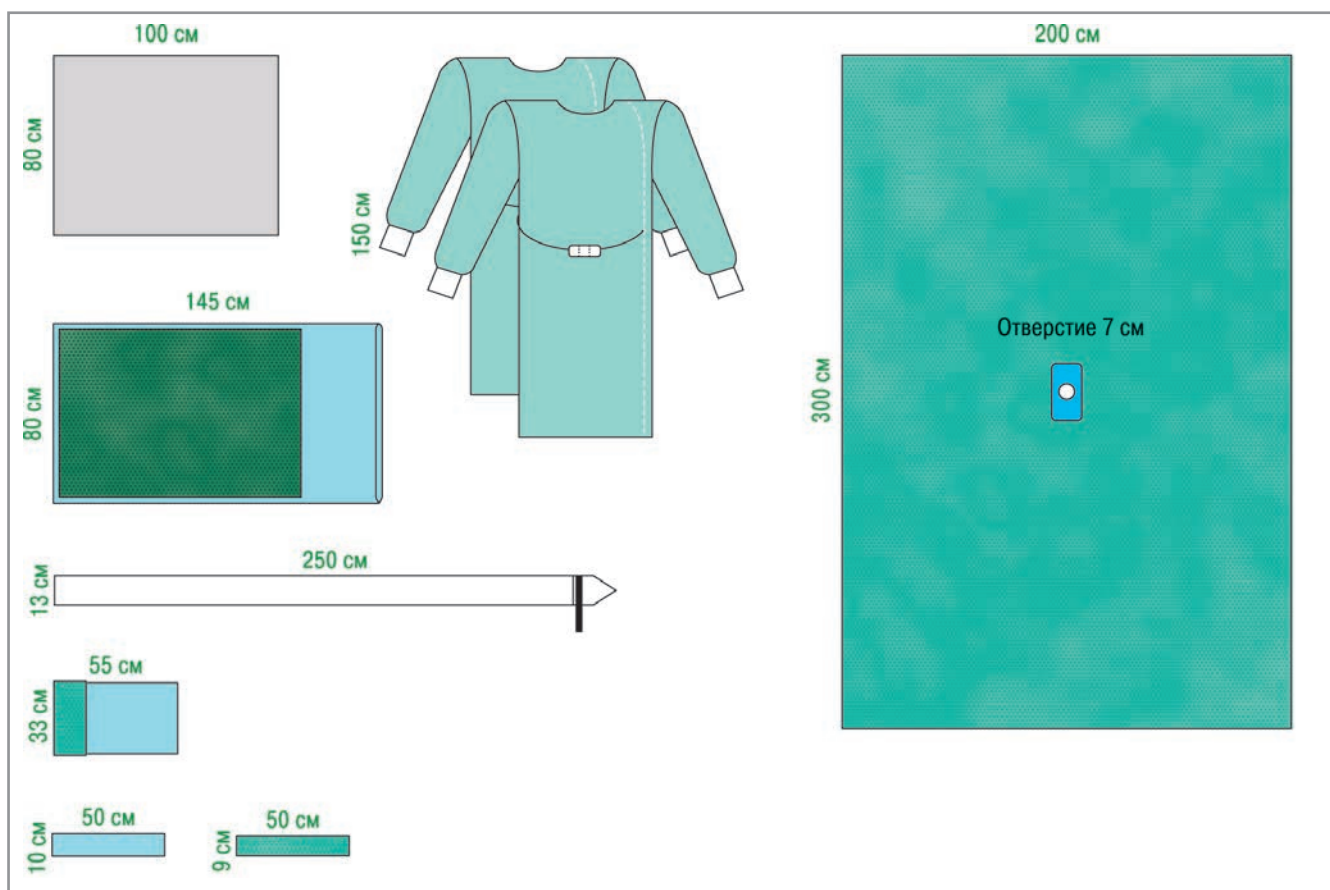




КОМПЛЕКТ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

РАУКОДРЕЙП Комплект для артроскопии коленного сустава, стерильный

СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см		
2 полотенца	30 x 40 см		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145 см		
1 операционная простыня, 2-слойная	150 x 180 см		
1 ортопедическая бахила	33 x 55 см		
1 липкая полоска	10 x 50 см	33348	10 компл.
1 простыня для артроскопии коленного сустава с отверстиями с эластичными манжетами, со встроенным приемным мешком для сбора жидкости с выходным отверстием и встроенными фиксаторами трубок	225 x 320 см 6 см + 7 см		

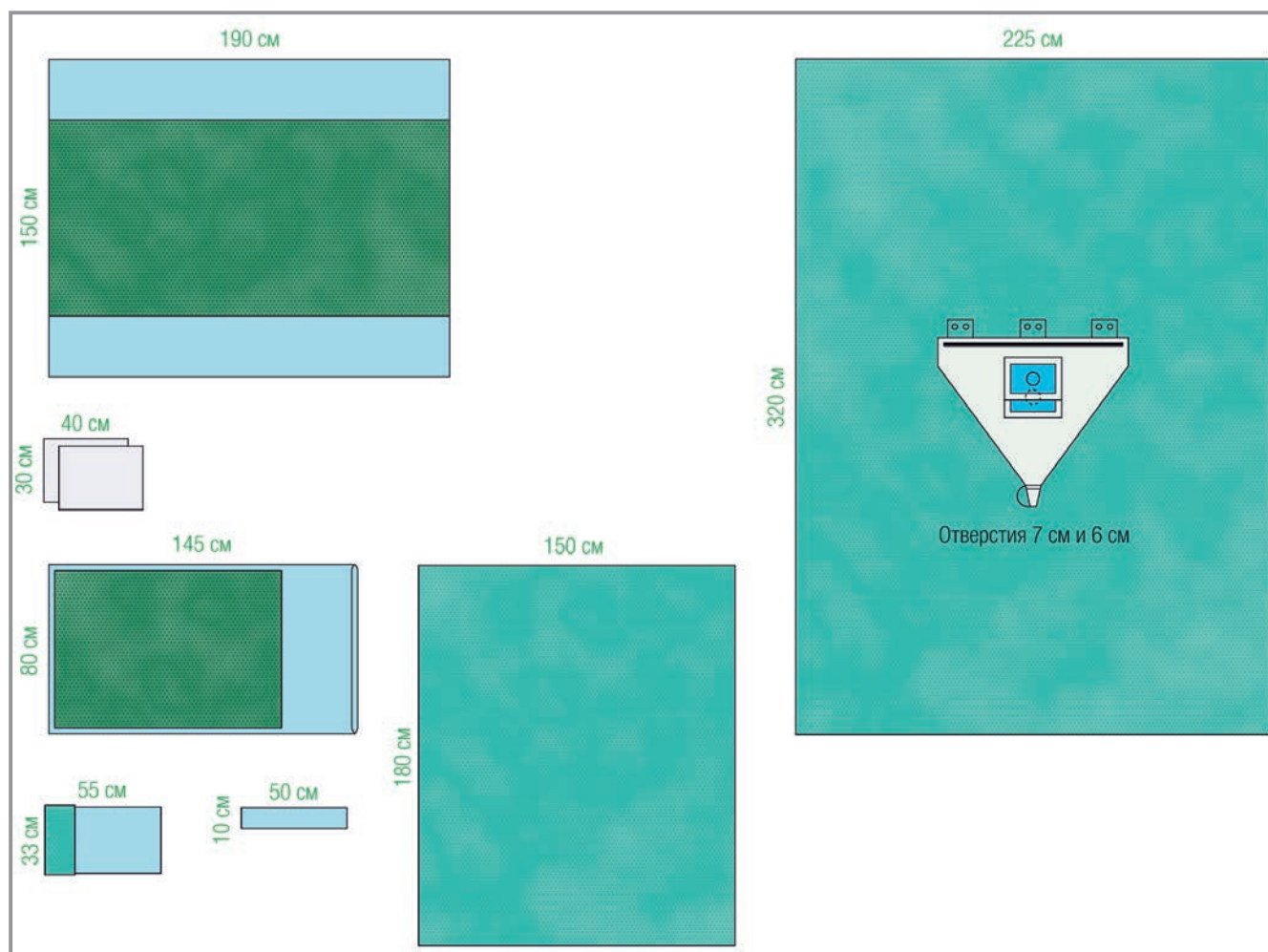




ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОСТЫНЯ

РАУКОДРЕЙП Вертикальная простыня, стерильная


СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 вертикальная простыня (прозрачная п/э пленка)	250 x 330 см	33038	13 компл./ 26 компл.
со встроенной инцизной пленкой	80 x 30 см		
встроенным приемным мешком для сбора жидкости с сетчатым фильтром и выходным отверстием,			
с 2 карманами для инструментов,			
с 2 липучками для фиксации трубок и шнуров			

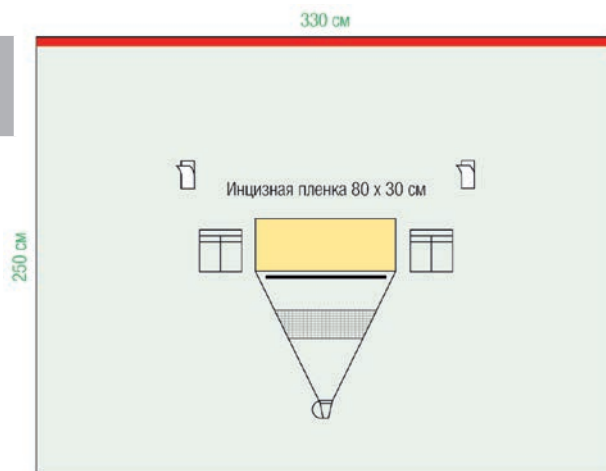

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРАНИОТОМИИ

РАУКОДРЕЙП Комплект для краниотомии, стерильный

СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см	33370	14 компл.
2 полотенца	30 x 40 см		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145 см		
3 простыни с липким краем (п/э пленка)	50 x 50 см		
1 простыня для краниотомии	225 x 280 см		
отверстие	19 x 25 см		
со встроенной инцизной пленкой, мешком для сбора жидкостей с боковыми желобами, сетчатым фильтром и выходным отверстием, со встроенными фиксаторами трубок			

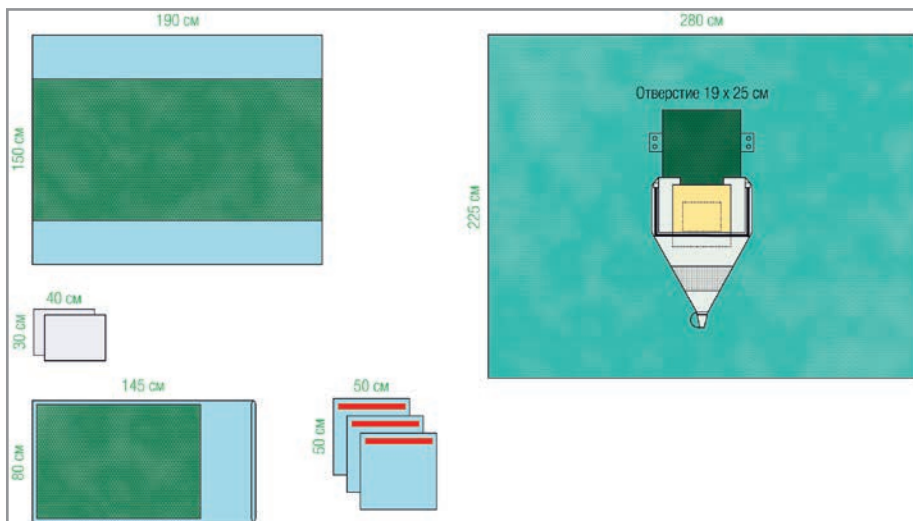




КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НА ГОЛОВЕ II

РАУКОДРЕЙП Комплект для операции на голове II, стерильный

СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см		
4 полотенца	30 x 40 см		
1 чехол для столика Мейо	80 x 145 см		
1 липкая лента	9 x 50 см		
1 простыня для покрытия головы (со вставкой из водоотталкивающего нетканого 2-слойного материала)	130 x 100 см	33372	13 компл.
1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс, прямоугольный вырез	225 x 300 см		
со встроенными фиксаторами трубок	14 x 80 см		

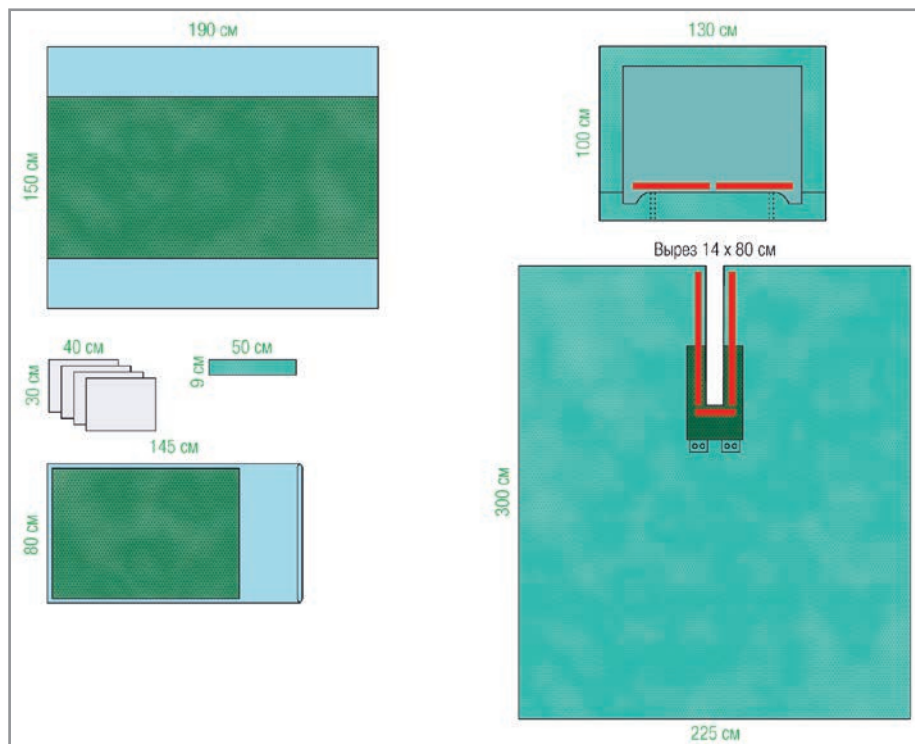

ПРОСТЫНЯ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛИЦА


РАУКОДРЕЙП Простыня с отверстием для лица, стерильная

СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
Простыня с отверстием для лица, 2-слойная	150 x 240 см		
отверстие	8 x 19 см	33054	15 шт./30 шт.
со встроенной инцизионной пленкой, (овальное, поперечное, смещенное относительно центра)			



КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
РАУКОДРЕЙП Комплект для кардиохирургических операций, стерильный


СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 покрытие на инструментальный стол	150 x 190 см		
4 полотенца	30 x 40 см		
2 покрытия на столик Мейо	80 x 145 см		
2 липкие полоски	9 x 50 см		
1 пара бахил	37,5 x 24 см		
1 операционная простыня	150 x 180 см		
1 простыня с вырезом, двусторонняя, 2-слойная Плюс	175 x 260 см	33383	8 компл.
вырез	20 x 100 см		
со встроенными фиксаторами трубок			
1 кардиоваскулярная простыня 2-слойная	300/225 x 370 см		
отверстие	33 x 40 см		
со встроенной инцизионной пленкой, с 3-камерными карманами для инструментов с обеих сторон, со встроенными фиксаторами трубок и органайзером для канюль			

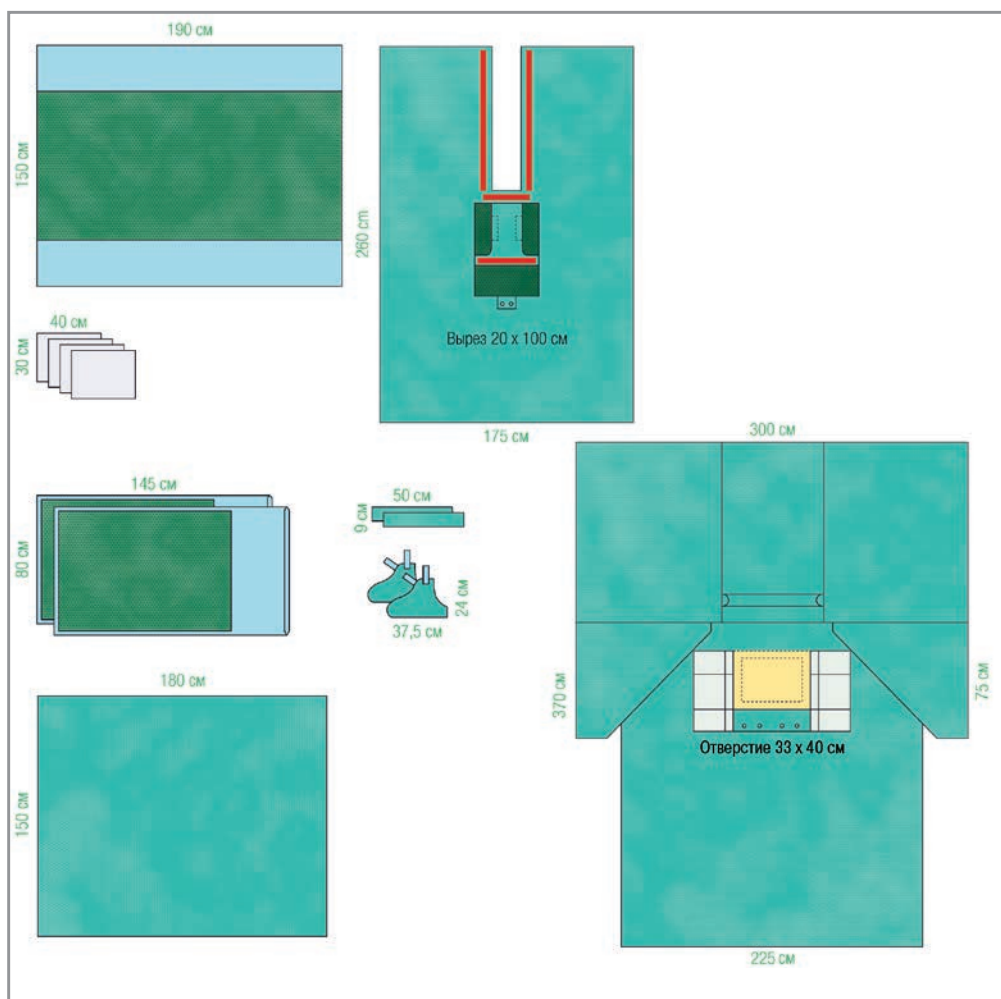



КОМПЛЕКТ ДЛЯ АНГИОГРАФИИ I
РАУКОДРЕЙП Комплект для ангиографии I, стерильный

СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
1 оберточная бумага	80 x 100 см	135585	8 компл. / 16 компл.
1 полотенце	30 x 40 см		
1 липкая лента	10 x 50 см		
1 простыня для ангиографии, 3-слойная, с 4 отверстиями	240 x 335 см		

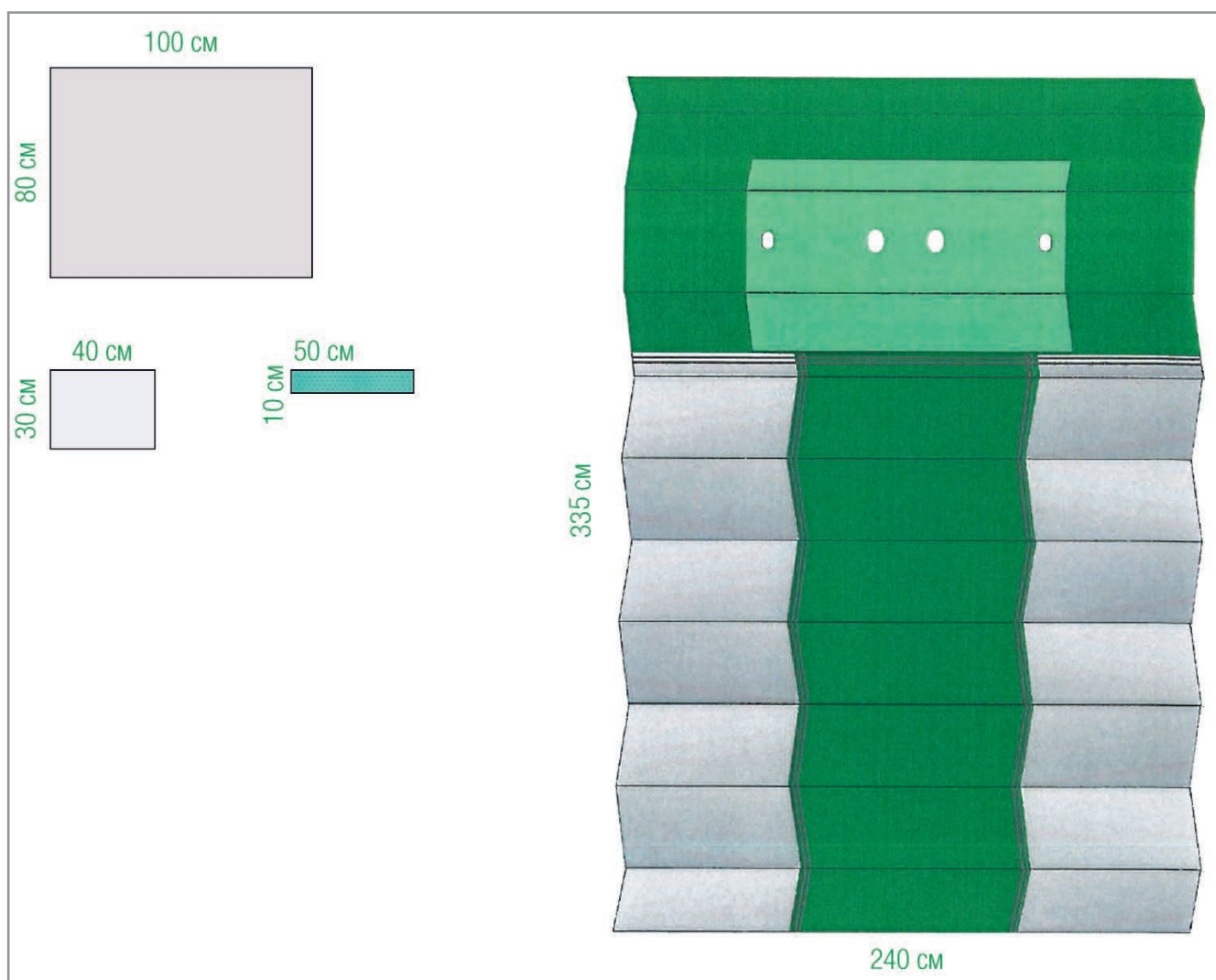




ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОСТЫНИ С ОТВЕРСТИЕМ

РАУКОДРЕЙП Операционные простыни с отверстием, стерильные


НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР/РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
Простыня для эпидуральной анестезии, 2-слойная, самофиксирующаяся	10 см, круглое, смещенное относительно центра	60 x 75 см	33047	68 шт. / 272 шт.
Простыня для эпидуральной анестезии, 2-слойная, самофиксирующаяся	10 x 15 см, прямоугольное, продольно ориентированное, смещенное относительно центра	55 x 90 см	33049	45 шт. / 180 шт.
Простыня с отверстием для уха, 2-слойная, самофиксирующаяся	5 x 7,5 см, овальное, продольно ориентированное, смещенное относительно центра	175 x 240 см	33050	11 шт. / 22 шт.
Простыня с отверстием с инцизной пленкой, 2-слойная	7 x 10 см, овальное, продольно ориентированное, расположенное по центру	120 x 150 см	33055	22 шт. / 44 шт.
Простыня с отверстием для лица, 2-слойная, с инцизной пленкой	8 x 19 см, овальное поперечно ориентированное, смещенное относительно центра	150 x 240 см	33054	15 шт. / 30 шт.
Простыня для операции на спине, 3-слойная, самофиксирующаяся	11 x 22 см, овальное, продольно ориентированное, смещенное относительно центра	225 x 320 см	33051	8 шт. / 16 шт.

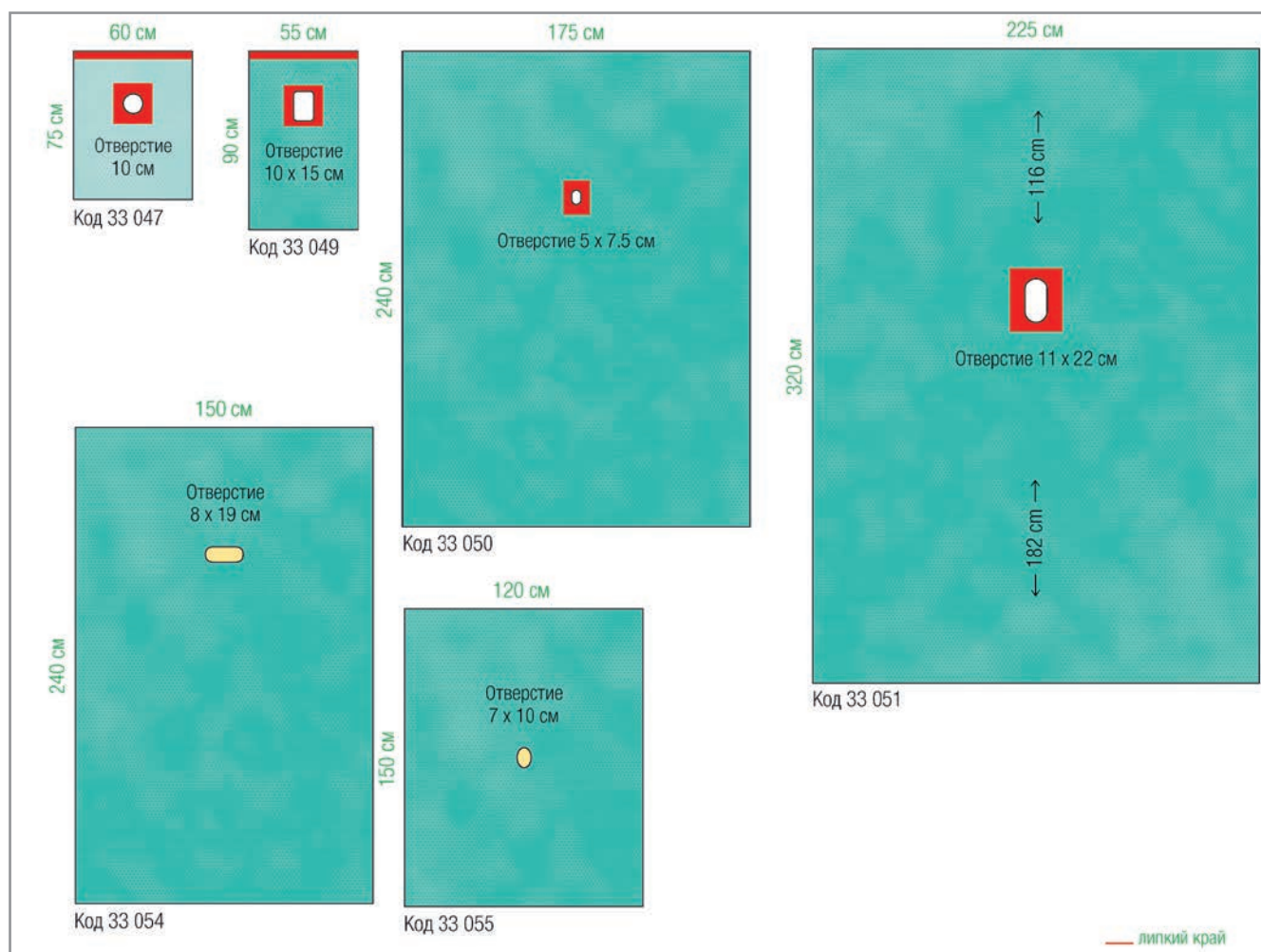



ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОСТЫНИ С ВЫРЕЗОМ
РАУКОДРЕЙП Операционные простыни с вырезом, стерильные

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ВЫРЕЗА	РАЗМЕР ПРОСТЫНИ	КОД	КОЛ-ВО В ТРАНСП. УПАКОВКЕ
Простыня с вырезом, 2-слойная	7 x 30 см	75 x 90 см	33062	35 / 140 шт.
Простыня с вырезом, 2-слойная	10 x 45 см	125 x 150 см	33064	28 / 56 шт.
Простыня с вырезом (п/э пленка)	14 x 50 см	120 x 150 см	33065	60 / 120 шт.
Простыня с вырезом (п/э пленка)	14 x 75 см	150 x 210 см	33066	40 / 80 шт.
Простыня с вырезом, 2-слойная	10 x 65 см	150 x 200 см	33067	14 / 28 шт.
Простыня с вырезом, 3-слойная	10 x 65 см	150 x 200 см	33068	10 / 20 шт.
Простыня с вырезом, 2-слойная	10 x 80 см	150 x 250 см	33073	14 / 28 шт.
Простыня с вырезом, 2-слойная	10 x 100 см	225 x 260 см	33069	13 / 26 шт.
Простыня с вырезом, 2-слойная Плюс	10 x 100 см	225 x 260 см	33071	11 / 22 шт.
Простыня с вырезом, 2-слойная Плюс, со встроенными фиксаторами трубок	10 x 100 см	225 x 280 см	33060	10 / 20 шт.
Простыня с вырезом двусторонняя, 2-слойная Плюс, со встроенными фиксаторами трубок	20 x 100 см	175 x 260 см	33 072	13 / 26 шт.

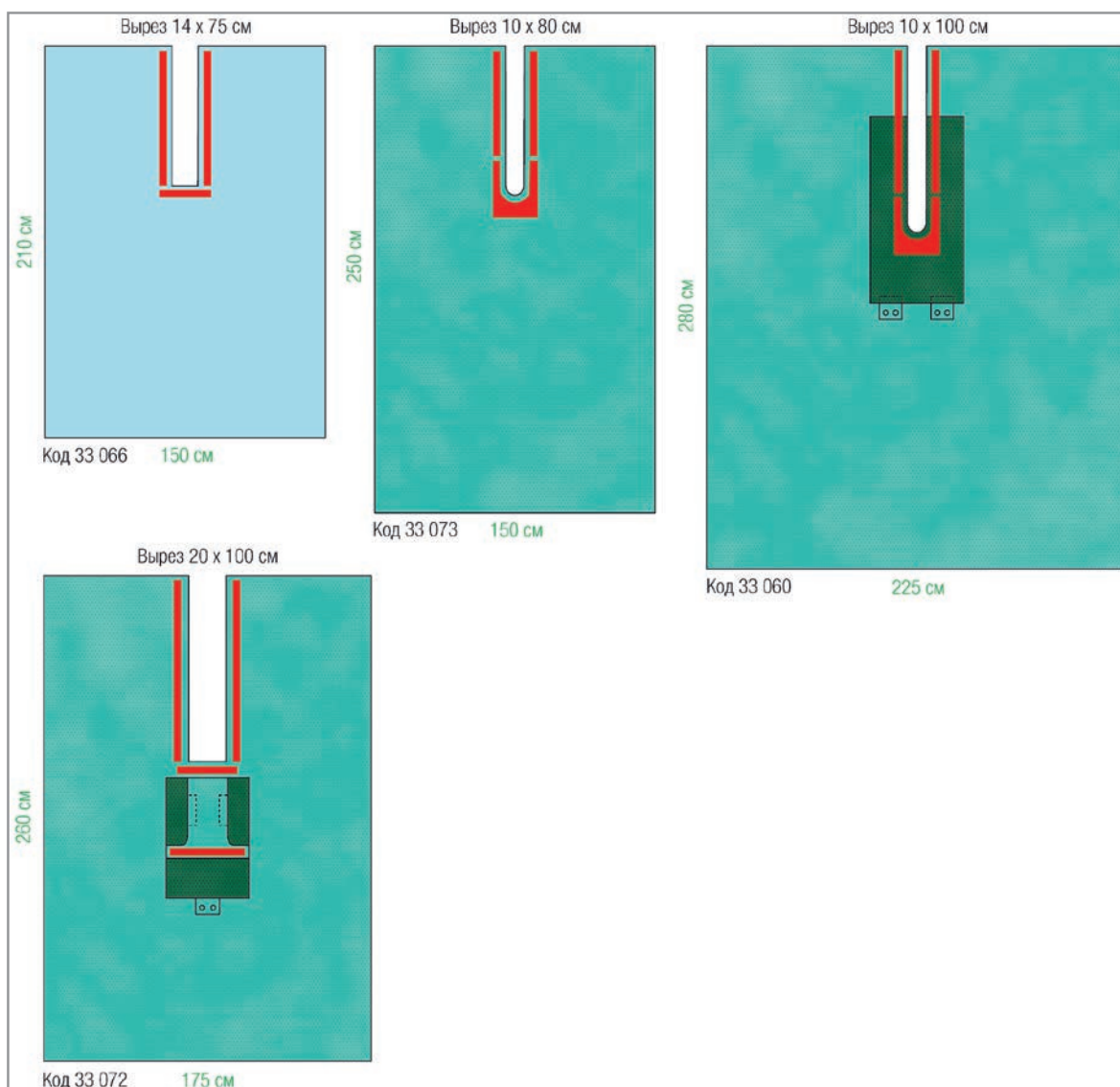



■ АКСЕССУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
--------------	--------	-----	--------------

РАУКОДРЕЙП Дополнительные принадлежности к операционному белью и покрытию пациента, стерильные

Простыня под ягодицы I	75 x 120 см	33101	28 шт.
Простыня под ягодицы II с приемным мешком	75 x 100 см	33102	15 шт.

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
--------------	--------	-----	--------------

Отдельные самофиксирующиеся принадлежности для быстрого и безопасного применения


Впитывающая пленка (2 шт.)	35 x 50 см	33125	80 шт.
Впитывающая пеленка	50 x 75 см	33126	33 шт.
Липкая лента	9 x 50 см	33116	250 шт.
Липучка	2,5 x 25 см	17746	130 шт.
Карман для инструментов, 1-камерный	38 x 40 см	33109	110 шт.
Карман для инструментов, 2-камерный	38 x 40 см	33110	110 шт.
Простыня для промежности	20 x 40 см	33100	140 шт.
Ректальный экран	60 x 90 см	33111	70 шт.

Простыня для
промежности




Код 33 100

Карман для инстру-
ментов, 2-камер-
ный

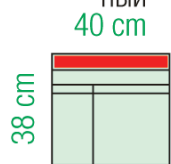


Код 33110

Простыня под ягодицы
II с приемным мешком

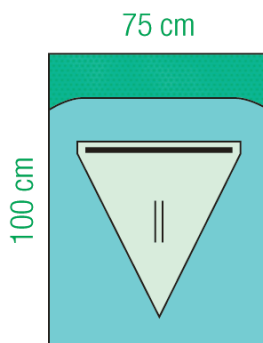

Код 33 102

Чехол на пульт управ-
ления, прямоугольный

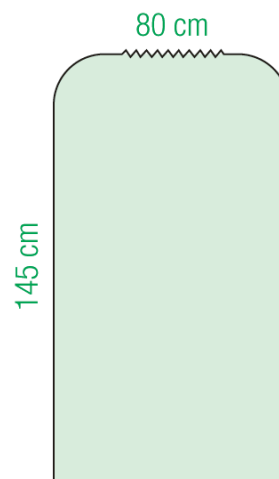

Код 33 112

— липкий край



НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Для С-образных трубок, камер и прочего операционного оборудования			
Чехол на стул	Ø = 75 см	33124	30 шт.
Чехол на пульт управления, прямоугольный	80 x 90 см	33113	40 шт.
Чехол на пульт управления, круглый	Ø = 90 см	33120	20 шт.
Чехол на пульт управления, круглый	Ø = 120 см	33121	15 шт.
Чехол на пульт управления, прямоугольный	80 x 145 см	33112	25 шт.
Чехол на пульт управления, прямоугольный	80 x 45 см	33122	30 шт.
Комплект для С-образной трубки, из 3 частей: 2 покрытия на мониторы 1 покрытие на С-дугу	65 x 75 см 30 x 195 см	33155	40 шт.
Комплект для С-образной трубки, из 1 части	90 x 225 см	33115	19 шт.
Покрытие на эндоскопическую камеру, телескопическое	13 x 250 см	15965	40 шт.
Покрытие на эндоскопическую камеру, вывернутое наизнанку	13 x 250 см	15966	40 шт.
Покрытие на эндоскопическую камеру с кольцом	15 x 250 см	33119	20 шт.
Покрытие на эндоскопическую камеру	16 x 250 см	33118	25 шт.
Чехол на подлокотники (2 шт.)	35 x 73 см	33123	46 шт.



Покрытие на С-образную трубку



Покрытие на эндоскопическую камеру

■ ОПЕРАЦИОННЫЕ ХАЛАТЫ СТЕРИЛЬНЫЕ



базовый



стандарт



с защитой



СЕНТИНЕКС. Хирургические халаты стерильные, СПАНЛЕЙС

СПАНЛЕЙС

СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Стандарт, обеспечивающий стерильность спины; двойная упаковка + 2 полотенца в комплекте	120 см	19300	44 шт.
	130 см	19301	40 шт.
	150 см	19302	36 шт.
	170 см	19303	32 шт.
	150 см большой	19304	32 шт.
Специальный, обеспечивающий стерильность спины, с дополнительным защитным слоем во фронтальной части и в области рукавов; двойная упаковка + 2 полотенца в комплекте	120 см	19310	40 шт.
	130 см	19311	36 шт.
	150 см	19312	32 шт.
	170 см	19313	28 шт.
	150 см большой	19314	28 шт.
Урологический, в двойной упаковке + 2 полотенца в комплекте	150 см	24708	44 шт.

СЕНТИНЕКС. Хирургические халаты стерильные, SMMS

SMMS

СОСТАВ	РАЗМЕР	КОД	КОЛ-ВО В УП.
Стандарт, обеспечивающий стерильность спины; двойная упаковка + 2 полотенца в комплекте	120 см	19340	52 шт.
	130 см	19341	48 шт.
	150 см	19342	44 шт.
	170 см	19343	40 шт.
	150 см большой	19344	40 шт.
Специальный, обеспечивающий стерильность спины, с дополнительным защитным слоем во фронтальной части и в области рукавов; двойная упаковка + 2 полотенца в комплекте	120 см	19350	48 шт.
	130 см	19351	44 шт.
	150 см	19352	40 шт.
	170 см	19353	36 шт.
	150 см большой	19354	36 шт.
Стандарт, обеспечивающий стерильность спины; в одинарной упаковке	120 см	19360	52 шт.
	130 см	19361	48 шт.
	150 см	19362	44 шт.
Специальный, обеспечивающий стерильность спины, с дополнительным защитным слоем во фронтальной части и в области рукавов; в одинарной упаковке	120 см	19370	48 шт.
	130 см	19371	44 шт.
	150 см	19372	40 шт.
Базовый, с тремя парами завязок на спине, в одинарной упаковке	120 см	19380	48 шт.
	130 см	19381	44 шт.
	150 см	19382	40 шт.

■ ОПЕРАЦИОННЫЕ ШАПОЧКИ



ФЛЕКС. Шапочка для хирурга очень удобна для коротких волос. Хорошая воздухопроницаемость, хорошо носится.



АСТРО. Безопасный, защитный головной убор в форме шлема, с гранями. Полностью закрывает голову и шею, на завязках.



АСТРО ЭКСТРА. Безопасный, защитный головной убор в форме шлема, с гранями. Полностью закрывает голову и шею, на завязках. Имеет дополнительную впитывающую полоску на лбу.



СОФТ. Легкий воздухопроницаемый берет. Может носиться с длинными и короткими волосами.



ФЭНСИ. Шапочка предназначена для длинных волос. Шов в центре обеспечивает большой объем. Мягкая секция на лбу без круглой резинки предотвращает появление пятен от давления.



НОВА. Шапочка может надеваться разными способами. Шов в лобной части легко может быть трансформирован во впитывающую пот полоску.



ТРЕНД. Точная форма шапочки делает ее удобной для коротких и длинных волос. Круговая резинка на затылке обеспечивает длительную дополнительную поддержку.



ИЗИ. Легкий воздухопроницаемый берет. Может носиться с длинными и короткими волосами.

СЕНТИНЕКС. Шапочки хирургические мужские

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОЛ-ВО В УП.
СЕНТИНЕКС АСТРО Шапочка, зеленая	17421	100 шт.
СЕНТИНЕКС АСТРО ЭКСТРА Шапочка на завязках, зеленая	17422	100 шт.
СЕНТИНЕКС ФЛЕКС Шапочка хирурга, зеленая	17426	100 шт.

СЕНТИНЕКС. Шапочки хирургические женские

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОЛ-ВО В УП.
СЕНТИНЕКС СОФТ Берет, зеленый, «дышащий»	17420	100 шт.
СЕНТИНЕКС ФЭНСИ Шапочка медсестры со швом по центру, зеленая	17423	100 шт.
СЕНТИНЕКС НОВА Шапочка медсестры с завязками, зеленая	17 24	100 шт.
СЕНТИНЕКС ТРЕНД Шапочка медсестры, зеленая	17425	100 шт.
СЕНТИНЕКС ИЗИ Берет, зеленый	17427	100 шт.
СЕНТИНЕКС ИЗИ Берет, голубой	17428	100 шт.
СЕНТИНЕКС ИЗИ Берет, белый	17429	100 шт.

■ ОПЕРАЦИОННЫЕ МАСКИ



КЛАССИК. Модель повышенной комфортности премиум-класса за счет использования высококачественных материалов.



ЛАЙТ. Базовая модель, обеспечивает оптимальный комфорт. Маска изготовлена из комбинации экстралегких материалов для улучшенной воздухопроницаемости и защиты от перегрева.



АНТИФОГ. Встроенная полоса «антифог» вместе с широкой носовой дугой препятствуют запотеванию очков хирурга и окуляра микроскопа.



НАДЕЖНЫЙ ЩИТ с защитным экраном «антифог». Хирургическая маска с повышенной степенью защиты от инфекций: дополнительный встроенный внутренний слой предотвращает проникновение физиологических жидкостей. Экран не бликует, не вызывает раздражение кожи и обеспечивает надежную защиту всего лица.



ЭКСТРАТАЧ. За счет широкого выреза и горизонтально расположенных завязок создается больший объем воздуха, дыхание заметно охлаждается; может использоваться хирургами, носящими бороду.



УЛЬТРА. Белая маска из материала, очень комфортного для кожи; с полосой «антифог».



СУПЕРСОФТ. С мягким и эластичным внутренним слоем из БиКоСофта (BiCoSoft) – (50% полипропилен, 50% полиэтилен), изготовлена на основе гипоаллергенного клея без добавления искусственных красителей, специально разработана для чувствительной кожи. Воздухопроницаемое микрофибровое волокно предотвращает раздражение кожи.

СЕНТИНЕКС. Хирургические маски

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОЛ-ВО В УП.
СЕНТИНЕКС ЛАЙТ, синяя	11983	50 шт.
СЕНТИНЕКС ЛАЙТ, зеленая	11991	50 шт.
СЕНТИНЕКС ЛАЙТ, зеленая, на резинке, без латекса	11992	50 шт.
СЕНТИНЕКС КЛАССИК, зеленая	11996	50 шт.
СЕНТИНЕКС СУПЕРСОФТ	11997	50 шт.
СЕНТИНЕКС ЭКСТРАТАЧ	11998	50 шт.
СЕНТИНЕКС с защитным экраном	11989	25 шт.
СЕНТИНЕКС АНТИФОГ	11986	50 шт.
СЕНТИНЕКС УЛЬТРА	11999	50 шт.

РАУКОДРЕЙП (ОПРАФЛЕКС) – ИНЦИЗНАЯ ПЛЕНКА (РАЗРЕЗАЕМОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ)



РАУКОДРЕЙП (ОПРАФЛЕКС) – инцизная пленка (разрезаемое операционное покрытие) – является механическим барьером, препятствующим попаданию кожной микрофлоры (*S. Epidermidis*, *S. Aureus*, *E. Coli* и др.) в операционную рану. Прозрачная самоклеящаяся пленка наклеивается на операционное поле после его традиционной обработки дезинфицирующими растворами и ограничения операционным бельем. Наклеиваясь на кожу и белье одновременно, РАУКОДРЕЙП (ОПРАФЛЕКС) фиксирует операционное белье (вместо цапок и липких лент). Хирург производит разрез (скальпелем или коагулятором) непосредственно по пленке.




Основу РАУКОДРЕЙПА (ОПРАФЛЕКСА) составляет полупроницаемая мембрана (паро- и кислородопроницаема – кожа «дышит», снаружи влаго- и микробонепроницаема), полиакрилатный клей не вызывает аллергических реакций и обеспечивает надежную фиксацию пленки к краям раны в течение всей операции.



Использование РАУКОДРЕЙПА (ОПРАФЛЕКСА) позволяет полностью предотвратить попадание микроорганизмов с кожи в операционную рану. Хирург получает абсолютно стерильное операционное поле в течение всей операции. Сокращается время операции и экономится операционное белье. Растяжимость пленки позволяет ее легко моделировать и наклеивать на участки тела со сложным рельефом. Удаляется с тела пациента либо после наложения швов, либо перед зашиванием раны.

Выпускается в индивидуальной стерильной упаковке.

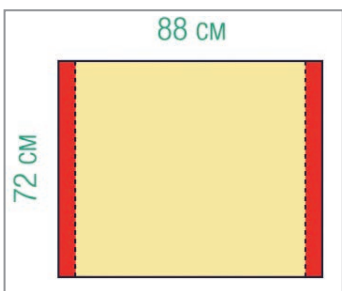

КОД	РАЗМЕРЫ	КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
25440	12 x 17 см	10 компл. / 80 компл.
25441	15 x 20 см	10 компл. / 60 компл.
25442	30 x 20 см	10 компл. / 80 компл.
25443	45 x 20 см	10 компл. / 80 компл.
25444	40 x 35 см	10 компл. / 80 компл.
25445	45 x 50 см	10 компл. / 80 компл.
25446	45 x 65 см	10 компл. / 40 компл.
25447	55 x 80 см	10 компл. / 40 компл.
25448	72 x 88 см	10 компл. / 40 компл.



«НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
190121, Санкт-Петербург, ул. Перевозная, д. 6 (Матисов остров)

Тел./факс: (812) 714-0614 (многоканальный)

e-mail: nda@nda.ru

www.nda.ru