

Стандартный набор интродьюсеров Radifocus II


Интродьюсер



Интродьюсеры предназначены для чрезкожного введения в сосуд в целях обеспечения доступа и облегчения процедуры вмешательства в целом

Особенности:

- Уникальный запатентованный гемостатический клапан компании «Терумо» обеспечивает бескомпромиссный гемостаз, предотвращая кровотечение и аспирацию воздуха
- Плавный переход «шaft-дилататор» и оптимальная конусообразная конструкция дилататора заметно облегчают введение интродьюсера
- Тонкая рентгеноконтрастная стенка shaft и антизагибочный рукав помогают в управлении интродьюсером
- Специальная форма крепления дилататора предотвращает смещение дилататора при введении и позволяет удалить дилататор одной рукой

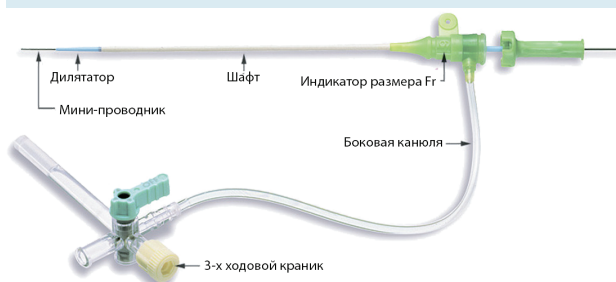

В наличии имеются следующие наборы:

- **Набор А** содержит интродьюсер, дилататор, пластиковый мини-проводник и пластиковый внутривенный мини-катетер (на пункционной игле)
- **Набор В** содержит интродьюсер, дилататор, пластиковый или металлический мини-проводник
- **Набор С** содержит интродьюсер и дилататор
- **Набор R** содержит интродьюсер, дилататор, металлический мини-проводник и стандартную металлическую пункционную иглу

Набор А

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 см
Мини-проводник	Пластиковый прямой или изогнутый 0.025" (0.64мм) для 4Fr, 0.035" (0.89мм) для всех остальных 45 см
Пункционная игла	Пластиковый внутривенный мини-катетер – 18G x 2 1/2" (1.2 x 64 мм), Кроме 4Fr: 20G x 2" (0.9 x 51 мм), в набор входит 2.5 мл шприц
Совместимость проводника	0.025" (0.64 мм) для 4Fr, 0.035" (0.89 мм) для всех остальных
Упаковка	лоток

Спецификация

Внутренний диаметр	Тип мини-проводника	
	45 см изогнутый	45 см прямой
4 Fr	RS+A40K10AQ	RS+A40G10SQ
5 Fr	RS+A50K10AQ	RS+A50K10SQ
6 Fr	RS+A60K10AQ	RS+A60K10SQ
7 Fr	—	RS+A70K10SQ
8 Fr	—	RS+A80K10SQ
9 Fr	—	RS*A90K10SQ
10 Fr	—	RS*A10K10SQ
11 Fr	—	RS*A11K10SQ

При размещении заказа, пожалуйста, указывайте код продукта

Набор В

1-го типа в лотке с пластиковым мини-проводником

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 см и 25 см
Мини-проводник	Пластиковый прямой или изогнутый 0.025" (0.64мм) или 0.035" (0.89мм) для 4Fr и 0.038" (0.97 мм) для всех остальных 45 см для интродьюсера длиной 10 см и 80 см для интродьюсера длиной 25 см
Совместимость проводника	0.025" (0.64мм) или 0.035" (0.89мм) для 4Fr и 0.038" (0.97 мм) для всех остальных
Упаковка	лоток

Спецификация

Внутренний диаметр	совместимость проводника	Длина интродьюсера 10 см		Длина интродьюсера 25 см
		тип мини-проводника		
		45 см угловой	45 см прямой	80 см угловой
4 Fr	0.025" (0.64 mm)	—	RS+B40G10SQ	—
4 Fr	0.035" (0.89 mm)	RS+B40K10AQ	RS+B40K10SQ	—
5 Fr	0.038" (0.97 mm)	RS+B50N10AQ	RS+B50N10SQ	RS+B50N25AQ
6 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS+B60N10SQ	RS+B60N25AQ
7 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS+B70N10SQ	RS+B70N25AQ
8 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS+B80N10SQ	RS+B80N25AQ
9 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS*B90N10SQ	RS*B90N25AQ
10 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS*B10N10SQ	RS*B10N25AQ
11 Fr	0.038" (0.97 mm)	—	RS*B11N10SQ	RS*B11N25AQ

При размещении заказа, пожалуйста, указывайте код продукта

▶ Набор В

2-го типа в лотке с металлическим мини-проводником

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 cm
Мини-проводник	Металлический прямой и J-образный 0.035" (0.89 mm) и 0.038" (0.97 mm) 45 cm
Совместимость проводника	0.035" (0.89 mm) и 0.038" (0.97 mm)
Упаковка	ЛОТОК

Спецификация

Внутр. диаметр	Совместимость проводника	
	0.035" (0.89 mm)	0.038" (0.97 mm)
4 Fr	RS+B40K10MQ	—
5 Fr	RS+B50K10MQ	RS+B50N10MQ
6 Fr	RS+B60K10MQ	RS+B60N10MQ
7 Fr	RS+B70K10MQ	RS+B70N10MQ
8 Fr	RS+B80K10MQ	RS+B80N10MQ
9 Fr	RS*B90K10MQ	RS*B90N10MQ
10 Fr	RS*B10K10MQ	RS*B10N10MQ
11 Fr	RS*B11K10MQ	RS*B11N10MQ

При размещении заказа, пожалуйста, указывайте код продукта

3-го типа в пакете с металлическим мини-проводником

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 cm
Мини-проводник	Металлический прямой и J-образный 0.035" (0.89 mm)) для 4Fr и 0.038" (0.97 mm) для всех остальных
Совместимость проводника	0.035" (0.89 mm) и 0.038" (0.97 mm)
Упаковка	пакет

Спецификация

Диаметр проводника	Код продукта
4 Fr	RS*B40K10MR
5 Fr	RS*B50N10MRD
6 Fr	RS*B60N10MRD
7 Fr	RS*B70N10MRD
8 Fr	RS*B80N10MRD
9 Fr	RS*B90N10MRD
10 Fr	RS*B10N10MRD
11 Fr	RS*B11N10MRD

При размещении заказа, пожалуйста, указывайте код продукт

▶ Набор С

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 cm и 25 cm
Совместимость проводника	0.025" (0.64mm) или 0.035" (0.89mm) для 4Fr и 0.038" (0.97 mm)
Упаковка	пакет

Спецификация

Внутр. диаметр	Совместимость проводника	Длина Интродьюсера	
		10 cm	25 cm
4 Fr	0.025" (0.64 mm)	RS+C40G10NR	—
4 Fr	0.035" (0.89 mm)	RS+C40K10NR	RS+C40K25NR
5 Fr	0.038" (0.97 mm)	RS+C50N10NR	—
6 Fr	0.038" (0.97 mm)	RS+C60N10NR	RS+C60N25NR
7 Fr	0.038" (0.97 mm)	RS+C70N10NR	RS+C70N25NR
8 Fr	0.038" (0.97 mm)	RS+C80N10NR	RS+C80N25NR
9 Fr	0.038" (0.97 mm)	RS*C90N10NR	—
10 Fr	0.038" (0.97 mm)	RS*C10N10NR	—
11 Fr	0.038" (0.97 mm)	RS*C11N10NR	—

При размещении заказа, пожалуйста, указывайте код продукта

▶ Набор R

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 cm
Мини-проводник	Металлический двусторонний прямой или J-образный, 0.035" (0.89mm) для 4Fr и 0.038" (0.97 mm) для всех остальных
Инъекционная игла	Металлическая функциональная игла – 18G 2 3/4" (1.2 x 70 mm),
Совместимость проводника	0.035" (0.89 mm) для 4Fr и 0.038" (0.97 mm) для всех остальных
Упаковка	ЛОТОК

Спецификация

Внутр. диаметр	Код продукта
4 Fr	RS+R40K10MQ
5 Fr	RS+R50N10MQ
6 Fr	RS+R60N10MQ
7 Fr	RS+R70N10MQ
8 Fr	RS+R80N10MQ
9 Fr	RS+R90N10MQ

При размещении заказа, пожалуйста, указывайте код продукт

Radifocus Интродьюсер II набор для трансрадиального доступа

Интродьюсер



Интродьюсеры предназначены для чрезкожного введения в сосуд в целях обеспечения доступа и облегчения процедуры вмешательства в целом.


Будучи новатором и лидером в области продукции для доступа, компания Terumo предлагает полный набор решений для процедуры трансрадиального вмешательства, которые позволяют минимизировать воздействие на пациента и оптимизировать процедуру трансрадиального доступа.

Используя технологии, включающие превосходное гидрофильное покрытие и уменьшение размера устройств, Terumo продолжит устанавливать новые стандарты в области трансрадиальных вмешательств.



Особенности

- Дилататор сужается к кончику, что позволяет минимизировать степень травмирования сосуда.
- Уникальный запатентованный гемостатический клапан компании «Терумо» обеспечивает бескомпромиссный гемостаз, предотвращая кровотечение и аспирацию воздуха
- Плавный переход «шафт-дилататор» и оптимальная конусообразная конструкция дилататора заметно облегчают введение интродьюсера
- Тонкая рентгеноконтрастная стенка shaft и антизагибочный рукав помогают в управлении интродьюсером
- Специальная форма крепления дилататора предотвращает смещение дилататора при введении и позволяет удалить дилататор одной рукой

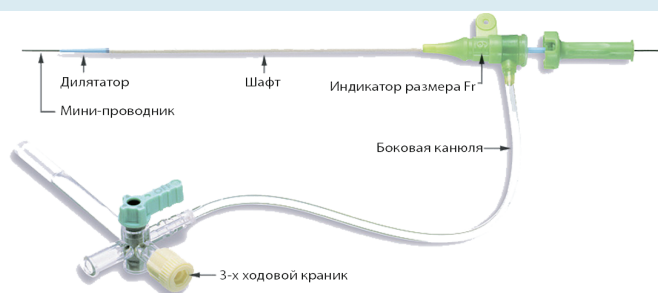

▶ Решение для трансрадиального доступа № 1

Набор специального интродьюсера для трансрадиального доступа с конусообразным кончиком shaft Radifocus Introducer II

- Внутренний диаметр кончика дилататора равен наружному диаметру мини-проводника
- Металлическая пункционная игла с коротким концевым срезом (22G/21G/20G) соответствует мини-проводнику, что позволяет избежать осложнений в месте прокола

Доступные наборы :

Набор типа R включает в себя интродьюсер, дилататор, металлический мини-проводник и металлическую пункционную иглу особо острой заточки.

Общие характеристики

Длина интродьюсера	7 см и 10 см
Мини-проводник	Металлический прямой 0.018" (0.46 мм), 0.021" (0.53 мм) и 0.025" (0.64 мм) 45 см
Иньекционная игла	Металлическая пункционная игла – 22G x 1½" (0.7 x 38 мм), 21G x 1½" (0.8 x 38 мм), 20G x 1½" (0.9 x 38 мм).
Совместимость проводника	0.018" (0.46 мм), 0.021" (0.53 мм) и 0.025" (0.64 мм)
Упаковка	ЛОТОК

Спецификация

Внутренний диаметр	Длина интродьюсера 7 см		Длина интродьюсера 10 см		
	Совместимость с проводником				
	0.018" (0.46 mm)	0.025" (0.64 mm)	0.018" (0.46 mm)	0.021" (0.53 mm)	0.025" (0.64 mm)
4 Fr	RT-R40A07PQ	RT-R40G07PQ	RT-R40A10PQ	RT-R40D10PQ	RT-R40G10PQ
5 Fr	RT-R50A07PQ	RT-R50G07PQ	RT-R50A10PQ	RT-R50D10PQ	RT-R50G10PQ
6 Fr	RT-R60A07PQ	RT-R60G07PQ	RT-R60A10PQ	RT-R60D10PQ	RT-R60G10PQ
7 Fr	—	—	—	RT-R70D10PQ	—

▶ Решение для трансрадиального доступа № 2

Набор специального интродьюсера для трансрадиального доступа Radifocus Introducer II с фирменным гидрофильным покрытием компании «Терумо»

- Внутренний диаметр кончика дилатора равен наружному диаметру мини-проводника
- Для извлечения интродьюсера с гидрофильным покрытием M Coat требуется в два раза меньше усилий по сравнению с традиционными интродьюсерами без покрытия

Доступные наборы:

- **Набор M Coat™ типа А** включает интродьюсер, дилатор, пластиковый мини-проводник и пластиковый внутривенный мини-катетер (на пункционной игле)
- **Набор M Coat™ типа R** включает интродьюсер, дилатор, металлический мини-проводник и металлическую пункционную иглу

▶ Набор M Coat™ типа А

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 cm, 16 cm и 25 cm
Покрытие интродьюсера	Гидрофильное M Coat™
Мини-проводник	Пластиковый прямой 0.025" (0.64 мм) 45 см для 10-см интродьюсера и 80 см для 16-см и 25-см интродьюсеров
Пункционная игла	Пластиковый внутривенный мини-катетер – 20G x2" (0.9 x 51 мм), в набор также входит 2.5-мл шприц
Совместимость проводника	0.025" (0.64 mm)
Упаковка	лоток

Спецификация

Внутренний диаметр	Длина интродьюсера		
	10 cm	16 cm	25 cm
5 Fr	RM*AF5J10SQW	RM*AF5J16SQW	RM*AF5J25SQW
6 Fr	RM*AF6J10SQW	RM*AF6J16SQW	RM*AF6J25SQW

При размещении заказа, пожалуйста, указывайте код продукта

▶ Набор M Coat™ типа R

Общие характеристики

Длина интродьюсера	10 cm, 16 cm и 25 cm
Покрытие интродьюсера	Гидрофильное M Coat™
Мини-проводник	Металлический прямой 0.021" (0.53 мм) и 0.025" (0.64 мм) 45 см для 10-см интродьюсера и 80 см для 16-см и 25-см интродьюсеров
Пункционная игла	Металлическая пункционная игла – 21G x 1½" (0.8 x 38 мм), 20G x2" (0.9 x 51 мм)
Совместимость проводника	0.021" (0.53 mm) и 0.025" (0.64 mm)
Упаковка	лоток

Спецификация

Внутренний диаметр	Совместимость с проводником	Длина интродьюсера		
		10 cm	16 cm	25 cm
5 Fr	0.021" (0.53 mm)	RM*RF5F10PQ	RM*RF5F16PQ	RM*RF5F25PQ
5 Fr	0.025" (0.64 mm)	RM*RF5J10PQ	RM*RF5J16PQ	RM*RF5J25PQ
6 Fr	0.021" (0.53 mm)	RM*RF6F10PQ	RM*RF6F16PQ	RM*RF6F25PQ
6 Fr	0.025" (0.64 mm)	RM*RF6J10PQ	RM*RF6J16PQ	RM*RF6J25PQ

При размещении заказа, пожалуйста, указывайте код продукта

Педиатрический набор интродьюсеров Radifocus Introducer II


Интродьюсер



Интродьюсеры предназначены для чрезкожного введения в сосуд в целях обеспечения доступа и облегчения процедуры вмешательства в целом.

Особенности:

- Уникальный запатентованный гемостатический клапан компании «Терумо» обеспечивает бескомпромиссный гемостаз, предотвращая кровотечение и аспирацию воздуха
- Плавный переход «шафт-дилататор» и оптимальная конусообразная конструкция дилататора заметно облегчают введение интродьюсера
- Тонкая рентгеноконтрастная стенка shaft и антизагибочный рукав помогают в управлении интродьюсером
- Специальная форма крепления дилататора предотвращает смещение дилататора при введении и позволяет удалить дилататор одной рукой
- Нитиноловый сверхэластичный мини-проводник, обеспечивающий плавное введение и извлечение интродьюсера

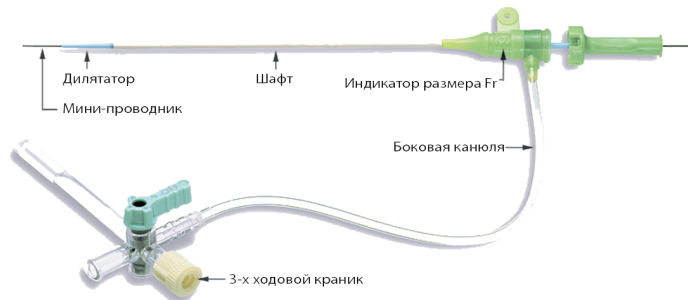

Доступные наборы:

- **Набор типа А** включает интродьюсер, дилататор, пластиковый мини-проводник и пластиковый внутривенный мини-катетер (на пункционной игле)
- **Набор типа В** включает интродьюсер, дилататор и пластиковый мини-проводник

▶ Набор типа А

Общие характеристики

Длина интродьюсера	5 см и 7 см
Мини-проводник	Пластиковый прямой 0.025" (0.64мм) 45 см
Совместимость проводника	0.025" (0.64 mm)
Иньекционная игла	Пластиковый внутривенный мини-катетер 20G x 1 1/2" (0.9 x 38 мм), в набор также входит 2.5-мл шприц
Упаковка	ЛОТОК

Спецификация

Внутр. диаметр	Длина интродьюсера	
	5 см	7 см
4 Fr	—	RS+A40G07SQ
5 Fr	RS*A50G05SQ	RS+A50G07SQ
6 Fr	RS*A60G05SQ	RS+A60G07SQ

При размещении заказа, пожалуйста, указывайте код продукта

▶ Набор типа В

Общие характеристики

Длина интродьюсера	7 см
Мини-проводник	Пластиковый прямой 0.025" (0.64мм) 45 см
Совместимость проводника	0.025" (0.64 mm)
Упаковка	ЛОТОК

Спецификация

Внутр. диаметр	Длина интродьюсера	Код продукта
4 Fr	7 см	RS+B40G07SQ
5 Fr	7 см	RS+B50G07SQ
6 Fr	7 см	RS+B60G07SQ

При размещении заказа, пожалуйста, указывайте код продукта